


# belulu® ~classy~

美ルル クラッシイ

## 使用说明书

诚挚感谢您购买本公司产品  
请仔细阅读使用说明书后再使用本品  
本说明书尾页附有产品说明书  
请妥善保管

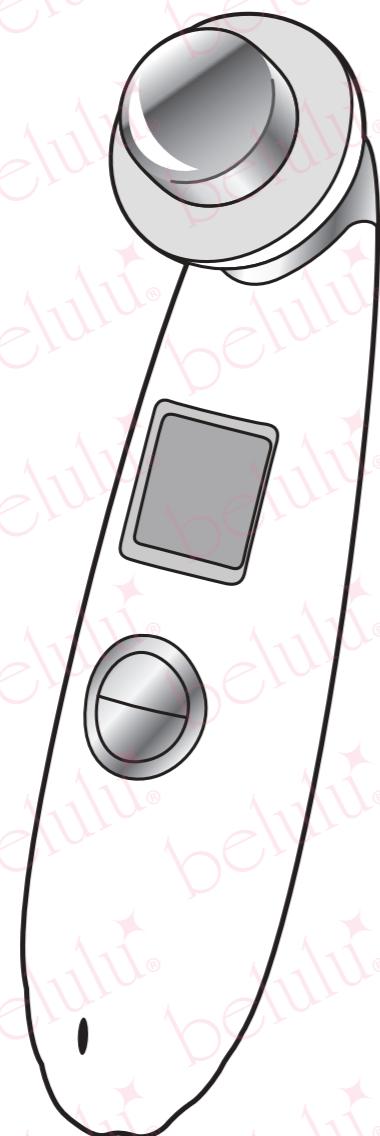

### 1 使用前请仔细阅读。

- |             |   |
|-------------|---|
| ⚠<br>警<br>告 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 使用电压、AC适配器等，请务必按照本说明书指示条件使用。</li><li>● 请勿直视LED灯，避免照射眼睛。否则有可能对眼睛有伤害。</li><li>● 若本品出现破损、故障、变形、电源线断线等情况，请立即停止使用。</li><li>● 若出现冒烟、异味或异常变热的情况，请立即关掉电源停止使用。</li><li>● 请勿拉扯专用充电线，请勿用湿着的手接触电源插孔。</li><li>● 请勿在火炉等高温场所使用或放置本品，适配器或充电电源线。</li><li>● 请避免在手潮湿的情况下使用本品，请勿在附着水汽或灰尘时使用本品。</li><li>● 本品不具备防水功能。请勿洗澡时使用本品，请勿将本品放置于潮湿的地方。<br/>因为有可能会出现冒烟、触电或故障等情况。</li><li>● 若使用后皮肤出现异常的情况，请立即停止使用及时就医。</li><li>● 请确认以下禁用人群，符合该情况的人群请勿使用本品。</li><li>● 请勿分解、改造本品。因为有可能会造成本品及附属品的故障或破损等情况。<br/>若因此而造成本品及附属品的故障问题，本公司概不负责。</li></ul> |
| ⚠<br>注<br>意 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 皮肤薄弱的部位，请避免过度使用本产品。</li><li>● 使用中若有疼痛现象，请立即将按摩头从皮肤上拿开。</li><li>● 请避免摔落、敲打等强烈撞击。</li><li>● 充电约4~8小时完成。充电完成后请立即拔掉电源，请勿继续充电。</li><li>● 除充电外，请断开充电线与本机的连接。充电中请勿使用本产品。</li><li>● 清洁本品时请用拧干的湿布擦拭。请勿使用挥发油、稀释剂等溶剂类物质擦拭。</li><li>● 若不按照以上注意事项、警告，使用不当或任意拆解或改造本品，从而造成的故障或破损本公司概不负责。</li></ul>   |

#### 〈禁用人群〉



- 急性疾患者
- 热性疾患者
- 血压异常人士
- 传染病患者
- 心脏疾病患者
- 使用医用电子器械的人士（如心脏起搏器等体内植入式医用电子器械、人工心肺等生命维持电子机、心电图等穿戴式医用电子器械）
- 有皮肤癌病史的人士
- 糖尿病及其他疾病引起的皮肤异常者
- 孕妇
- 哺乳期
- 肌肤炎症（特应性皮炎、过度晒伤造成的肌肤炎症、痤疮化脓引起炎症、过敏体质引起的肌肤敏感人群）
- 由化妆品引起的皮肤炎人群
- 体质差的人群
- 长期服用类固醇荷尔蒙药剂的人群

#### 〈禁用部位〉

- 恶性肿伤
- 伤口处
- 骨头和关节上
- 整形等使用硅胶的部位
- 声带处
- 头发、眼睛或耳朵周围、粘膜等敏感部位

## 2 配套内容与名称

※附属配件及包装以实物为准。

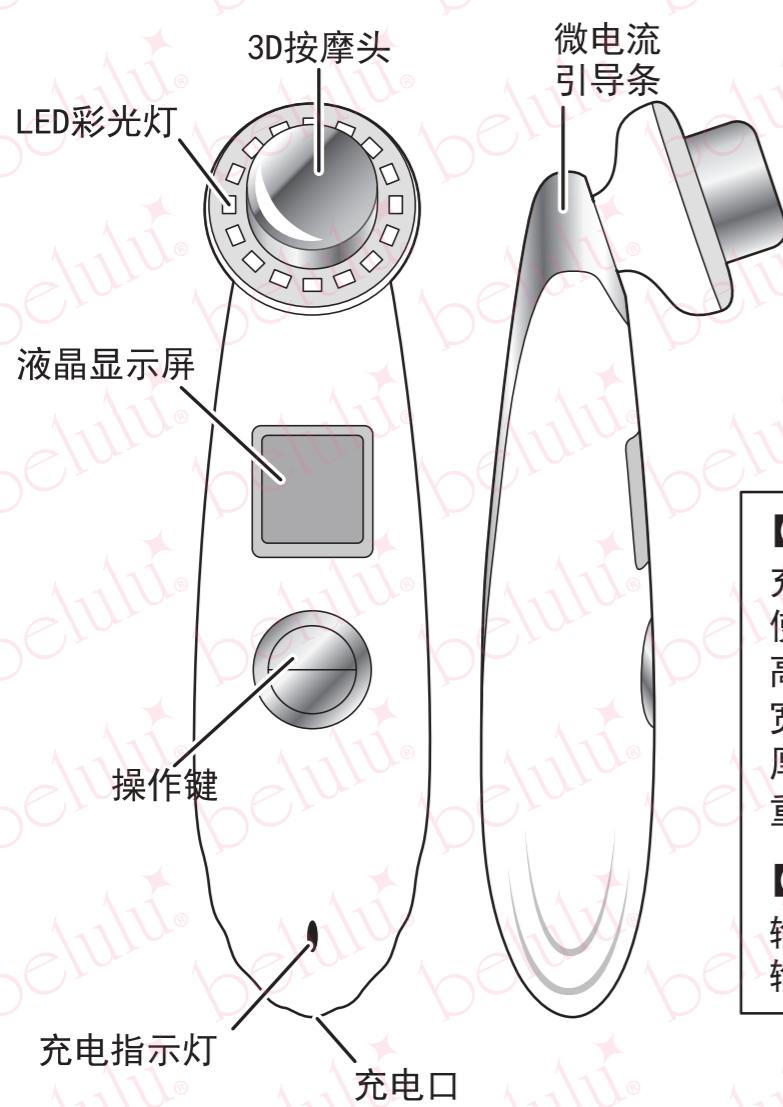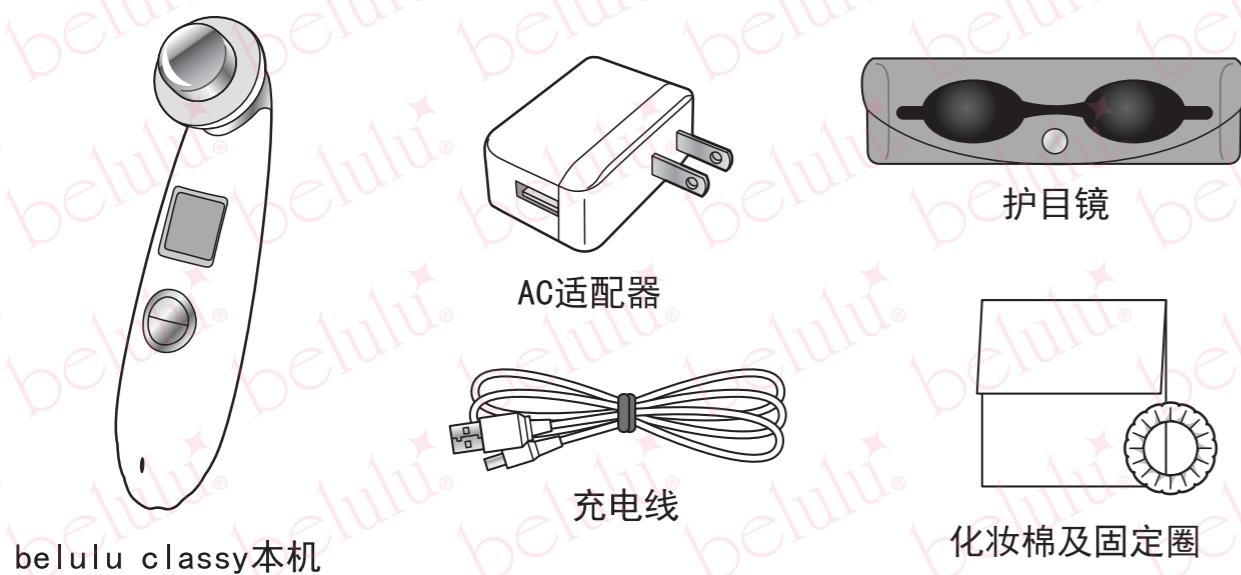

### 【产品规格】

充电时间：4~8小时 输入：5V/0.5A  
使用电池：锂电池  
高度：160mm  
宽40mm(按摩头部分)  
厚32mm(机身部分)  
重量：142g

### 【USB适配器规格】

输入：100~240V 50/60H z 0.2A  
输出：5V/1A

## 3 本机充电

●液晶显示屏右下角电池余量共三格。剩余电量一格或无电量情况请及时充电。



充电完成



可使用




可使用  
(建议充电)




需要充电

- 购买后第一次使用时或长时间未使用，机器会出现反应较为迟钝的情况，请先充满电。
- 请务必关掉电源。
- 将充电线接口插入机身的充电口。
- 充电指示灯亮红灯则表示正在充电。  
※充电过程中机身会有轻微发热，属于正常现象。
- 充电时间和机器工作时间的长短请以实际使用情况为准。
- 充电指示灯亮绿灯则表示充电完成，请注意及时拔下充电线。
- 请勿边充电边使用。除充电情况外，请不要让机子长期处于连接USB电源的通电状态。
- 充电时室温应在15~30℃之间，低温情况下充电会导致电池寿命的缩短，请在适宜的室温下进行充电。另外，在低于0℃的环境中充电速度可能会变慢。
- 为了保护内置电池，即使长期不用，也要保持每月充电一次，防止过度放电。
- 如果正常充电使用，但使用时间短，说明电池老化。

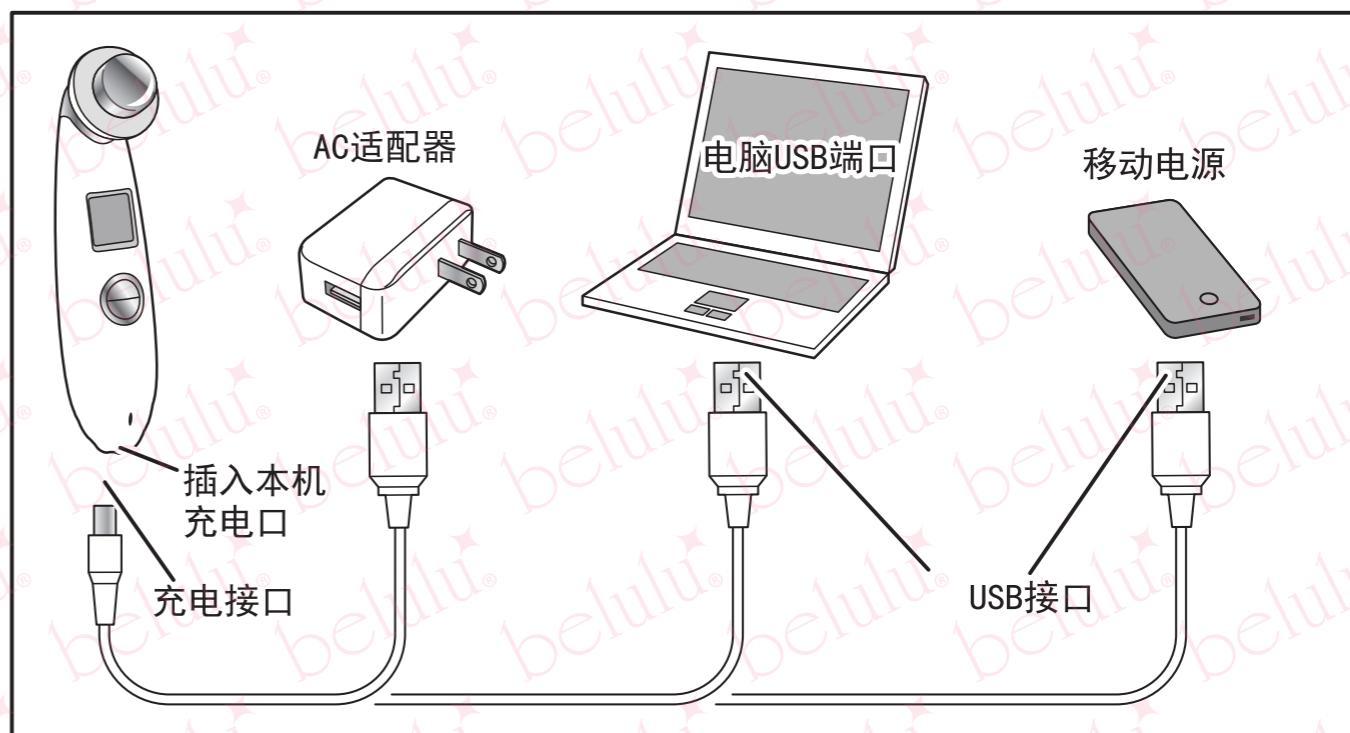

## 4 按键操作


**ON/OFF键** 设定电源开关/离子模式/超声波模式。

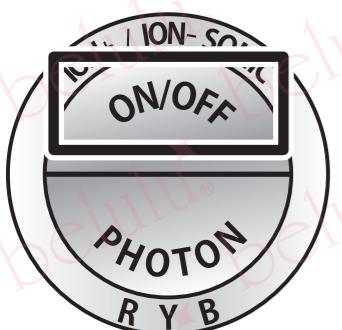

- 长按ON/OFF键2秒钟以上开机，液晶显示屏光亮，并显示各功能图标，处于待机状态。
- 在此状态下，每按一下ON/OFF键，各功能模式依次转换为：离子导出→离子导入+震动按摩→离子导入+超声波（弱）→离子导入+超声波（中）→离子导入+超声波（强）。


开机状态时，经过一段时间液晶显示屏会自动灭灯。这个状态下即使按键，仅为液晶显示屏亮灯，并非模式切换。

液晶显示屏灭灯后，若想切换模式，按一次按键仅为液晶显示屏亮灯，需要再按一次才能切换模式。

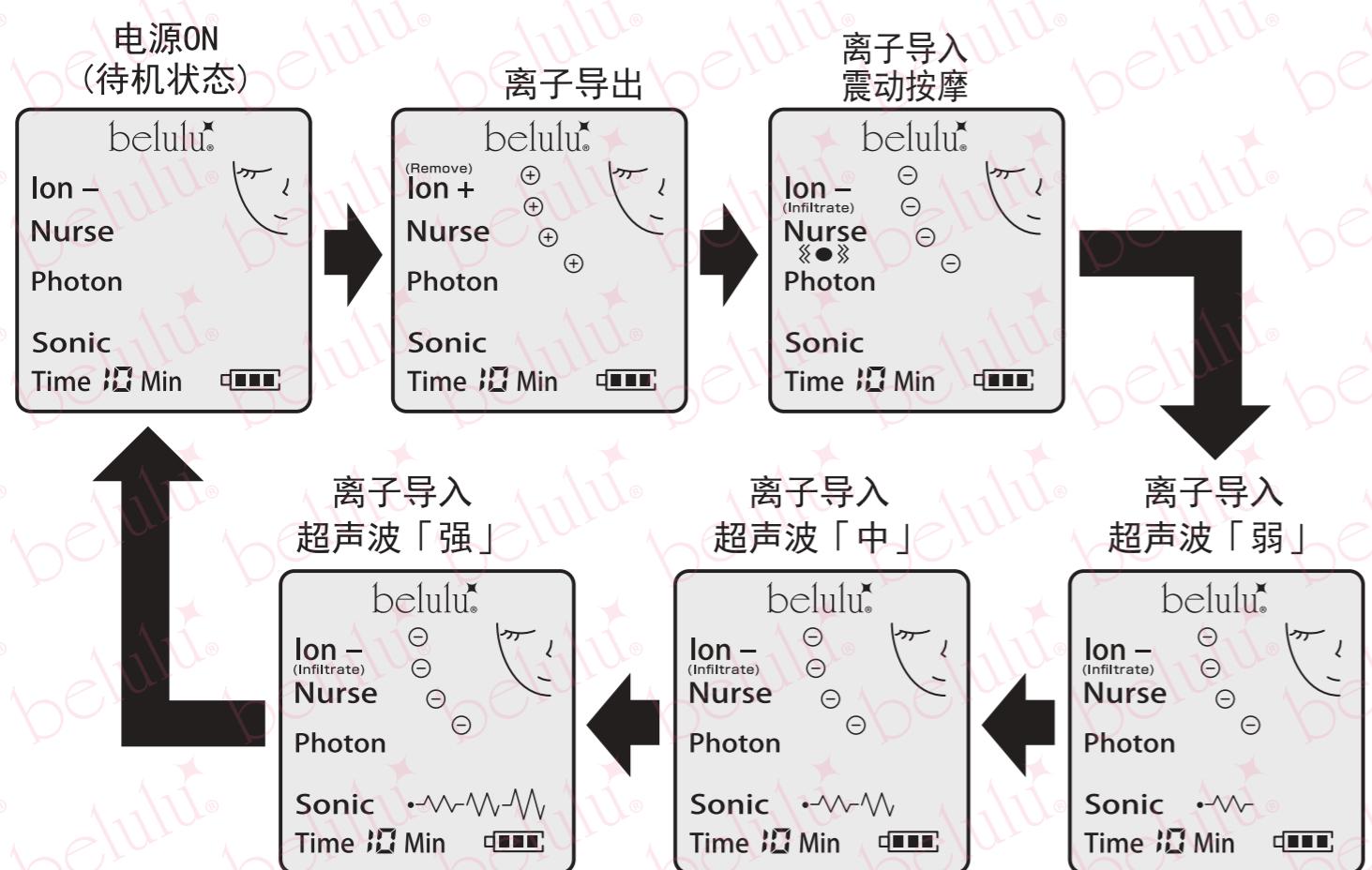

以上功能都可以和光子嫩肤模式同时进行。在任何模式下，按PHOTON键即可启动光子嫩肤模式。详见PHOTON键说明。

**PHOTON键** 设定LED彩光灯。

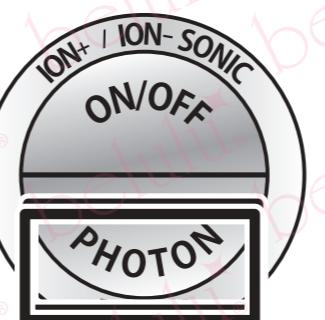

- 按一下ON/OFF键开启电源，液晶屏显示为蓝色光亮状态，并显示出各项功能的图标状态。
- 在此状态下，再按一次Photon键，光子嫩肤模式依次转换为：红色LED→黄色LED→蓝色LED→LED模式关闭。  
※请勿长时间直视LED灯。

开机状态时，经过一段时间液晶显示屏会自动灭灯。这个状态下即使按键，仅为液晶显示屏亮灯，并非LED彩光灯功能切换。  
液晶显示屏灭灯后，若想切换LED彩灯，按一次按键仅为液晶显示屏亮灯，需要再按一次才能切换模式。



光子嫩肤可以和离子模式、超声波模式同时使用。  
在LED灯亮灯时，按ON/OFF键，可启动离子、超声波模式。  
离子模式和超声波模式使用方法请参照【ON/OFF键】的说明。

## 5 使用前须知

使用前请检测各项功能和进行皮肤测试。

### 操作检测

#### 【正离子导出模式】

1. 请参照【ON/OFF键】的使用方法，检测正离子导出模式。
2. 若 $\oplus$ 的图标在动，表示功能运作中。  
※正离子模式工作中没有声音和震动。




#### 【负离子导入模式】

1. 请参照【ON/OFF键】的使用方法，检测负离子导入模式。
2. 若 $\ominus$ 的图标在动，表示功能运作中。
3. 负离子导入模式与震动按摩和超声波同时工作。



#### 【超声波】

1. 请参照【ON/OFF键】的操作介绍页面，确认超声波模式可由「弱」 $\rightarrow$ 「中」 $\rightarrow$ 「强」正常替换。(离子导入同时也在运作)

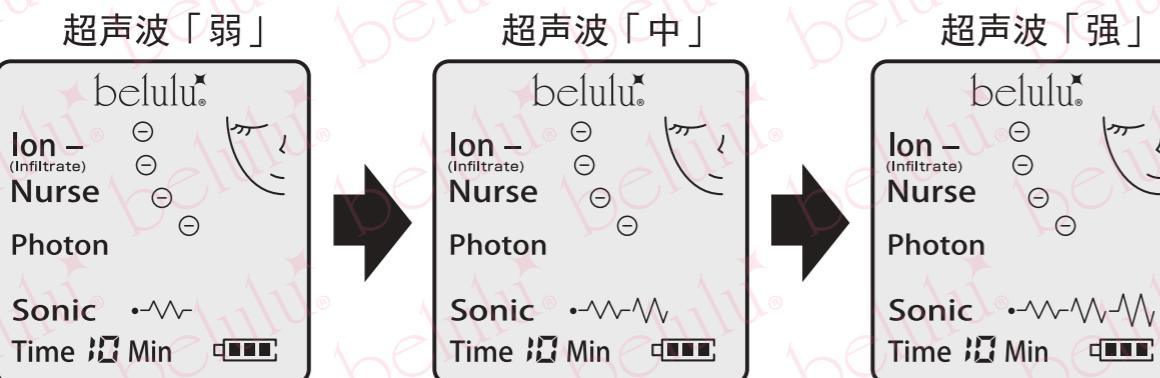

2. 3D按摩头靠近耳朵会听到「滋」的微微声响，表示运作中，属于正常现象。

3. 3D按摩头上滴少量水，水会发生震动变成雾态，属于正常现象。

超声波的强度「弱」「中」「强」三个档位。

※滴水过多，由于水的重量导致水滴无法震动变成雾态，所以1~2滴即可。

#### 【光子嫩肤】

1. 参照【PHOTON键】的介绍页，确认LED彩灯可以由「红灯」 $\rightarrow$ 「黄灯」 $\rightarrow$ 「蓝灯」转换。
2. 确认LED灯是否正常亮灯。  
※检测LED灯是否亮灯时，请不要长时间直视彩灯。
3. 请确认液晶屏上有「」符号。

### 皮肤测试

- 洗干净内侧手腕，把水汽擦干。
- 请涂上化妆水或美容液等，再测试本机的功能。
- 确认好使用后没有任何异常情况后可以进行脸部护理。如果皮肤出现异常情况，请立即停止使用本品，立即就医或联系本公司。

## 6 功能和效果

### 【超声波】

超高速振动刺激皮肤，增强血液流通、淋巴流通，促进新陈代谢。

提高了保湿效果，也有紧致提拉的功效，改善皱纹和下垂部位。和负离子导入功能同时使用效果更佳。

※本功能与负离子导入模式同时进行。超声波模式无法单独使用。

### 【正离子导出】（离子清洁）

利用正离子的吸引力，有效清除残留在毛孔深处的污垢及老化角质。比通常卸妆清洁力更强，有效解决因手洗脸清洁不掉毛孔堵塞、黑头残留等问题。

### 【负离子导入】（离子保湿）

正离子导出后清洁干净的毛孔，用负离子导入功能使肌肤很好的吸收美容成分。

与震动按摩同时使用，可将美容成分渗透到肌肤的每个细微之处，深入发挥美肌效果。

※本功能与震动按摩和超声波同时进行。离子导入模式无法单独使用。

### 【震动按摩】

震动按摩可将美容精华或凝胶、面霜渗透至肌肤深层。促进血液循环，增强肌肤细胞活性。

※本功能与负离子导入功能同时进行。震动按摩功能无法单独使用。

### 【光子嫩肤】

LED彩光的每种颜色对应的波长不同，照射到肌肤深度不同，不同颜色彩光给肌肤带来不同效果。根据肌肤问题选择对应的彩光吧。

**红色** LED 630nm波长(±10nm)

增加肌肤胶原蛋白，改善雀斑、皱纹、皮肤松弛等肌肤问题。修复由紫外线造成的肌肤损伤，有良好的抗衰老功效。

**蓝色** LED 415nm波长(±10nm)

有效消除痤疮形成的根源—活性氧，抑制痤疮生成，镇定痤疮，平整肌肤。

**黄色** LED 590nm波长(±10nm)

促进肌肤新陈代谢，有效改善肌肤皱纹，痘痕等色素沉淀问题。

### 可选择的组合搭配

本品各模式组合可同时进行护理。  
推荐给各位爱美人士进行参考。

正离子导出 + 光子嫩肤

负离子导入(震动按摩) + 光子嫩肤

负离子导入(超声波) + 光子嫩肤


### 倒计时功能

本机倒计时功能，开启电源后液晶屏将会显示时间，10分钟过后电源将自动切断。

模式选择后液晶显示屏的左下角会显示出「10分钟」，并以每一分钟为单位进行倒计时。



## 7 开始护理吧！

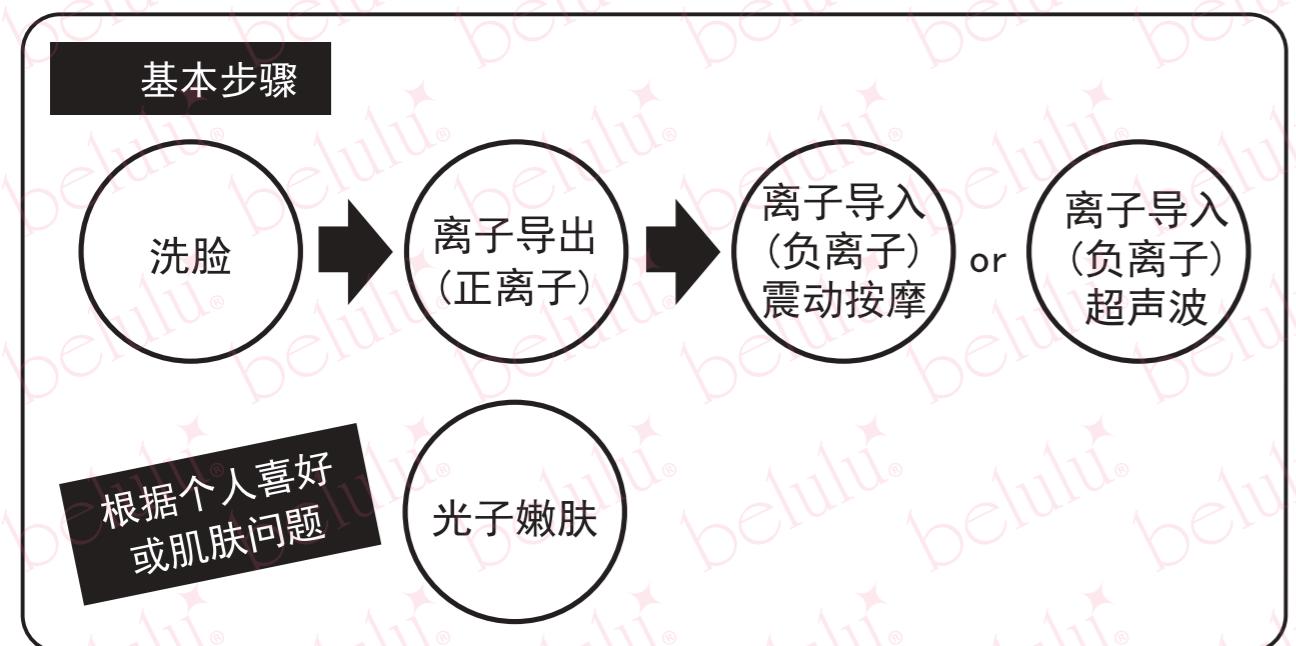

### 请务必遵守

- 本品不支持防水，请勿在浴室等湿气较重的场所使用。
- 请勿在暖炉等高温场所使用本品。
- 在使用LED灯进行光子嫩肤过程中，请闭上双眼或佩戴遮光眼镜，不要长时间直视LED灯。
- 在使用本品进行导入等护理时，必须使用美容液或化妆水等。否则有可能因为皮肤过于干燥造成摩擦力过大，对皮肤造成伤害。（在单独使用光子嫩肤护理时，可以不使用美容液）
- 使用时请确保手触碰到侧边的微电流引导条。
- 使用时请注意使3D按摩头的平面紧贴皮肤，要轻轻滑动，不要过度用力地压迫皮肤，否则易对皮肤造成损伤。
- 在使用时，请取下身上的手表、首饰等金属类制品。
- 在使用中若皮肤感到异常、不适应，请立即停止使用并咨询专业医生或与本公司联系。


### 【使用前准备】

- 水或者清洁化妆水  
… 正离子导出时使用。
- 精华・美容凝胶或导入化妆水  
… 负离子导入时使用。请使用粘稠的、无添加的高浓度美容成分的产品。推荐使用belulu专用b2美容凝胶。
- 乳液或面霜  
… 全部护理完成后用于肌肤的保湿呵护。

### 1. 正离子导出 1日1次10分钟 一周使用三次

日常洁面，洗脸后请将脸上的水分擦拭干净。

正离子可以吸附出洗脸后残留在毛孔中的污垢。

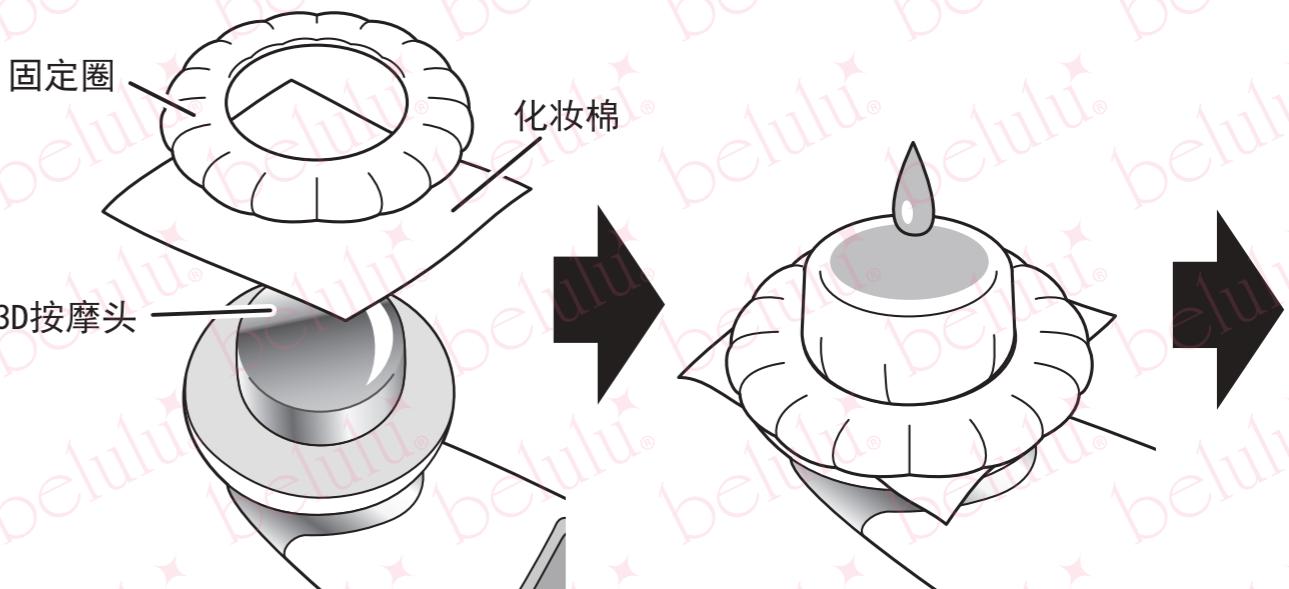

- ① 用固定圈将化妆棉固定在3D按摩头上。听到「咔嚓」声表示已固定好。

- ② 取几滴纯净水或清洁化妆水滴入化妆棉中。使化妆棉充分湿润。



- ③ 按ON/OFF键设定正离子清洁模式。  
将3D按摩头轻轻地贴近脸部后滑动。



逆时针转动固定圈即可取下。


### 常见问题

### 正离子导出时可以使用化妆水么？

正离子导出功能是清除残留在毛孔里的污垢，如果使用普通化妆水，污垢依然存在且毛孔闭合，无法发挥离子导出的功效。请务必使用纯净水或清洁导出化妆水。


## 【护理技巧】

把脸部划分为「嘴部右边」、「嘴部左边」、「右脸颊」、「左脸颊」、「鼻子」、「额头」几个区域，每个区域用3D按摩头轻轻地贴近脸部进行护理。鼻头周围，特别是污垢容易残留的地方，用3D按摩头进行重点护理。每做完一个区域的护理，请及时补充纯净水或清洁化妆水。

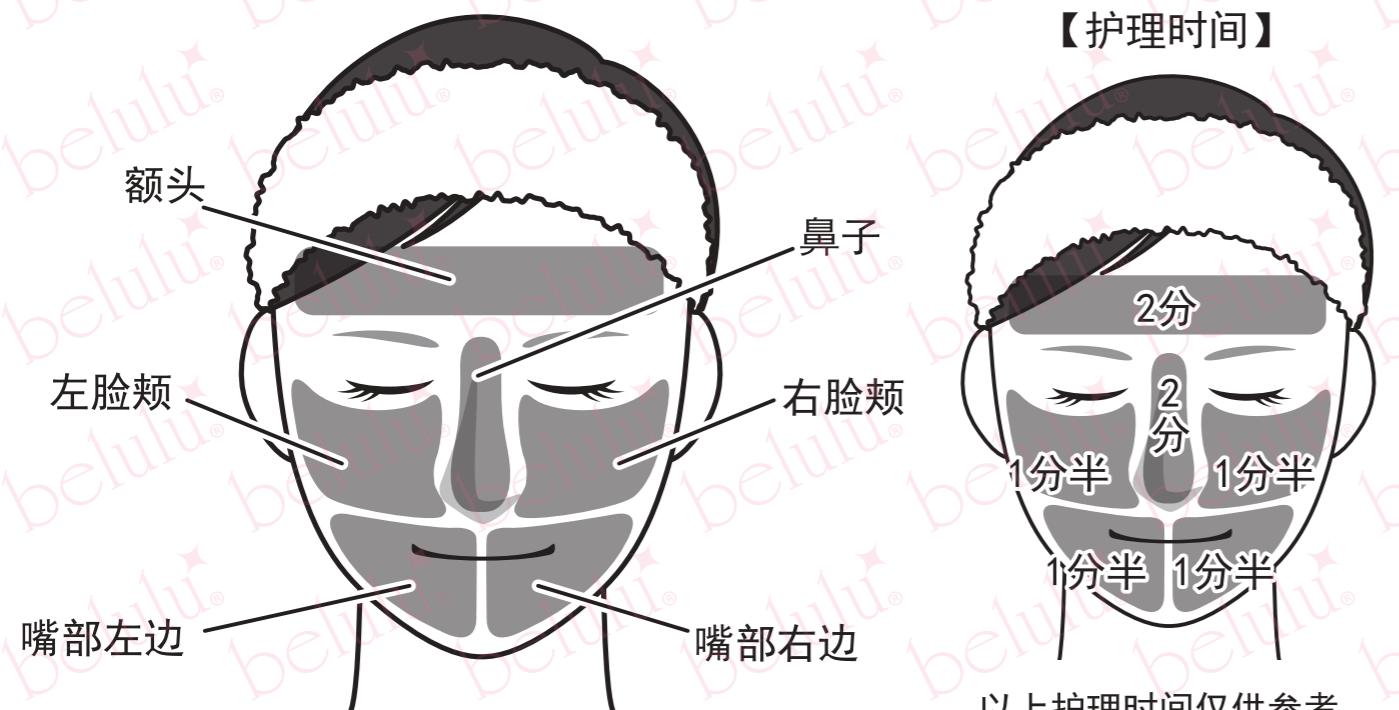

## 【护理时间】

以上护理时间仅供参考。  
根据自身实际情况使用。

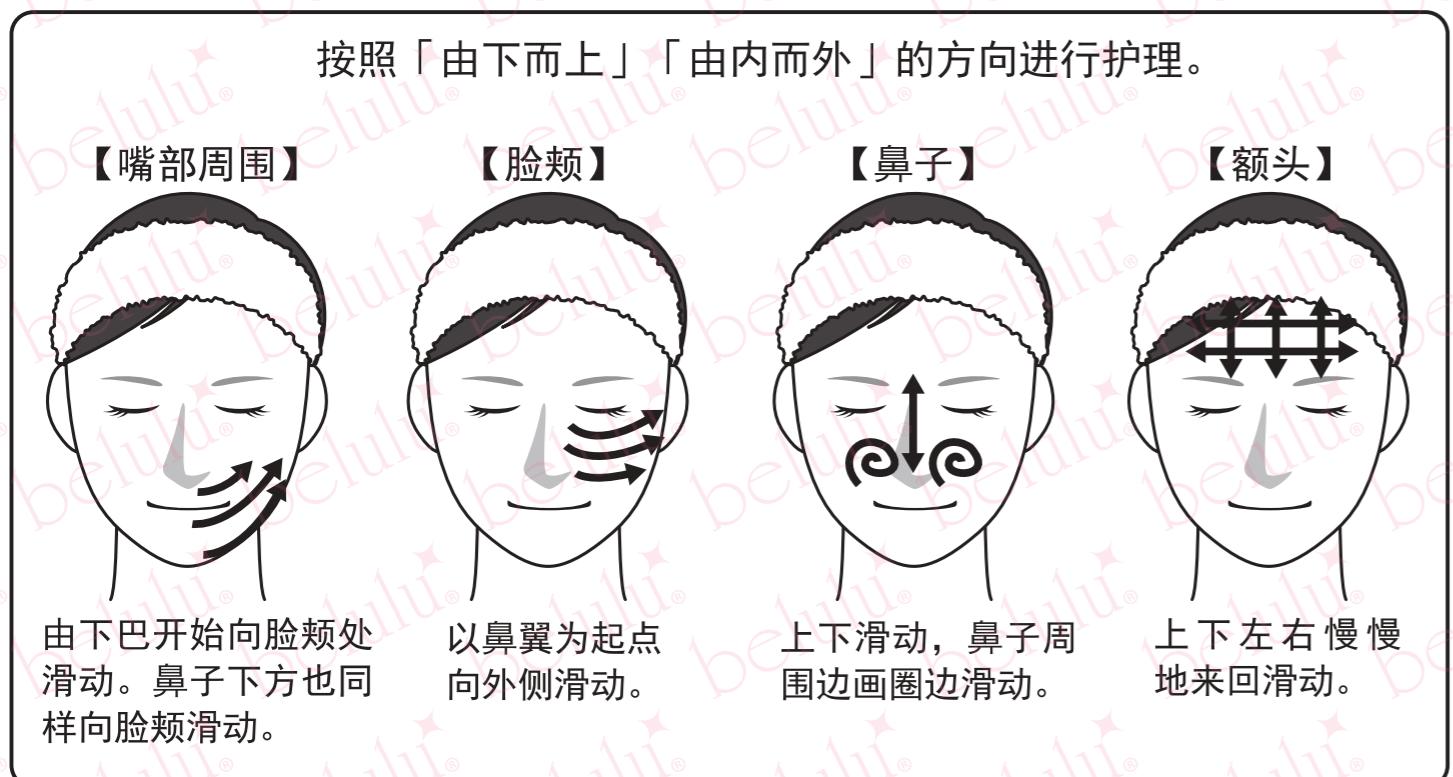

## 2-A. 负离子导入 + 震动按摩


1日1次10分钟，每日都可以使用

离子导出后，把脸上残留的水汽擦拭干净。

通过负离子的微弱电流能够将通常轻拍无法渗透到肌肤深层的保湿美容成分渗透到肌底。  
同时震动按摩可以促进血液循环，推荐给想消除水肿或提亮肤色的人群。



① 将美容凝胶或浓稠的化妆水或精华滴在3D按摩头上，或直接涂于脸上。※请勿使用乳液或面霜。

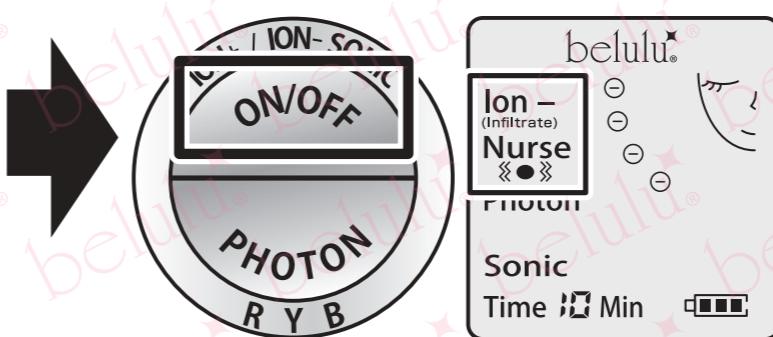

③ 按ON/OFF键开启负离子导入+震动按摩模式。

④ 将3D按摩头轻轻地贴近脸部。详细方法请参照P16的说明进行护理。





## 2-B. 负离子导入 + 超声波

1日1次10分钟 一周使用三次


离子导出后，把脸上残留的水汽擦拭干净。

通过负离子的微弱电流能够将通常轻拍无法渗透到肌肤深层的保湿美容成分渗透到肌底。而且超声波可以使肌肤活性化，推荐给有小皱纹或皮肤干燥的人群。

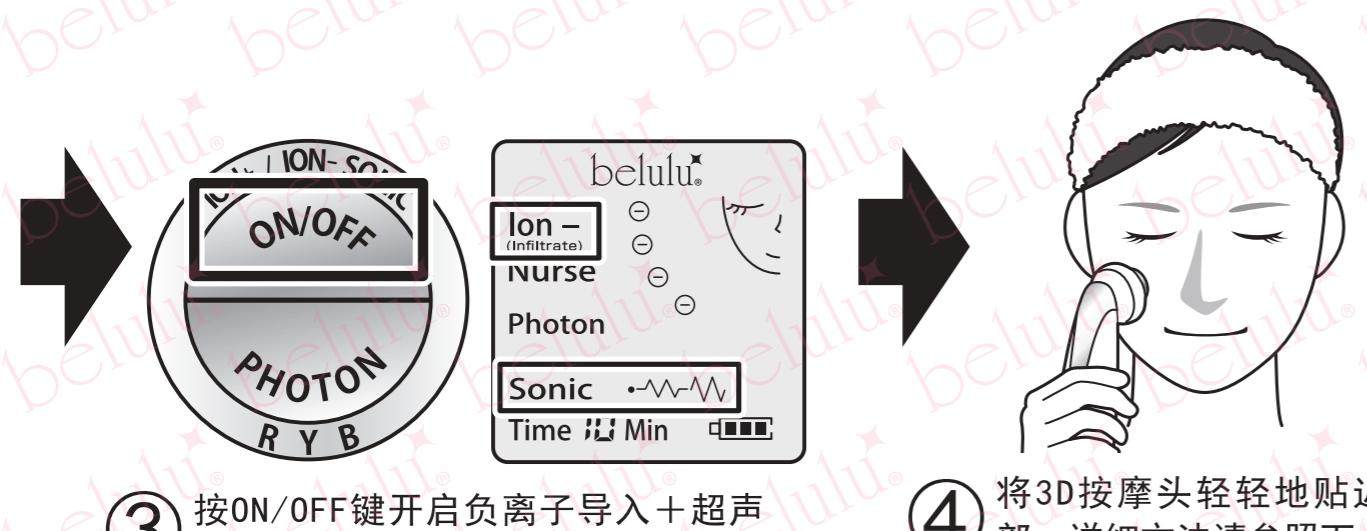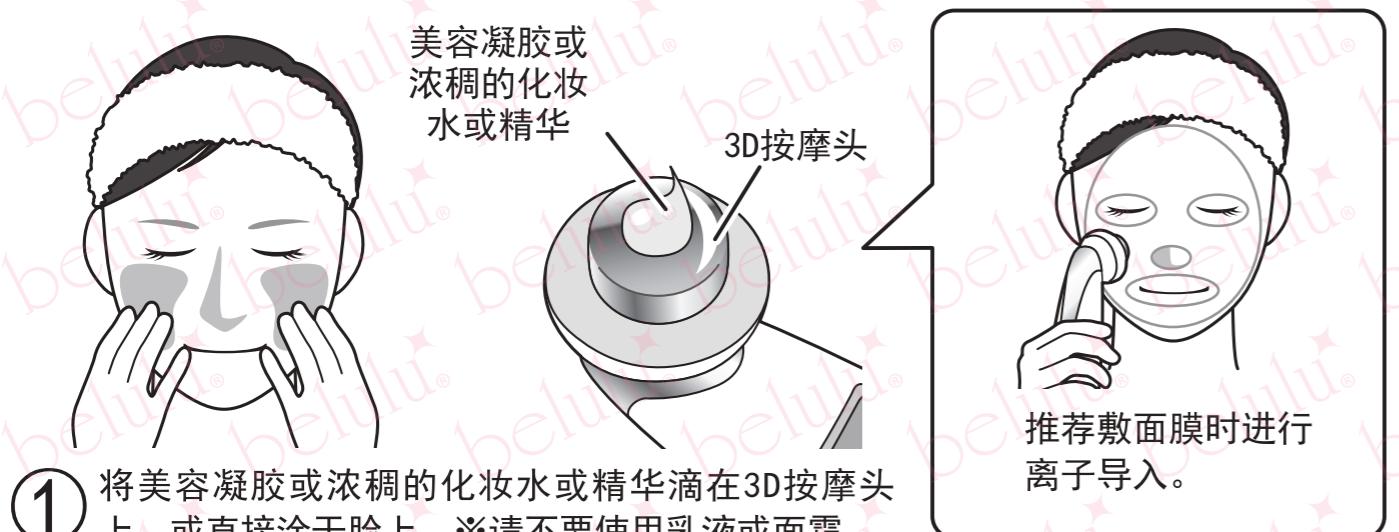

### 【护理技巧】

把脸部划分为「嘴部右边」、「嘴部左边」、「右脸颊」、「左脸颊」、「鼻子」、「额头」几个区域，每个区域用3D按摩头轻轻地贴近脸部进行全脸护理。嘴部周边，尤其特别容易干燥的地方可用按摩头长时间按摩，做重点护肤。美容啫喱或化妆水、美容液等请及时补充。

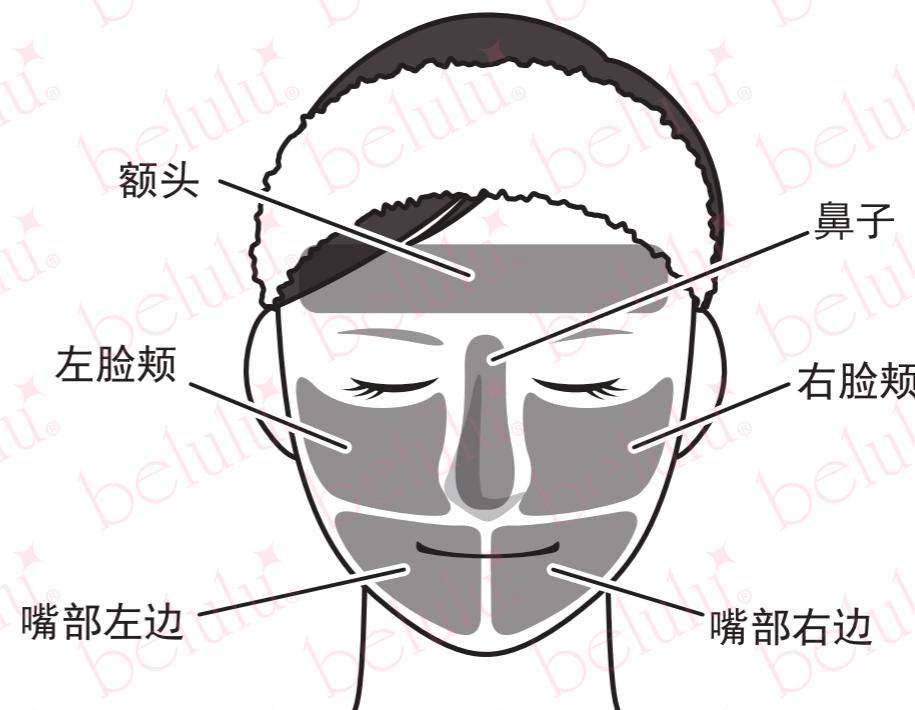

以上护理时间均为举例说明。  
根据自身肌肤情况灵活应变。

按照「由下而上」「由内而外」的方向进行护理。  
与离子导出时的手法一致，边画圈边滑动。

#### 【嘴部周围】



以下巴为起点，  
由下而上向脸颊  
处滑动。

#### 【脸颊】



以鼻翼为起点向外  
侧边画圈边滑动。

#### 【鼻子】



鼻梁处边画圈边上  
下滑动。鼻子周围  
边画圈边滑动。

#### 【额头】



上下左右以画圈  
的方式慢慢地来回滑动。


护理完成后，将残留的凝胶、化妆水或精华涂抹吸收，再使用乳液或面霜进行保湿护理。

光子嫩肤，针对肌肤问题护理！

各色1日1次10分钟 每日可以使用

离子导入后，脸上残留有凝胶、化妆水等，请涂抹吸收干净后使用即可。  
贴面膜的情况，建议取下面膜后使用。  
※请不要使用乳液或面霜。  
进行光子嫩肤护理时，不涂凝胶也可以。

请勿裸眼长时间直视LED灯。  
护理时请闭上眼睛或带上护目镜。

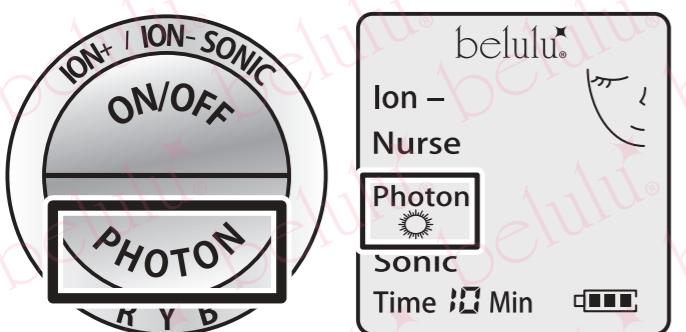

① 按PHOTON键开启光子嫩肤模式。  
根据肌肤问题选择LED彩灯。(请参照下列说明)

② 请参照下列说明，根据个人所需，选择对应的彩灯进行护理。

### 红色 LED

630nm波长(±10nm)

增加肌肤胶原蛋白，改善雀斑、皱纹、皮肤松弛等肌肤问题。修复由紫外线造成的肌肤损伤，有良好的抗衰老功效。

针对皱纹或皮  
肤下垂问题进  
行护理。

### 蓝色 LED

415nm波长(±10nm)

有效消除痤疮形成的根源—活性氧，抑制痤疮生成，镇定痤疮，平整肌肤。

针对痤疮或  
痘印问题进  
行护理。

### 黄色 LED

590nm波长(±10nm)

促进肌肤新陈代谢，有效改善肌肤皱纹，痘痕等色素沉淀问题。

针对雀斑或  
暗沉问题进  
行护理。

## 8 护理结束后

- 按ON/OFF按钮，关闭本机电源。
- 将残留在脸上的凝胶、化妆水或精华等用手慢慢涂抹吸收干净。
- 按照平常护肤习惯，最后涂上乳液或面霜等进行保湿护理。
- 3D按摩头上残留的美容液请擦拭干净，机身有污渍请用消毒湿巾或纸巾擦拭干净。  
※请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。
- ※请勿水洗清洁本产品。
- 为保证本品清洁卫生，请装箱保存。
- 请勿存放于阳光直射、高温和湿气重的场所。请存放于儿童无法触及的地方。

## 9 常见问题

无法开机	<ul style="list-style-type: none"><li>●没充满电？ 电池在关机状态下是自然放电的，有电量不足的情况。 请连接充电线充电一小时后，再次开启ON/OFF键即可。</li><li>●长按电源键了吗？ 长按电源键2秒以上即可开机。 请参照各操作方法的说明，长按「ON/OFF」键2秒以上。</li></ul> <p><b>【未解决的情况】</b> 考虑到有可能是产品电源线断了或者机器故障等问题，请及时联系本公司。</p>
不能充电	<ul style="list-style-type: none"><li>●充电线是否正确连接？ 确认充电线插口无误，插口不紧不通电，则无法充电。 请参照【本机充电】说明，确认是否插入正确或插紧。</li></ul> <p><b>【未解决的情况】</b> 考虑到有可能是产品电源线断裂或者电池、本机初期不良、机器故障等问题，请及时联系本公司。</p>
超声波不工作	<ul style="list-style-type: none"><li>●请确认操作是否正确。 超声波功能(Sonic)可以达到约300万次/秒的振动。这种速度下的振动用肉眼是无法看到的。肌肤也感觉不到刺激。 若有疑问，请参照「使用前须知」的「超声波」的介绍说明进行操作确认。</li></ul> <p><b>【操作确认后也不工作的情况】</b> 考虑到有可能是本机初期不良或机器故障等问题，请及时联系本公司。</p>

离子导出/导入不工作	<ul style="list-style-type: none"><li>●确认操作是否正确。 离子导出/导入是微弱电流作用于肌肤，有可能感受不到振动或刺激，也听不到声音。 ※离子导入时一起工作的「震动按摩」可以感受到震动也听到声音。 如有疑问，可参照「使用前须知」的「正离子导出」「负离子导入」页面介绍的说明进行确认。</li></ul> <p><b>【操作无误也不工作的情况】</b> 考虑到有可能是本机初期不良或机器故障等问题，请及时联系本公司。</p>
无按键操作后不久就会熄屏	<ul style="list-style-type: none"><li>●并非故障。 本机有节电功能，无按键操作，过一会将自动熄屏。 再按一次键即可激活亮屏。</li></ul>
按键后无法切换模式	<ul style="list-style-type: none"><li>●并非故障。 电源开启状态，经过一段时间会自动熄屏，这个状态下，按一下后亮屏处于激活状态，再按一下即可切换模式。 液晶显示屏灭灯后若想切换模式，按一次按键后灯亮，再按一次键即可切换模式。</li></ul>
液晶显示屏看不清或亮光变暗的情况	<ul style="list-style-type: none"><li>●需要充电。 电量变少液晶显示屏或LED光变弱。 请确认液晶显示屏电量，电量少的情况下请及时充电。</li></ul> <p><b>【充电后无法解决的情况】</b> 考虑到有可能是本机初期不良或机器故障等问题，请及时联系本公司。</p>
护理期间听到「哔」的一声后关机	<ul style="list-style-type: none"><li>●并非故障。 推荐护理时长为10分钟，10分钟过后自动关机。</li></ul>

使用中拿着美容仪的时候会感觉到微微的刺痛感，是因为漏电吗？

**●并非漏电**  
本品的手柄部位的金属条流动着微电流，可以穿过皮肤的屏障让美容成分到达肌肤深处，根据每个人的实际不同感受到的刺激感也有所不同，对人体是无害的。  
**【降低强度痛感依然承受不了的情况下】**  
如需退货请与本公司联系。

### 常见问题

**Q .一定要使用美容液吗？**

A .也可以使用化妆水或者美容凝胶。考虑到渗透率的问题，建议使用水溶性的护肤品。  
由于超声波能将美容成分以高分子形态渗透到肌底，所以使用高浓度无添加的美容产品护肤效果会更好。强烈推荐搭配使用belulu专用美容精华凝胶。

**Q .孕妇也可以使用吗？**

A .孕妇虽然使用上问题不大的，但是由于怀孕时荷尔蒙分泌不稳定肌肤也比较敏感，有可能会引起皮肤问题。本公司不建议使用。推荐听取医生的建议，根据自身的皮肤情况再使用本品。  
(美容仪功能和美容凝胶成分不会对母体或胎儿有影响，请悉知)

**Q .3D按摩头部分使用的是什么材质？**

A .航空级别不锈钢材质。  
不易划伤、腐蚀，不易生锈，不易引起过敏。  
※但不代表所有人都不会有过敏情况。如果担心，可在手腕内侧进行皮肤测试。

**Q .使用后感到不适的情况怎么办？**

A .商品收到后7日内可退货，请与本公司联系。  
※但寄回运费由顾客承担。

**Q .因为洗完脸皮肤紧巴巴的，可以使用完化妆水后再进行离子导出吗？**

A .离子导出的功能是将平时洗脸无法清洁干净的污垢导出来，洗脸后立即使用化妆水润肤，污垢依然残留在肌肤里，毛孔就闭合了，之后的离子导出、导入的功效就发挥不出来了。  
肌肤紧巴巴的是因为肌底处于干燥状态导致，有必要进行彻底保湿的护理。  
所以先通过离子导出彻底清洁肌肤，随后离子导入完成肌肤的保湿护理是很重要的。  
按照以上顺序持续护理，可以改善紧巴巴的干燥肌。

Q. 使用后没感觉到效果

A. 商品使用效果因人而异。

另外本品是以家用便携为主的，与美容沙龙会所使用的大型美容器材有一点区别，见效相对较慢。坚持使用，效果是可以慢慢看到的。

Q. 离子导出后化妆棉没有变脏。

A. 清洁出来的污垢因人而异，不是看到化妆棉变色了才是有污垢排出。

平时不太化妆的人群或彻底卸妆洗脸清洁的人群，离子导出后化妆棉有可能不变色。

多余的角质和皮脂也可以通过离子导出而排出，因为是白色的，在白色化妆棉上也不易看出来。

是否可以每天使用？

Q.

A. 尽管本产品所配备的功能具有较好的美容效果，但过于频繁使用可能会给肌肤带来负担。请您按照本书记载的使用频率进行。

每日频繁使用并不能立即见效，坚持使用最重要。

## 关于保修期内的维修

保修期内为免费维修

购买订单号 姓名 购入商品 已购时间 故障状况

请提供以上信息，并通过电话或者邮件联系本公司

E-mail: support@kireido.com 日本售后联系电话: 0120-09-5121

※不限于使用次数，购买超过三个月，如需修理，来回运费由客人承担。

※已过保修期的产品如需修理，将根据实际修理状况进行收费。

※如有不明之处，请联系本公司。

日本售后地址

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル  
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係 〒221-0801

中国售后地址

广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心 纪丽堂售后部  
0771-2875241

## 【保修书】

※本体以外配件属于消耗品，  
不属保修对象。

本保修书承诺按照所规定内容进行保修。

购买后在保修期内发生故障，请参照本说明书进行维修。

### 〈维修规定〉

1. 在保修期内按照使用说明书操作出现故障的情况可以进行免费维修。
2. 在保修期内，顾客需要维修时请填写本保修书并将产品和保修书按照规定提出维修。
3. 以下情况，即使在保修期内，也不属于免费维修。
  - a. 因使用不当，自行修理、改造而造成的故障及损伤。
  - b. 购买后因移动，跌落及运输碰撞造成的故障。
  - c. 火灾、地震、雷击等自然灾害、异常电压等造成的故障及损伤。
  - d. 保修书上未出现的情况。
  - e. 保修书上未填写客户姓名、购买日期等或是文字修改的情况。

■商品编号: ■品名: belulu classy

■保修期: 收到商品后一年内(不限于使用次数)

■顾客姓名: \_\_\_\_\_

■住址: \_\_\_\_\_

■订单号: \_\_\_\_\_

销售方: 株式会社ビューティフルエンジェル  
日期: 年 月 日 印

●若通过网络平台购买产品，因客人基本信息以及购买信息均有留存，[购买日][店铺印章]即使未填写，也不影响保修。

但咨询或者受理维修时需要客人提供订单编号，因此请您务必保留好您购买时的订单编号。

●产品本体修理会按照本保修书条款执行。因不限制客户法律上的权利，关于已过保修期的商品修理事项，若有不明之处，请咨询本公司。