

belulu hikari Mini

美・ル・ル ヒカリ ミニ

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- LEDを長時間直視したり、目に直接当てないでください。
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 充電アダプターのケーブルを引っ張ったり、濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。
- トランプ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用は避けください。
- 本品は完全防水ではありません。万一のやけどや感電、故障防止のため、浴室など湿気の多い場所での使用や、入浴しながらのご使用は避けください。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

注意

- 皮膚の弱い部分への過度のご使用は避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、ご使用を中止してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 充電中以外は充電アダプターを本体から外してください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用は避けください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器） ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方） ●化粧品による皮膚炎を起こしている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髮、目や目の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

美・ル・ル ヒカリmini 機能紹介

光エステ(Photon)

様々な色のLEDライトを肌に当て、美肌効果を得る施術です。
色によって効果が異なるため、あらゆる肌悩みに直接アプローチします。

赤LED:630nm波長

コラーゲンを増やしてシミ・シワ・たるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効果が期待できます。

黄色LED:590nm波長

新陳代謝を促し、ターンオーバーを正常に整えます。また、加齢・紫外線によるシミやくすみなどの色素沈着を改善します。

青LED:470nm波長

ニキビの原因アクネ菌の殺菌、ニキビの炎症を鎮静化、過剰な皮脂分泌の抑制、ニキビ跡改善など、ニキビケアに最適です。

紫LED:400nm波長

リラクゼーション効果とともにリンパの代謝を促し、スリミング効果がわくみがスリッリ。肌の赤みやクマ改善も期待できます。

振動マッサージと一緒に使ってボディケア

振動マッサージ

適度な振動で血行を促進する他、LEDライトと同時に使うことでボディケアにぴったりの効果が生まれます。

赤LED+振動マッサージ

赤LEDと振動で、二の腕やお腹周り、太ももなどの部分痩せ効果が期待できます。

紫LED+振動マッサージ

バストアップジェルと一緒に使うことで、バストアップ効果が期待できます。

光エステと振動マッサージは個別に使用することができます。


セット内容と製品仕様

※製品仕様や外観は予告無く変更になる場合があります。



LEDカートリッジについて

LEDカートリッジ裏面に、各色を表すカラーシールが貼り付けてあります。
色の不足や重複がないかご確認ください。

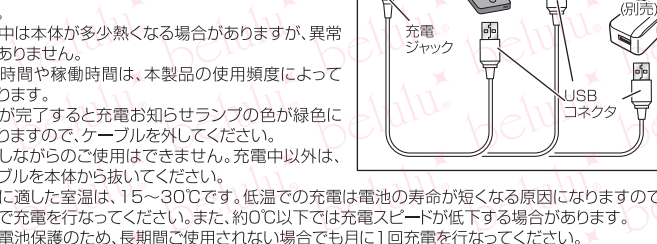


-2-

充電方法

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、稼働時間が短くなった場合、パワー低下がみられた場合は、本体を充電してください。
- 本体の電源をOFFにしてください。
- 充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプター等のUSBポートに接続します。
- 電源ボタン下の充電お知らせランプが赤色に点灯します。
- ※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると充電お知らせランプの色が緑色に変わりますので、ケーブルを外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行ってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行ってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。



使用方法

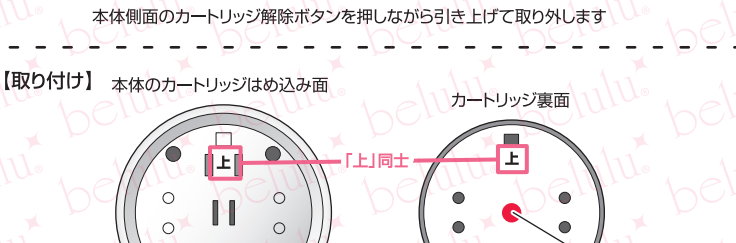

LEDカートリッジの付け替え




-3-

基本のお手入れ方法

- 使用中は目を閉じるか保護メガネを装着し、LEDライトを長時間直視したり目に当てないでください。
- ボディケアを行なう際は、必ずジェルやクリームなどをご使用ください。乾いた肌に使用すると、3Dヘッドが滑りにくくなり肌を傷める場合があります。
- ヘッド部分は肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすったりせず、やさしく滑らせるようにして動かしてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

一つのケアにつき、15分を目安に行ってください。
LED、振動マッサージともに15分経つと自動的に停止します。


フェイスクア

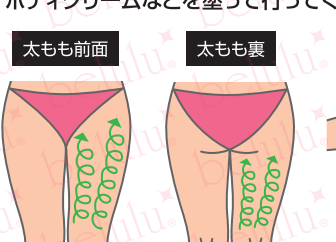


- お好みのカラーのLEDカートリッジを取り付けたら、電源ボタンを押して電源をONにします。
- LEDライト点灯ボタンを押してLEDを点灯させます。
- 赤色LEDの場合はシワが気になる部分、青色LEDの場合はニキビができてくる箇所など、ケアしたい部分に光を当てます。
- ライトを肌から1～2cm程度離すと、光が広い範囲にまんべんなく当たり、効率的です。

ボディケア

【部分痩せ】小さく円を描きながらゆっくり動かすのがポイントです。
ボディクリームなどを塗って行ってください。

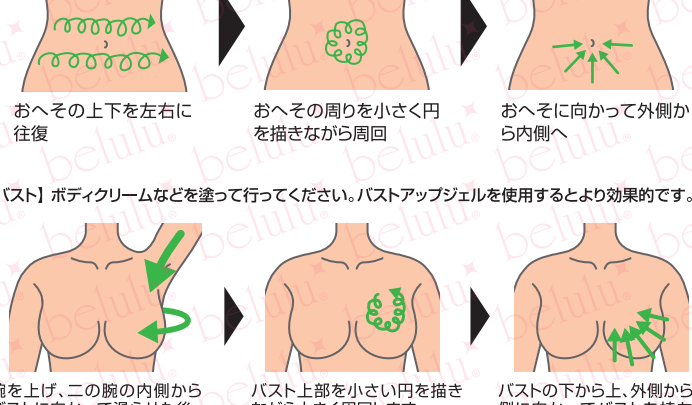

【バスト】ボディクリームなどを塗って行ってください。バストアップジェルを使用するとより効果的です。

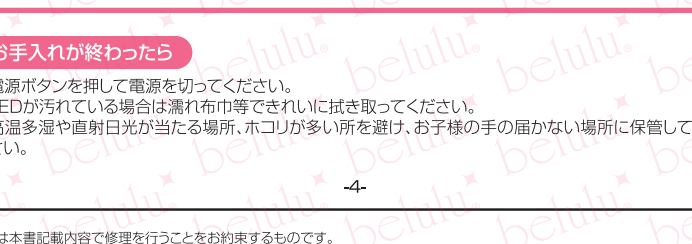

お手入れが終わったら

- 電源ボタンを押して電源を切ってください。
- LEDが汚れている場合は濡れ布巾等できれいに拭き取ってください。
- 高温多湿や直射日光が当たる場所、ホコリが多い所を避け、お客様の手の届かない場所に保管してください。

-4-

本書は本書記載内容で修理を行うことを約束するものではありません。
お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

【修理規定】
1.取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2.保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3.次のような場合には、保証期間内でも有料となります。
a.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b.お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
c.火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d.本書の提示がない場合。
e.本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4.本書は、日本国内においてのみ有効です。

【保証書】 ※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外になります。
■品番: ■品名:belulu hikari mini
■修理保証期間:到着日から6ヶ月間
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____
販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日: 年 月 日 印

【修理費用について】
●商品到着後1ヶ月以内(初期不良)の場合
...無償修理・交換させていただきます。
その際の送料は弊社が負担致します。
●商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以内の場合
...修理代無料で行わせて頂きます。
その際の送料は弊社が負担致します。
●商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以上の場合
...修理代・往復送料をお客様負担にて対応させていただきます。
尚、商品の返品は、到着後7日以内のものに限ります。

●記入のない場合は、有効とはなりませんので必ず記入の有無をご確認ください。万一記入のない場合は、直ちに当社までお問い合わせください。
●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

保証期間中の修理などアフターサービスについて
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
TEL:045-227-5121 E-mail:shop@kireido.com
〒221-0801
神奈川県横浜市神奈川区南大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

-5-