


belulu® ClearVeil

美ルル クリアベール

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので
大切に保管してください。

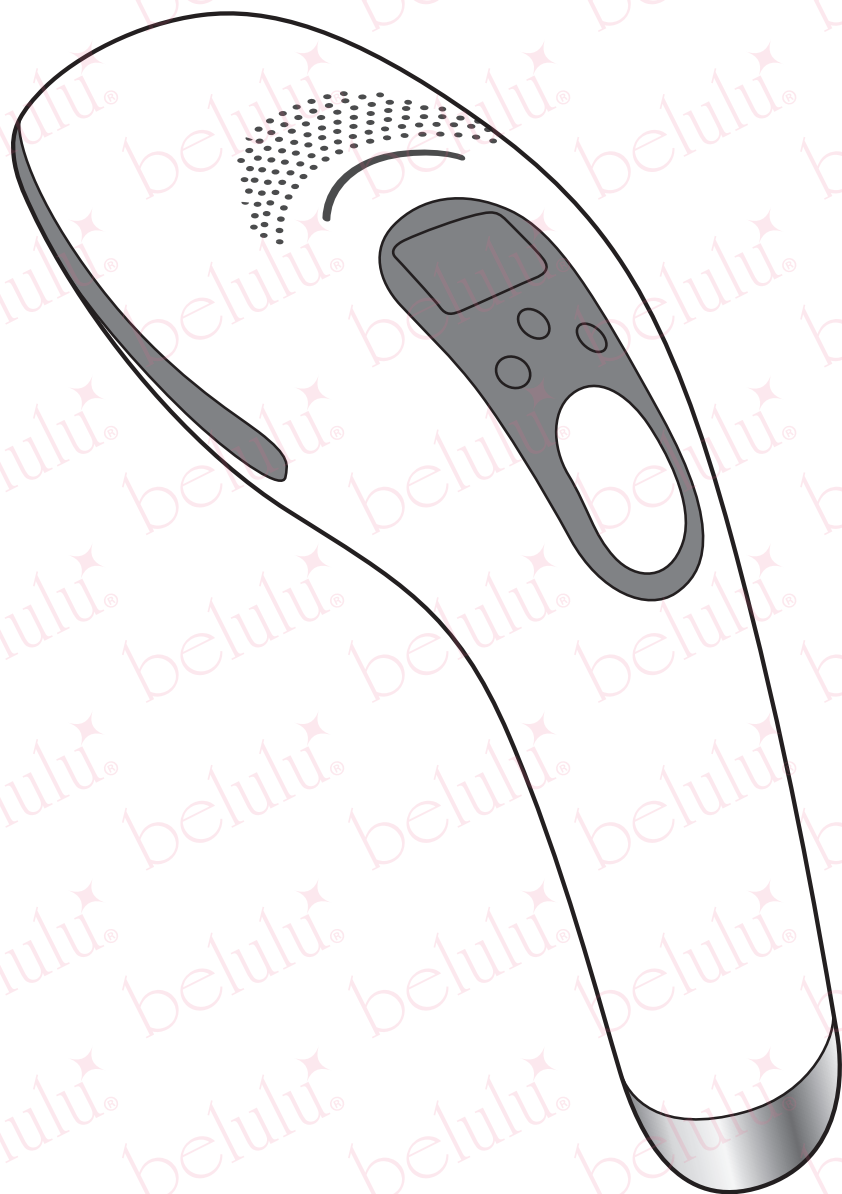

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、
保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu ClearVeil

■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

1 安全上のご注意 -正しくお使いいただくために-

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の方への危害や財産等への損害を未然に防止するものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずよく読み、指示に従ってください。取扱説明書は、本製品を安全に正しくお使いいただくために必要です。本製品を人に貸す、または差し上げる場合は、必ず本書と一緒にお渡しください。

【表示と意味】

表示	意味
	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

【絵表示の意味】

	「危険・警告・注意」を表します。具体的な注意内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。
	「禁止事項」を表します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。
	「行為の強制・指示」(必ず行うこと)を表しています。具体的な指示内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。

ご使用前に

	
	●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、本製品を使用しないでください。 ○ペースメーカー等の体内植込式医療用電子機器 ○人工肺等の生命維持用医療電子機器 ○心電図等の装着型医療電子機器 ○その他、体内の装着している医療用電子機器 ※医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。
	
	●下記に当てはまる方は、本製品のご使用をお避けください。 ○急性疾患がある方 ○有熱性疾患がある方 ○結核性疾患の方 ○血友病疾患の方 ○血圧異常の方 ○悪性腫瘍がある方 ○伝染病疾患の方 ○心臓疾患の方 ○狭心症の方 ○3ヵ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方 ○多発性硬化症の方 ○紫斑病など内出血しやすい方 ○皮膚ガン病歴がある方 ○てんかんをお持ちの方 ○糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方 ○妊娠中・妊娠直後の方 ○授乳中の方 ○顔面神経痛をお持ちの方 ○ケロイド体質の方 ○アトピー性皮膚炎の方 ○過度の日焼けをしている方 ○ニキビが化膿し炎症を起こしている方 ○アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ○化粧品や化学繊維等でかぶれた経験がある方 ○ステロイド系ホルモン剤の長期服用や肝機能障害で毛細血管の拡張を起こしている方 ○事故等により頭部や眼科的後遺症がある方 ○海水浴や大衆浴場へ行く前の方 ○本品を使用する前後6週間以内に他の脱毛を行う、または行った方 ○本品を使用する前後1週間以内に美白化粧品やビタミンAが含まれた化粧品等を使用する、またはされた方 ○乳幼児 ○自分の意思で動いたり、意思表示ができない方 ○その他、医師の治療を受けている時や療養中、身体に異常がある場合 ※事故や肌、身体に異常が起きるおそれがあります。

ご使用場所・電源

	
	●本製品は防水仕様ではありません。浴室など水がかかりやすい場所での使用や充電はしないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。 ●台所やストーブなど火気、高温の近くや車内、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでください。事故や感電、故障のおそれがあります。 ●コードやプラグにホコリやゴミが付着したまま使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。
	
	●使用電圧、ケーブルなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。守らないと火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。 ●使用中以外や保管する際は、コードを本体及びコンセントから抜いてください。プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグ本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張りますと、断線やショート、感電のおそれがあります。

準備及びご使用時

	
	●必ず本製品の使用目的(体及び体の脱毛・ケア)に沿ってご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。 ●説明書で定められた手順で操作してください。事故や体調不良、故障を起こすおそれがあります。 ●使用時間或使用頻度は本書の指示に従ってください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
	●防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所では使用しないでください。 ●本製品は家庭用機器です。業務目的でのご使用はしないでください。事故や体調不良起こすおそれがあります。 ●本体やコードの破損、故障、変形、断線など不具合がある場合や異常に発熱する場合、コンセントやプラグへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。 ●濡れた手で本体やコード、プラグを触ったり、コンセントを抜き差ししないでください。感電やショート、事故のおそれがあります。
	
	●本製品を使用し、痛みや不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ等皮膚症状が現れた場合やその他皮膚に異常を感じた時は直ちにご使用を中止し、当社にご連絡いただくか専門医にご相談ください。守らないと肌トラブルや体調不良を起こすおそれがあります。 ●本製品のご使用中に異臭や異常発熱した時は直ちに使用を中止し、点検のため当社にご連絡ください。守らないと事故や故障、ケガのおそれがあります。
	
	●ご使用時は、以下の事項をお守りください。 ○初めて使用される方や肌が敏感な方は、目立たない部分で使用時間を短くしたり、出力レベルを低く設定するなど様子を見ながら使用してください。守らないと肌トラブルや事故のおそれがあります。 ○身に着けている貴金属類にフラッシュが当たりますと危険です。ご使用時は、貴金属類は外してください。 ○脱毛箇所への過度のご使用はお避けください。※守らないと腫れたり、赤みがでる場合があります。 ●本製品に通電させたまま長時間放置しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。 ●使用前に操作ボタンをすべて操作し、本体が正常に作動するか確認を行ってください。万一、損傷、異常等がある場合は使用せず、弊社へご連絡ください。守らないと、事故や体調不良を起こすおそれがあります。


お手入れ・保管

⚠ 警告	
！ 必ず守る	●乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所に保管してください。守らないと事故やケガ、故障のおそれがあります。 ●本体のお手入れをする際は必ず電源を切り、充電中や稼働中は行わないでください。守らないと感電などの事故のおそれがあります。
⊘ 禁止	●本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不具合につきましては、必ず当社へご連絡ください。
⚠ 注意	
！ 必ず守る	●充電や保管は高温多湿、振動、直射日光の当たる場所を避け、涼しくて安全な場所で行ってください。守らないと事故や故障の他、製品の劣化を早めます。 ●本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の条例に従い処分してください。地球環境のため、放置はしないでください。
⊘ 禁止	●本体や付属品を洗浄する際は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯を使用しないでください。変色、変質や傷がつくおそれがあります。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸してよく絞り、やさしく汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕上げてください。 ●本体や付属品を熱器具に近付けたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発火、故障等の原因になります。 ●本体や付属品を高い所から落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。また、上記が原因で本体や付属品が損傷した場合は使用しないでください。ケガや故障のおそれがあります。 ●本製品や付属品を水につけたり、水洗いしないでください。感電やショート、事故、故障のおそれがあります。

⚠ 別紙の【表A 使用可能な肌色表】をご参照ください ⚠

2 セット内容・名称


※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

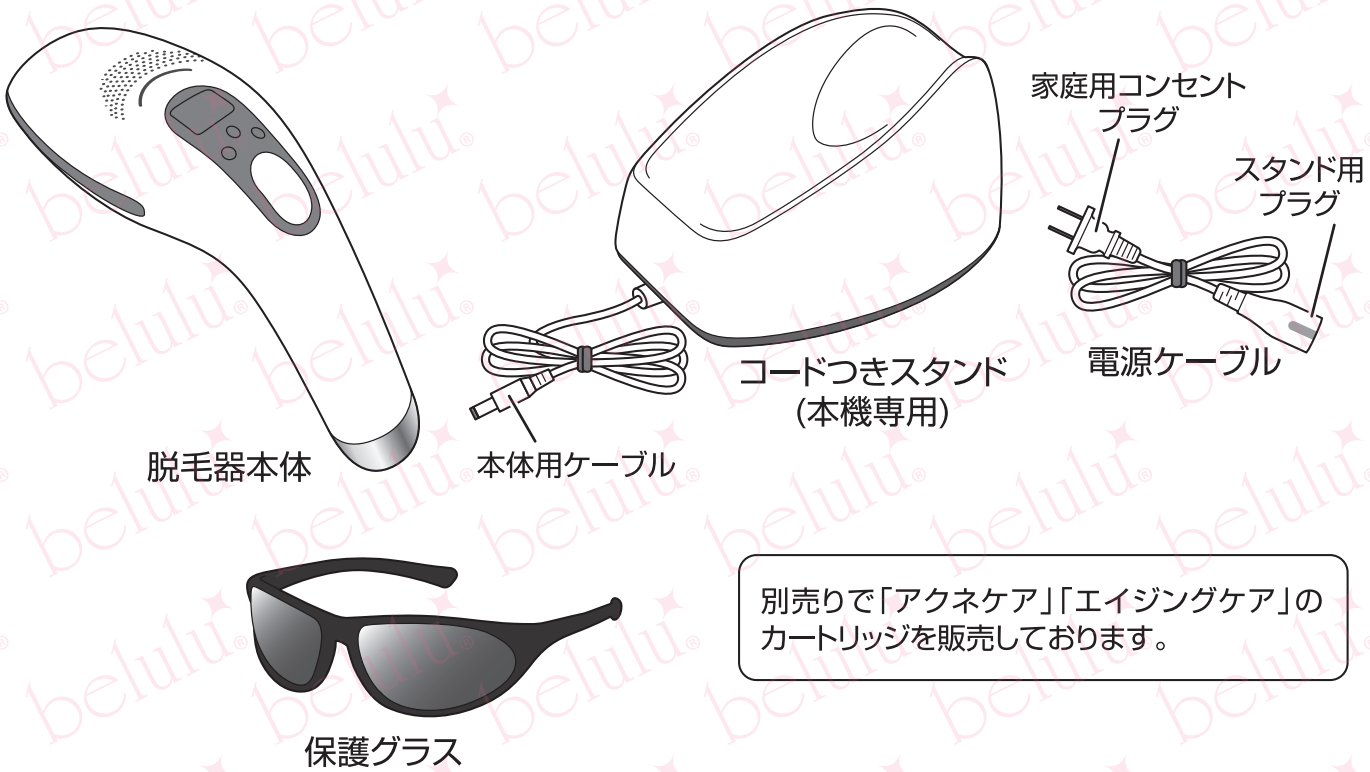

- 【本体仕様】
- 入力電力:36W
 - 定格電圧:100V~240V
 - 定格入力:50Hz/60Hz
1.5A
 - 定格出力:24V=== 4A


3 通電方法

- 本体用ケーブルを脱毛器本体に差し込みます。 電源ケーブルのスタンド用プラグをスタンド背面の差し込み口に、家庭用コンセントプラグを家庭用コンセントへ差し込みます。(順不同)
 - 正しく通電されると、スタンドと液晶パネルのお知らせランプが青色にゆっくり点灯します。
- ※通電だけしている状態です。電源は入っていません。

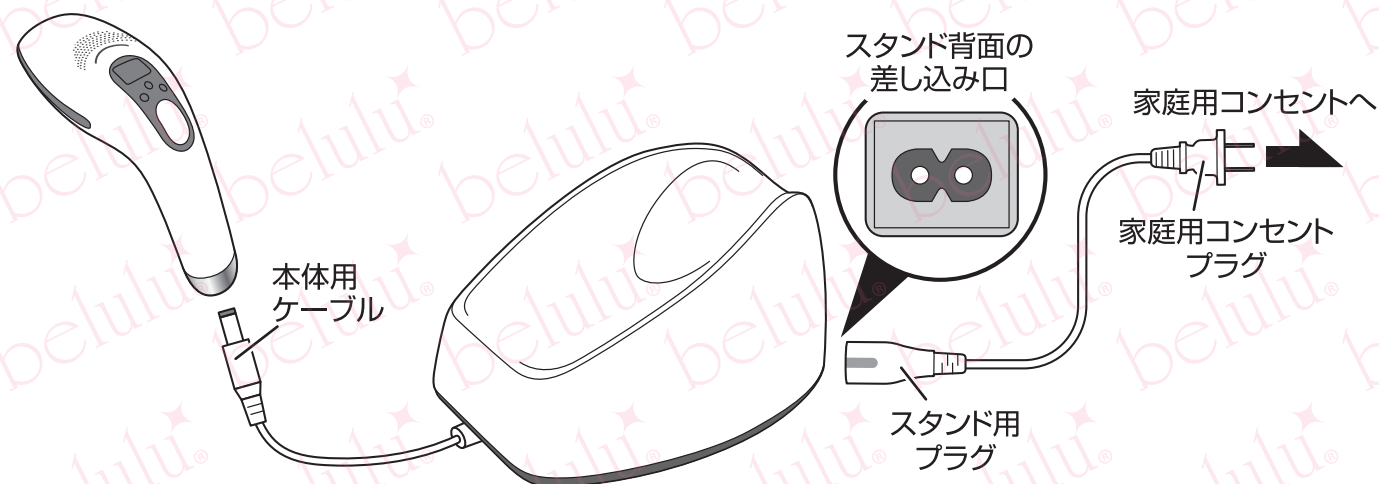

照射回数について

- 本品は、「照射した回数」を表示する仕様です。
- 1日1000発までを限度とし、最大約73万発の照射が可能です。

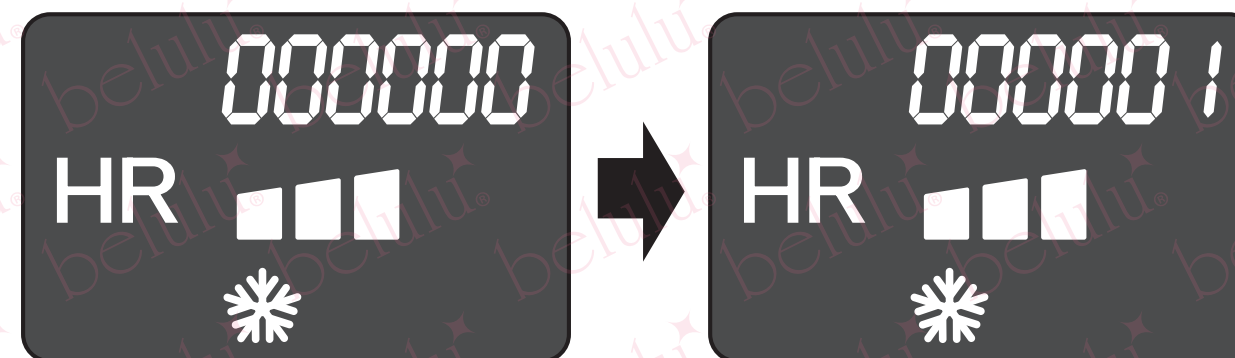


1回照射することにより、数字が増えます。

回数表示について

- 電源を切った後、プラグを抜かずに再度電源をONにした場合
…前回までの照射回数が引き継がれます。
- 電源を切った後、一度プラグを抜いてから再度接続し電源をONにした場合
…照射回数がリセットされ0からのスタートとなります。

4 製品仕様

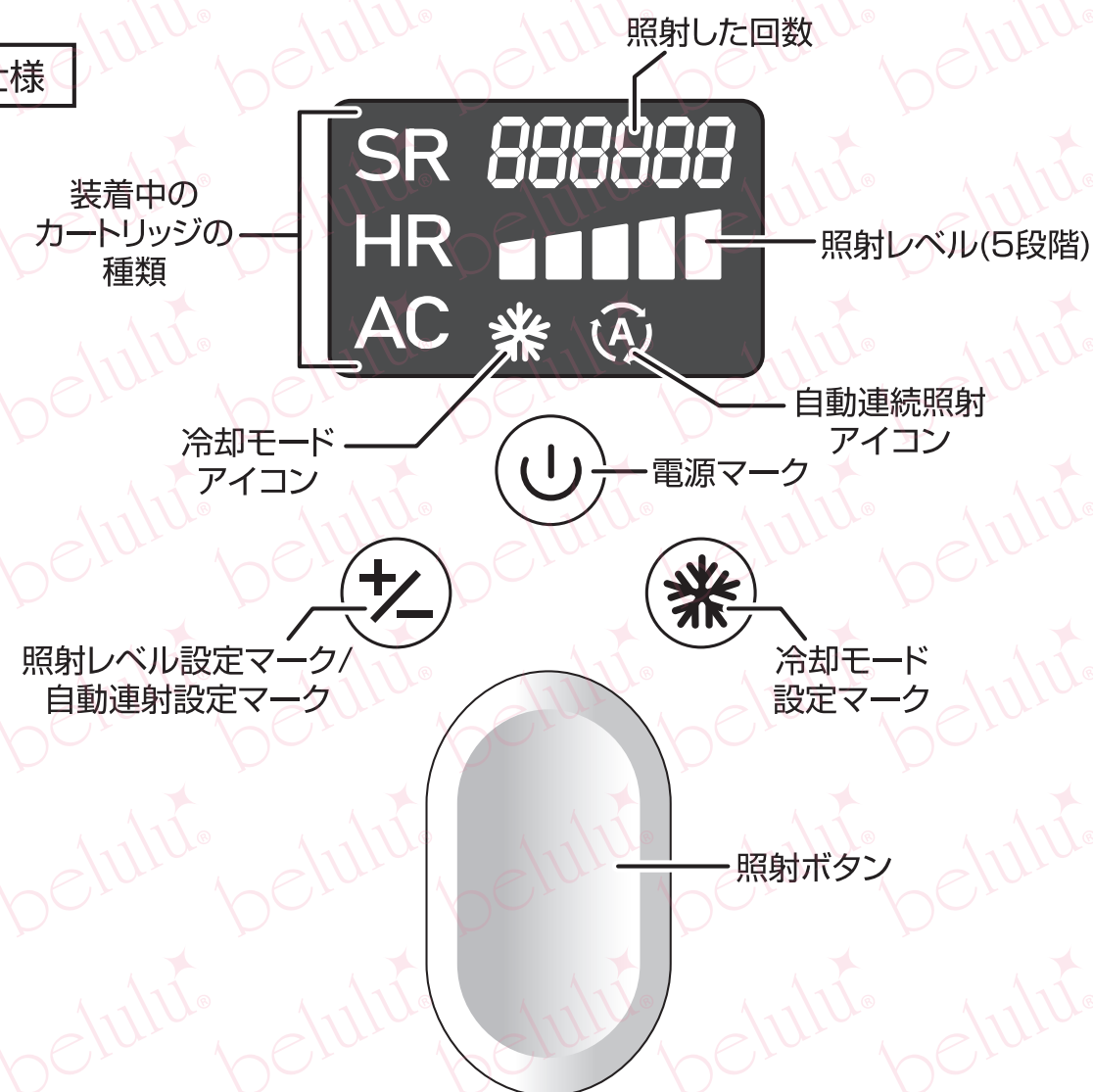


5 操作方法



脱毛モード(手動照射)



- 電源マークを3秒以上長押しすると電源がONになります。
- ファンと冷却モードが稼働し、お知らせランプが白色に点灯します。
- 現在の使用ショット数と照射レベル(レベル1)が表示されます。
(到着後初めて使用する場合や前回使用時にプラグを抜いていた場合は0表示)

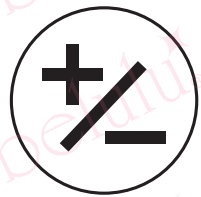

- 照射レベル設定マークで照射レベルを設定します。
- 照射レベル設定マークを1回押すごとに、照射レベルが下図のように切り替わります。

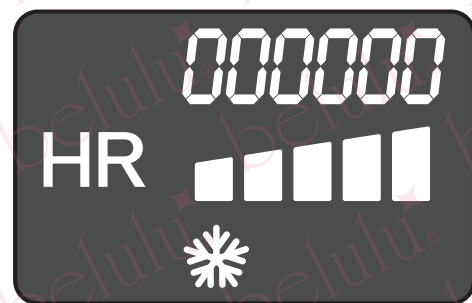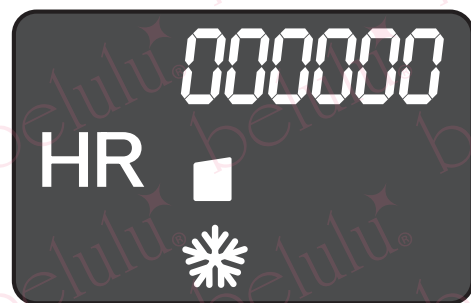


照射レベル1の状態では照射レベル設定マークを押すごとに、照射レベルが5まで順番に上がります。




照射レベル5の状態では照射レベル設定マークを押すごとに、照射レベルが1まで順番に下がります。

脱毛モード(自動連続照射)

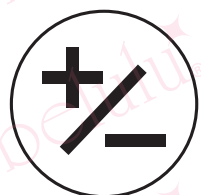

- 電源をONにした後、または照射レベルを設定した後、自動連続照射設定マークを3秒以上長押しすると、自動連続照射モードに切り替わります。
- 手動照射に戻す場合は、再度同マークを3秒以上長押ししてください。

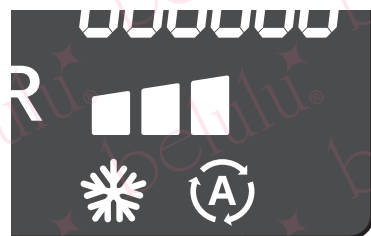

自動連続照射モード設定中に照射口が肌に触れているとフラッシュが照射されますのでご注意ください。

冷却モード

冷却プレートを急速に冷やして心地良いひんやり感を肌に与えます。
フラッシュ照射と併用することで、照射時の熱感をやわらげながら脱毛を行うことができます。
照射後のクールダウン時に保冷剤代わりとしても使えます。

冷却温度…約8℃

冷却温度は、周囲の温度により多少変動します。
また、体温が金属プレートに伝わることで、冷たさを感じにくくなる場合があります。



- 電源をONにした後、または照射レベルを設定した後、冷却モード設定マークを押すと、冷却モードが稼働します。液晶パネルに冷却モードマークが表示されます。
- 冷却モードを取り消す場合は、再度冷却モード設定マークを押してください。
- ※自動連続照射設置後は冷却モードの設定ができなくなります。



6 脱毛を行う


脱毛を行う前の準備

- 照射箇所を清潔にし、よく乾かしておいてください。
- 脱毛を行う際の毛の長さは、2～3mmを推奨しております。
毛が長い場合はシェーバー等で長さを整え、短い場合は2～3mm程度まで伸ばしてください。
- ※ワックスや毛抜き、電気針、脱毛剤等は使用しないでください。
- ジェルや化粧水等は必要ありません。
- ほくろが多い場合やシミがある場合は、絆創膏等でカバーしてください。色素が濃い部分に熱が集中し、痛みややけどを起こすおそれがあります。

**本機は非常に強い光が連続的に発光します。
目を守る為、保護グラスを装着するか目を閉じてご使用ください。**


手動で照射する場合

本製品は安全装置により、機器が肌を検知していない状態ではフラッシュを照射できません。

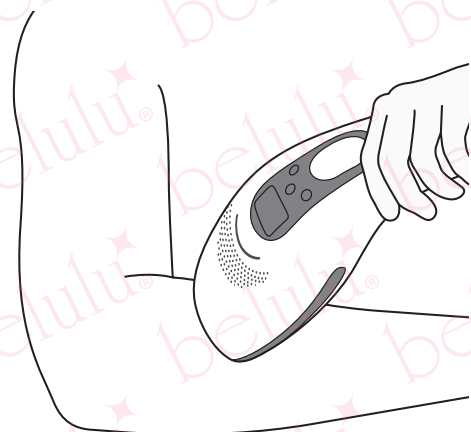

①

- 照射口を肌にしっかり当てます。
- 肌が正しく検知されると、液晶パネルの上のお知らせランプが青色に変わります。
- この状態になるとフラッシュを照射することができます。

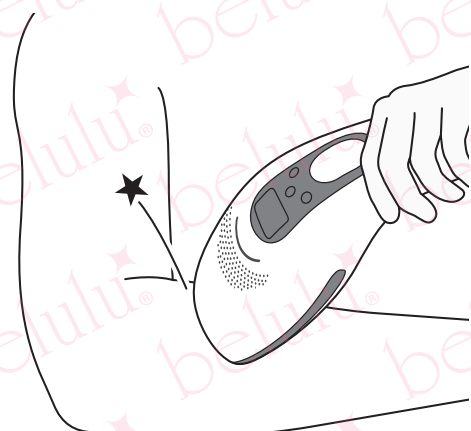


②

- 照射口を肌に密着させたまま照射ボタンを押すと、フラッシュが照射されます。
- フラッシュ照射後、お知らせランプが点滅している間は照射等の操作ができなくなります。
- 点滅が停止したら次の照射を行なってください。
- 照射後は照射口が非常に熱くなっています。触れないようご注意ください。

- 始めて使用する方や肌が弱い方は冷却モードを併用し照射レベル1から始めることを推奨しております。
- 照射後熱感が続く場合は冷却モードや保冷剤等で肌を冷やしてください。




自動連射の場合

**連続照射機能搭載のため、センサー感度が非常に高く設定されています。
肌に軽く当てただけで照射されますので、保護グラスを着用の上、照射口を直視しないでください。**

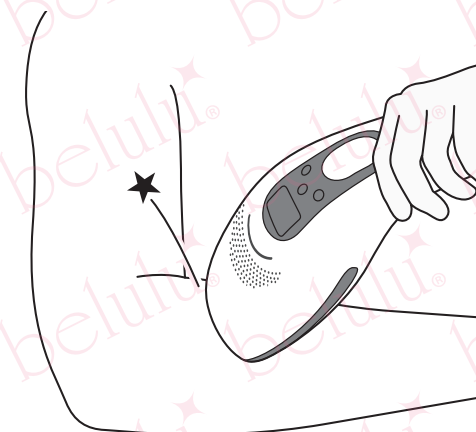

- 照射口を肌に対して垂直に当てます。
- すぐにフラッシュが照射され、脱毛が行われます。
- 照射口を肌から離すまで自動的に連続照射されます。照射口を少しずつずらしながら脱毛を行なってください。
- 複数回照射後、カートリッジ内の温度が上がり照射の間隔が長くなったり一時的に操作ができなくなる場合がありますが、故障ではありません。この場合は少し時間をおいてから照射を再開してください。
- 照射後熱感が続く場合は冷却モードや保冷剤等で肌を冷やしてください。
- 照射後は照射口が非常に熱くなっています。触れないようご注意ください。

照射口は肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。照射口の一部が肌に当たっていないか、斜めになっていると、照射されません。

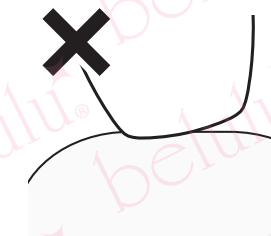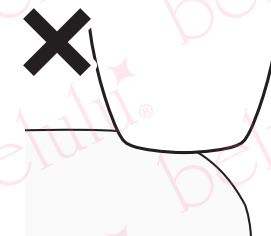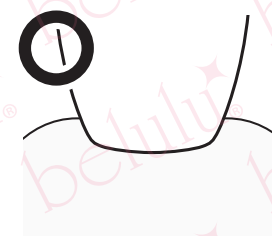


■別紙に詳しい照射回数や照射周期が記載されておりますので、ご参照ください。■

- 脱毛後の肌は、非常にデリケートな状態になっています。冷却モードや保冷剤等で冷却し、化粧水やクリーム等で保湿を行ってください。
- 脱毛後に外出する場合は、必ずSPF30++以上の日焼け止めを塗ってください。

7 カートリッジの付け替え

希望のお手入れに合わせて、カートリッジを付け替えることができます。

必ず電源を切り、電源コードを抜いた状態で行ってください。

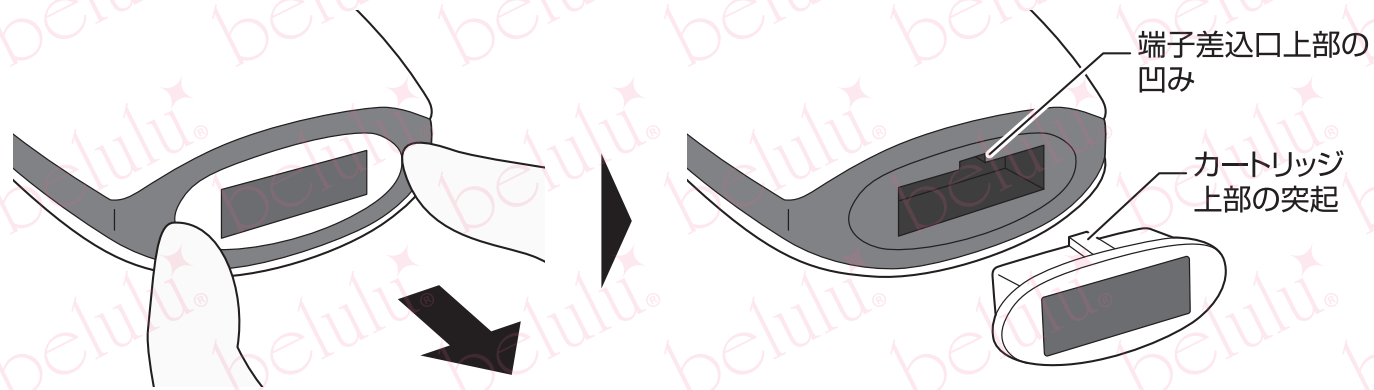

カートリッジの左右の縁に爪等を差し込むとカートリッジが外れます。

新しいカートリッジを用意し、向きを確認して本体に装着します。
隙間が無いようしっかりはめ込んでください。

カートリッジの種類は、カートリッジ側面に刻印されているアルファベットとレンズ色で見分けることができます。
レンズ色は、カートリッジの照射レンズを壁など白い背景に透かすことで確認できます。



【HR】脱毛用
レンズ色:黄色

フラッシュ光で毛根に熱ダメージを与えて効果的に脱毛。



【AC】アクネケア用
レンズ色:透明

ニキビの炎症を抑える他、ニキビができていく肌に整えます。



【SR】エイジングケア用
レンズ色:オレンジ

肌を活性化し、気になる年齢肌に直接アプローチします。

※製造時期により、判別方法やレンズ色が変わる場合がございます。

8 ニキビケア・エイジングケア

※脱毛とは一日以上間隔を空けてください。
※使用頻度は週3回程度にとどめてください。

■カートリッジ付け替え後は、装着中のカートリッジの種類をご確認ください。■



本機は非常に強い光が連続的に発光します。
目を守る為、保護グラスを装着するか目を閉じてご使用ください。

手動で照射する場合

本製品は安全装置により、機器が肌を検知していない状態ではフラッシュを照射できません。



- 照射口を肌に密着させ、操作ボタンを押すとフラッシュが照射されます。
- フラッシュ照射後、中央のお知らせランプが点滅している間は照射等の操作ができなくなります。
- 点滅が停止したら次の照射を行なってください。
- 照射後は照射口が非常に熱くなっています。触れないようご注意ください。
- 始めて使用する方や肌が弱い方は冷却モードを併用し照射レベル1から始めることを推奨しております。
- 照射後熱感が続く場合は冷却モードや保冷剤等で肌を冷やしてください。

自動連射の場合

- 照射口を肌に対して垂直に当てます。
- すぐにフラッシュが照射されます。
- 照射口を肌から離すまで自動的に連続照射されます。照射口を少しずつずらしながら脱毛を行なってください。
- 複数回照射後、カートリッジ内の温度が上がり照射の間隔が長くなったり一時的に操作ができなくなる場合がありますが、故障ではありません。
この場合は少し時間をおいてから照射を再開してください。
- 照射後熱感が続く場合は冷却モードや保冷剤等で肌を冷やしてください。
- 照射後は照射口が非常に熱くなっています。触れないようご注意ください。

- ご使用後の肌は、非常にデリケートな状態になっています。ビタミンCが含まれたパック等で冷却し、化粧水やクリームで保湿を行ってください。
- ケア後に外出する場合は、必ずSPF30++以上の日焼け止めを塗ってください。

9 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

通電しない 電源が入らない	●電源コードは正しく接続されていますか？ コードのつなぎ方が間違っていたり接続が不十分ですと、通電できませんので電源が入りません。 【通電方法】を参照し、正しく接続してください。 また、差し込み部分に緩みがないか確認してください。 ●操作ボタンを長押ししていますか？ 操作ボタンを軽く押しただけでは電源は入りません。 3秒以上長押ししてください。 【解決しない場合は】 ケーブルの断線、もしくは本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
フラッシュが照射 されない	●肌の色が別紙の【表A】の「濃褐色」「黒褐色」に該当していませんか？ 【表A】で肌の色が濃褐色や黒褐色に該当する場合はやけど防止の観点から使用できません。 ●カートリッジは装着されていますか？ カートリッジが装着されていなかったり、カートリッジの差し込みが不十分ですと安全装置が稼働し、フラッシュが照射されません。 カートリッジを隙間がなくなるまでしっかり装着してください。 ●フラッシュ照射口が肌にしっかり当たっていますか？ 照射口の一部が肌に当たっていないかったり、斜めになっていると、安全装置が稼働しフラッシュ照射ができません。 肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。 ●カートリッジの照射面が汚れていませんか？ カートリッジの照射面が汚れていると肌検出の妨げとなり、フラッシュが照射されない場合があります。 硬く絞った濡れ布巾などで照射面をよく拭いてください。 ●カートリッジ劣化の可能性 本品のカートリッジは最大約73万発の照射が可能ですが、使用頻度によっては早く劣化が始まる場合があります。 新しいカートリッジと交換してください。 【動作確認しても作動していない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
使用を続けていると照射できなくなったりボタン操作がしにくくなる	●少し時間をおいてゆっくり操作してください。 照射を続けていると熱が蓄積されることにより一時的に安全装置が作動し照射が行えなくなることがあります。(故障ではありません) 少し時間をおいてから再開してください。 【動作確認しても作動していない場合は】 本体の故障が考えられますので、当店へご連絡ください。

よくあるお問い合わせ

Q. フラッシュ照射時にジェル等が必要ないのはなぜですか？

A. フラッシュ光は肌に悪影響がなく、高い肌ケア効果がありますので、ジェル等は必要ありません。
ただし、肌を守るために脱毛後のアフターケア(クールダウンや保湿)はしっかりと行ってください。

Q. 妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか？

A. 妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモンバランスが不安定でお肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては稀に肌トラブルが起こる場合がございます。
必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおすすめしております。
(脱毛器の機能が母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。)

Q. 子供にも使えますか？

A. 中学生以下のお子様を使用する場合は、以下をご了承の上、目立たない場所でパッチテストを行い、一番弱いレベル設定で保護者の監視の下でお使いいただきますようお願い致します。

- 二次成長期は毛も著しく成長しているため、処理を行ってもすぐに毛が再生します。
- フラッシュ式脱毛は毛の黒い色素に反応し処理をする仕組みですが、色素が薄く細いお子様の毛にはあまり効果が無い可能性がございます。
- 二次成長中はホルモンバランスが不安定な為、肌荒れなどを起こす場合がございます。
- お子様は大人と比べて肌が薄く弱いため、肌トラブルを起こす場合がございます。

ホルモンバランスや毛の成長が安定する高校生以上からのご使用を推奨しております。

Q. 使っても効果がまったく感じられないのですが…

A. フラッシュ式脱毛は毛根にダメージを与えて徐々に毛を生えにくくするもので、照射後すぐに毛が抜けるものではありません。
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行ってください。
※効果の現れ方には毛質等により個人差があります。
また、本機はあくまでご家庭でお使いいただくことを前提に作られており、安全のためエステと比べると低い出力設定になっています。

Q. 毎日照射してはダメですか？

A. フラッシュ脱毛は生えている毛には効果がありますが、成長途中や休止期の毛には効果がないため、毎日照射しても意味はありません。
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行ってください。