



belulu® premium GOLD

美・ル・ル プレミアム ゴールド 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。



- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 火、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 電源アダプターのコードを引っ張ったり、コード部分に電源を触らないでください。
- スプレー等高温になる場所や本品や電源アダプターを使用したままのご使用はしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やかれや感電、故障のおそれがあります。
- 火、炎周りに異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
- 下部のリストをよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これら起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。



- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、すぐに3Dヘッドを肌から離してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 約4〜8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
- 充電中以外は充電ケーブルを本体から外してください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ペンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

（下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください）

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器） ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常患者の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けが肌荒れを引き起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方） ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方

（下記の部位には使用しないでください）

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髪、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

美・ル・ル プレミアム ゴールド 機能紹介

3Dヘッドに24金メッキ加工を施しました。金にはアンチエイジングの他、
血行促進による部分痩せ効果等、様々な美肌効果が詰まっています。

光エステ(Photon)

3色のLEDがお肌を活性化させ、美肌に導きます。
各LEDの効能は、下記の「LEDライトのカラーと効果」をご参照ください。

エレクトロポレーション

特殊な電気を与えることにより肌細胞に美容成分の通り道となる微細な孔を開け、通常では浸透しない高分子の美容成分をそのまま肌の深い部分まで届けます。
ヒアルロン酸やコラーゲンなど、高分子の美容成分が含まれた美容液を使用することで、より効果が発揮されます。

メソセラピー

エレクトロポレーションの微弱電流との組み合わせにより、脂肪溶解効果のあるスリミングジェルの浸透、効果を高めます。
通常の美容ジェルをお使いいただく場合は脂肪溶解はされません。

電源をONにした時点で自動的に同時に稼働します。単体使用はできません。

EMS

筋肉に刺激を与えて強制的に筋肉運動をさせることで、表情筋が鍛えられ、すっきりとした小顔効果が期待できます。
また、新陳代謝を活性化してコラーゲンの生成を助けます。

RF温熱(ラジオ波)

高い周波数でお肌を温めます。1MHzのラジオ波による温熱効果でお肌を内側から広い範囲にわたってじんわり温め、血行を促進し肌細胞の活性化や老廃物の排除を促します。

同時に稼働します。単体使用はできません。

マッサージ(Nurse)

適度な振動でマッサージし、美容液やジェルを素早く皮膚の奥深くに浸透させます。
また、血行を良くして肌細胞を活性化させます。

LEDライトのカラーと効果

LEDライトは色ごとに波長が異なり肌の奥に届く深さも違うため、色によって肌に様々な効果をもたらします。
お肌の悩みに合わせてカラーを選べます。



赤LED:
630nm波長。コラーゲンを増やしシワ・クマ・たるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効果が期待できます。



緑LED:
525nm波長。新陳代謝を促進し、お肌のターンオーバーを正常にします。シワやニキビ痕、傷跡などの色素沈着を改善します。



青LED:
415nm波長。ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。できってしまったニキビを沈静化し、さらにニキビができていない肌を整えます。



ミックス:
赤・緑・青の同時照射。お肌の環境を正常に整え、トラブル知らずのお肌に。

■選べる組み合わせ■

EMS RF温熱 + マッサージ(Nurse)

超音波(SONIC)の強さレベルをL(弱)、M(中)、H(強)の三段階から選択できます。

EMS RF温熱 + 光エステ(PHOTON)

超音波(SONIC)の強さレベルをL(弱)、M(中)、H(強)の三段階から選択できます。
光エステのLEDカラーを3色から選択できます。

エレクトロポレーションとメソセラピーは、RF/EMSボタンを押すと同時に稼働します。
エレクトロポレーションとメソセラピーを個別に使用することはできません。


セット内容と製品仕様

※製品仕様と外観は予告無く変更になる場合があります。



【本体仕様】
ヘッド部分材質:24金メッキ加工・チタン
ヘッド時間:4〜8時間 入力5V/0.5A 使用電池:リチウムイオンバッテリー
高さ:180×幅:45(ヘッド部分)×厚さ:35mm(ボデー部分) 重さ:100g
【USB式アダプター仕様】
入力:100〜240V 50/60Hz 0.2A 出力:5V/1A

3Dヘッドは、型番により形状が変わる場合がございます。

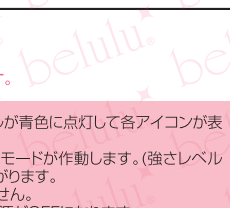

- ご購入後初めて使用する場合は、長期間使用しなかった場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。
- 充電ケーブルの充電シヤックを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプターのUSBポートに接続します。
- 充電お知らせランプが赤色に点灯します。
- 充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常はありません。
- 充電時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると充電お知らせランプが緑色に点灯しますので、ケーブルを外してください。
- 充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。

- 充電に適した室温は、15〜30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行ってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行ってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

- 安全にお使いいただくため、必ずパッチテストを行ってください。
- 美容液を顔の内側など皮膚の薄い部分に塗り、次ページに記載されている本製品の機能すべてを試してください。
- 異常がないことを確認してから顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本製品を使用せず、当社または医師にご相談ください。


-3-

ボタン操作

ON/OFFボタン 電源のON/OFFとEMS/RF温熱モードの設定を行います。



- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各アイコンが表示されます。
- この状態でON/OFFボタンを押すと、EMS/RF温熱モードが動作します。(強さレベル「弱」) ON/OFFボタンを押すごとに強さレベルが上がり、強さレベル「中」→「強」の順に切り替わります。
- ※LEDライトを長時間直視しないようご注意ください。
- ミックスLEDが点灯している状態でPHOTONボタンを押すと、LEDライトとすべてのアイコン表示が消え、液晶パネルのみ点灯している状態になります。
- LEDライトの変更やモードを変更したい場合は、再度PHOTONボタンを押して設定してください。

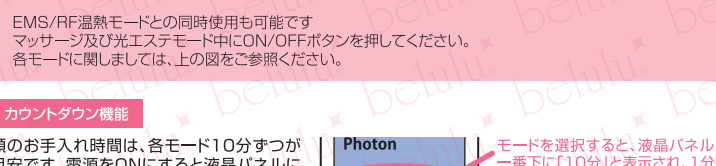


光エステ・マッサージ(Nurse)モードとの同時使用も可能です。
EMS/RF温熱モード中にPHOTONボタンを押してください。
各モードに関しましては下の図をご参照ください。

PHOTONボタン

LEDライトのカラーとマッサージモードの設定を行います。



- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各アイコンが表示されます。
- この状態でPHOTONボタンを押すごとにマッサージ(Nurse)→赤LED→緑LED→青LEDの順に切り替わります。
- ※LEDライトを長時間直視しないようご注意ください。
- ミックスLEDが点灯している状態でPHOTONボタンを押すと、LEDライトとすべてのアイコン表示が消え、液晶パネルのみ点灯している状態になります。
- LEDライトの変更やモードを変更したい場合は、再度PHOTONボタンを押して設定してください。

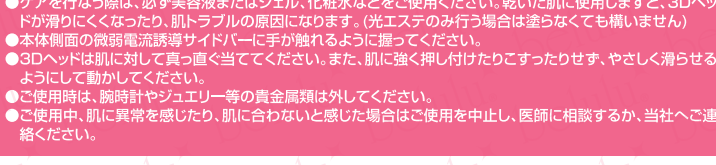

EMS/RF温熱モードとの同時使用も可能です。
マッサージ及び光エステモード中にON/OFFボタンを押してください。
各モードに関しましては、上の図をご参照ください。

カウントダウン機能

顔のお手入れ時間は、各モード10分ずつが目安です。電源をONにすると液晶パネルに時間が表示され、10分経過すると、自動的に電源が切れます。左ページの手順を参考に、フェイスケアを4分、パーツケアを6分の計10分行なってください。



モードを選択すると、液晶パネルの一番下に「10分」と表示され、1分毎にカウントダウンされます。カウントダウン中に各ボタンを押しますと、カウントダウンがリセットされます。

-4-

お手入れ方法

通常通り洗顔し、水気をしっかりと拭き取っておきましょう。

- 光エステ使用中は目を閉じ、LEDライトを直接見たり長時間直視しないでください。
- ケアを行う際は、必ず美容液またはジェル、化粧水などをご使用ください。乾いた肌を使用すると、3Dヘッドが滑りにくくなり、肌トラブルの原因となります。(光エステのみ行う場合は塗らなくても構いません)
- 本体側の微弱電流誘導サイドバーに手が触れるように握ってください。
- 3Dヘッドは肌に対して真直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすりすぎたりせず、やさしく滑らせるように動かしてください。
- ご使用中は、腕時計やジュエリー、鉄の真金風類は外してください。
- ご使用時、肌に異常を感じたり、肌への負担を感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

お手入れ方法の一例を紹介しています。ご自身のお悩みに合わせて、機能を組み合わせてください。

ほうれい線やフェイスラインのたるみ気になる EMS/RF温熱で強制顔筋トレ!

- ① 美容液・美容ジェル・化粧水などを顔に直接塗ります。
- ② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱モードに設定したら、3Dヘッドをやさしく肌に当て、右の図を参照しながらケアを行ってください。
- ③ ケア中に美容液・美容ジェル・化粧水などが定着しなくなった3Dヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度塗り足してください。

●ほうれい線周りやフェイスライン、目尻のシワが気になる部分を重点的に行うなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

●ケアが終わりましたら、顔に残った美容液等を顔にしっかりと馴染ませましょう。

洗顔後のつっぱりや、乾燥肌が気になる エレクトロポレーション+メソセラピー+マッサージ(Nurse)で徹底保湿

- ① 美容液・美容ジェル・化粧水などを顔に直接塗ります。
- ② ON/OFFボタンでエレクトロポレーション/メソセラピーを稼働させ、PHOTONボタンでマッサージ(Nurse)モードに設定したら、3Dヘッドをやさしく肌に当て、右の図を参照しながらケアを行ってください。
- ③ ケア中に美容液・美容ジェル・化粧水などが定着しなくなった3Dヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度塗り足してください。

こんな便利も!

フェイスパックの上から行うのもおすすめです。美容成分が肌の奥までしっかり浸透します。ケア終了後は、乳液やクリームで脂分の補給を忘れずに。

●乾燥が気になる部分を重点的に行うなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

●ケアが終わりましたら、顔に残った美容液等を顔にしっかりと馴染ませましょう。

肌のくすみ気になる EMS/RF温熱とマッサージで血行促進と緑LEDで色素沈着を改善

- ① 美容液・美容ジェル・化粧水などを顔に直接塗ります。
- ② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱モードに設定したら、3Dヘッドをやさしく肌に当て、右の図を参照しながらケアを行ってください。
- ③ ケア中に美容液・美容ジェル・化粧水などが定着しなくなった3Dヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度塗り足してください。



④ くすみや色素沈着が気になる部分にLEDライトを当てます。

光エステ使用中は目を閉じ、LEDライトを目に当てたり長時間直視しないようご注意ください。

【推奨使用頻度】 全機能: 週3日 光エステは、必要に応じて毎日行っても構いません。

よくあるお問い合わせ: 使用中、美顔器を持っている手にビリビリとした刺激や痛みを感じます。漏電ですか? 漏電ではありません。本品は持ち手の金属部に微電流を流し、肌の(リフトアップ)をあげて皮膚の深部まで美容成分を浸透させるもので、人によっては刺激を感じる場合があります。微電流は人体には無害ですが、気になる場合はお手洗いを下げておいてください。

お手入れが終わったら

- ON/OFFボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を切ります。
- 乳液やクリーム等でフタをして、脂分を補いましょう。
- 本体の3Dヘッドに付いた美容液等をきれいに拭き取り、消毒用アルコールを付けたやわらかい布やウェットティッシュなどで拭いて清潔にしてください。
- ※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。防水仕様ではありません。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリが多い場所を避けて保管してください。また、お子様の手が届かないようご注意ください。

美・ル・ル プレミアム ゴールド Q&A

Q EMS/RF温熱モードが動作していないようですか?
A EMS/RF温熱モードでは微弱電流を皮膚に流す施設なので、振動が発生するものではありません。3Dヘッドをお肌に対しては軽く触れただけの刺激やじんわりとした熱を感じるようになります。

Q 毎日時間をかけてお手入れしたほうが良いのですか?
A 本機に搭載されている機能は高い美容効果を発揮しますが、その頻繁に使用しすぎるとお肌に負担をかけてしまいます。お肌に負担をかけずにお手入れをしていただくために、週3回のご使用をお願いしております。同様の理由で、1日の使用時間もお手入れ手順に記載されている時間を遵守してください。

Q 使うのは美容液でなければいけませんか?
A 化粧水やジェルでも大丈夫です。浸透性を考慮し、水溶性のものをおすすめしております。また、美容成分を高分子のまま肌の奥まで浸透させるため、美容成分が高濃度で無添加のものを使用することで、より効果が発揮されます。美・ル・ル専用の美容ジェルも販売しておりますので、是非ご利用ください。

Q 3Dヘッド部分の材質は何ですか?
A 3Dヘッドの表面(皮膚に触れる部分)には、チタンと24金メッキ加工を施しています。傷や腐食・サビに強く、金による美肌効果が期待できます。

Q 表示時間が10minのままカウントダウンされないのですが…
A カウントダウン中に各ボタンを押しますと、モードが変更されてカウントダウンがリセットされ、再度10分からスタートします。お手入れ中はボタンを押さないようご注意ください。

Q 液晶パネルの表示が見づらくなったり、LEDの光が弱くなってきました。
A 充電残量が少なくなっています。付属の充電ケーブルを接続し、充電を行ってください。

【修理費用について】
●商品到着後1ヶ月以内(初期不良の場合)
…無償修理・交換させていただきます。
その際の送料は弊社が負担致します。

●商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以内の場合
…修理代無料で付させていただきます。
その際の送料は弊社が負担致します。

●商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以上の場合
…修理代・往復送料をお客様負担にて対応させていただきます。

尚、商品の返品は、到着後7日以内のものに限ります。

●記入のない場合は、有効とはなりませんので必ず記入の有無をご確認ください。
○の記入のない場合は、直ちに当社までお問い合わせください。

●この保証書は本書に明記した期間・条件のもとにおいて修理を約束するものです。
(本保証書の発行・この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。)

保証期間中の修理などアフターサービスについて
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
TEL:050-4560-1423 E-mail:support@kireido.com
〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区大倉2-29-25
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

-5-