



belulu® premium

使用说明书



中文
Chinese

衷心感谢您购买本公司产品。
使用前，请仔细阅读注意事项及使用说明，以确保您能安全、放心地使用本品。
另外，在本说明书的最后附带有保修证明，请您妥善保管。

1 安全注意事项 -安全正确地使用本品的必读指南-

使用前请仔细阅读本篇「安全正确地使用本品」，以确保正确地使用本品。
为了防止您在使用时因操作不当而造成伤害自身，及他人财产的意外事故，我们制作了本注意事项。在此我们列举了各种操作错误以及有可能造成的危险。请您仔细阅读，并按照指示使用本品。
本说明书是保证您使用安全、正确地使用本品的重要资料，若您将要使用本品借用人或赠予他人，请确保能将该说明书一同转交。

【字样及含义】

表示	意味
	若违反此处所记载的事项进行使用，将有可能发生死亡或重伤的意外。
	若违反此处所记载的事项进行使用，将有可能发生死亡或重伤的意外。
	若违反此处所记载的事项进行使用，将有可能对人身或财产造成伤害。 ※财产损失主要指对房屋、金钱或家畜、宠物等造成的损失。

【标记的含义】

	表示「危险·警告·注意」其中一项，具体内容可查此标记附近的文字或图片。
	表示「禁止事项」。具体内容可查此标记附近的文字或图片。
	表示「必须遵守的指示」（一定要遵守）。具体内容可查此标记附近的文字或图片。

使用前请阅读

	△危险 ●正在使用下列医疗电子器械的人士，请勿使用本品。 ○心跳起搏器等体内植入式医用电子器材 ○人工心肺机等维持生命电子装置 ○心电图等装着医用电子器材 ○其他需要装置在体内的医疗电子器材 ※若将本品，将可能造成医疗电子器械的勿操作，导致意外发生。
	△警告 ●符合下列情况的人士，请勿使用本品。 ○急性病患者 ○热性疾病患者 ○结核性疾病患者 ○血友病患者 ○血压异常人士 ○恶性肿瘤患者 ○传染病患者 ○心脏病患者 ○心绞痛患者 ○多发性硬化症患者 ○患有紫斑病等容易内出血的病者 ○有皮肤敏感病史的人士 ○由糖尿病及其他疾病引起的皮肤异常者 ○孕妇与刚结束生产的产妇 ○哺乳中产妇 ○患有癫痫的人士 ○患有面部神经痛的人士 ○瘦弱体质的人士 ○患有特应性皮肤炎的人士 ○近期进行过暴晒的人士 ○青春荷尔蒙失调症状的人士 ○过敏体质或皮肤敏感人士 ○对化妆品或化学纤维敏感的人士 ○美国酵素类长期服用者或因肝功能障碍导致毛细血管扩张的人士 ○因事故患有头部或眼部后遗症的人士 ○患有眼疾（白内障、青光眼、视网膜炎、眼底出血等）的人士 ○婴幼儿 ○无法自主控制自己行为的人士 ○生理期中的女士 ○患有其他疾病，正在接受医生治疗身体状况异常的人士 ※可能会因意外造成皮肤或身体的伤害

使用场所·电源

	△警告 ●本品采用非防水结构，为避免发生烫伤、触电等危险，请勿在浴室等湿气较重的场所使用。 ●请勿在厨房、暖炉周围高温、有火的地方或车内、太阳直射的地方使用或放置本品，否则有可能造成触电等事故或故障。 ●请勿在连接线或插头附近有灰尘或垃圾时使用，否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。
	△警告 ●请使用本品指定的电源适配器，并在规定的电压环境下使用，否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。 ●非充电时，请把充电连接线从机器上拔下来。拔下插头时请不要拉扯连接线，请用掌握住插头再从机器上拔下。若用力拉扯电线，有可能造成电线被拉断或短路、触电等事故。

使用前准备及使用注意

	△警告 ●请按照本品的使用目的（脸部护理）进行使用，否则有可能引起身体不适。 ●请按照说明书记载的使用方法进行使用，否则有可能造成身体不适或故障情况。 ●请按照本书所记载的使用时长与使用频率进行使用，否则有可能引起身体不适。
	△警告 ●本品属于家用电器。请勿用于商业用途。否则有可能引起事故或身体不适。 ○进行除毛、脱毛的连接线有破损、故障、变形、异常发热或插头松动等情况，请停止使用。否则有可能造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。 ●请勿用沾水的手部去触摸机器或连接线、插头，或试图拔下电源适配器。否则有可能造成触电、短路等的事故。
	△注意 ●使用时，请遵守以下规定。 ○皮肤较敏感的人士，为防止皮肤出现不适，在初次使用时，请在皮肤不显眼位置用最低档位短时间试用一次，并观察皮肤反应。确认无异常后方可使用。 ○若身上的金属制品接触到3D按摩头，将有可能出现危险情况。请在使用前取下身上的饰品等金属制品。 ○进行除毛、脱毛的皮肤部位，当日不可使用本品。 ※若长期使用，将有可能出现皮肤红肿现象。 ●本品在通电状态下，请勿长时间放置不用。否则有可能发生事故或危险。 ●在使用前请操作按钮逐一确认，确认机器可以正常工作后再进行使用。若发生损伤、异常等状况，请立即停止使用，并与本公司联系。请勿执意使用，否则有可能造成事故或身体不适。

	△警告 ●在使用本品后若感到疼痛或发生出疹子、皮肤发红、发痒或其他皮肤异常症状，请立即停止使用并联络本公司或专业医生。若出现异常，请立即停止使用并联络本公司进行维修检测。请勿执意使用，否则有可能造成事故或伤害或故障。
--	--

修理·保管

	△警告 ●请勿放置于儿童或无法自主表达意识的人士可能触及的场所，否则有可能发生人身伤害或导致机器故障。 ●在修理本机时必须先切断电源，千万不可在机器充电中或工作中进行修理，否则有触电的危险。
	△警告 ●严禁购买者自行对本机或其附属品进行分解、改造或修理，否则将会有起火或工作状态异常而造成事故伤害的可能，本公司也将不对其进行免费保修。若本机发生工作不正常等任何异常情况，请立即与本公司联络。

	△注意 ●充电时请勿放置于高温、潮湿、摇晃不定或阳光直射的场所。请放置于阴凉、安全的地方，否则容易造成机器故障或缩短使用寿命。 ●若要丢弃本品，请您按照所在地区的规定进行回收处理。为了地球环境的美好，请勿对机器置之不理。
	△警告 ●若要清洁本机或其附属品，请勿用稀释剂、精油、汽油等挥发油，或含药物、研磨剂的清洁剂和热水来擦拭，否则易引起变色或变形的损伤。如果机身污垢较严重，可用软布沾稀释后的中性清洁剂并拧干后，轻轻擦拭机身。将机身污垢被擦干净后，再用干软布擦干。 ●请勿将本机及其附属品放置于发热器具周围，或放入微波炉和高压容器内，否则易造成机器发热、起火、故障等的事故。 ●请勿让本机及其附属品承受高空坠落、敲打等强烈撞击。另外，若因上述原因造成了本机及其附属品的损伤，请立即停止使用，否则有可能造成事故或伤害。 ●请勿令本机及其附属品沾水或用水清洗，否则将有可能因触电、短路造成事故或故障。

2 配套内容与各部位名称


※附属配件及包装根据销售场合有可能无预售变更请悉知。



【产品规格】 充电时长：4~8小时 输入：5V/0.5A 使用电池：锂电池 高度：180×宽度45（按摩头部分）×厚度35mm（机身部分） 重量：100g 【USB式电源适配器规格】 输入：100~240V 50/60Hz 0.2A 输出：5V/1A
--

3 充电方法

- 购买后第一次使用时或长时间未使用，机器会出现反应较为迟钝的情况，请先充满电。
- 将充电线的充电接口插入机身的充电口处，USB插头插入电脑或AC适配器的USB端口。
- 充电期间，充电指示灯为红色亮灯状态。
- 充电过程中机身会有轻微发热，属于正常现象。
- 本机充电时间与机器使用后残留电量成正比，所以每次充电时间不一定一样。
- 充电完毕后，充电指示灯为绿色亮灯状态。
- 除充电情况外，请不要让本机长期处于连接USB电源的通电状态。
- 为了保护内置电池，即使长期不用，也要保持每月充电一次，防止过度放电。
- 如果正常使用的时间却依旧很短，有可能是电池寿命将尽。

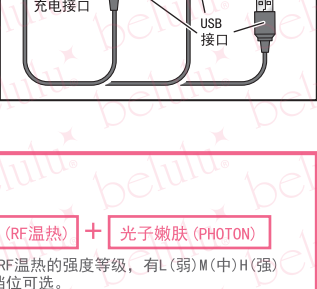

- 为保证安全使用，请先进行过敏测试
○将美容液涂抹在手背内侧皮肤较薄处，逐一试用本产品所有功能（如下页所示）。
- 确认无异常反应后方可进行脸部护理。万一出现异常反应，应立即停用，并咨询医生。

4 关于液晶屏的显示

※根据产品批次的不同，显示方式也有可能发生改变。

开机状态	EMS/RF模式 强度等级「弱」	EMS/RF模式 强度等级「中」	EMS/RF模式 强度等级「强」
按摩模式	光子嫩肤	EMS/RF模式 & 按摩模式	EMS/RF模式 & 光子嫩肤

5 操作方法

※根据产品批次的不同，显示方式也有可能发生改变。


- 可选择的模式组合
Belulu premium可实现多模式同步使用。
EMS（RF温热）+ 按摩模式（Nurse）
EMS（RF温热）+ 光子嫩肤（PHOTON）
EMS和RF温热的强度等级，有L（弱）M（中）H（强）三个档位可选。
光子嫩肤的LED彩光具有三色+三色混合彩光可选。

按下EMS/RF按键的同时，电穿孔和电波拉皮功能也在同时使用。
电穿孔和电波拉皮功能不可单独使用。

6 关于液晶屏的显示

	电穿孔·电波拉皮可同步进行。
	按下ON/OFF电源键、开启电源。液晶屏为蓝色光亮显示状态。
	再按一次ON/OFF电源键，即启动EMS/RF温热模式（强度级别为「弱」）


- 在打开电源液晶屏光亮之后，每按一次ON/OFF电源键，强度级别逐级上升。
- 由于EMS模式和RF模式分别存在一定的刺激性和低温热性，因此建议初学者或肌肤敏感人群在使用的时候，从强度级别「弱」开始使用。
- 在强度级别为「强」的状态下，当按下ON/OFF电源键后，电源关闭。
- 若需降低强度级别，仅需将电源关闭后再开启，便可实现。

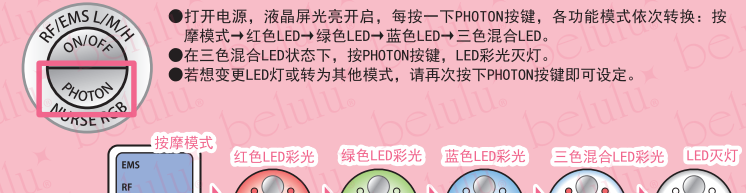

【按摩模式与光子嫩肤可同步进行】
在使用按摩模式/光子嫩肤时，按下PHOTON按键即可。
有关按摩模式和光子嫩肤的详细介绍，请翻至下一页阅读。

光子嫩肤 (PHOTON)

- 按一下ON/OFF按键，打开电源，液晶屏为蓝色光亮状态。
- 按一下PHOTON按键，按摩模式开启，再按一次，LED灯发光，进入光疗模式。
- ※注意：请勿裸眼直视LED灯。

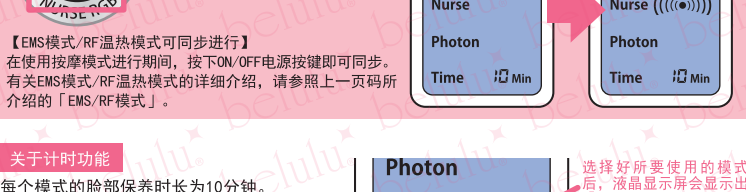

【EMS模式/RF温热模式可同步进行】
在使用按摩模式/RF温热模式期间，按下ON/OFF电源按键即可同步。
有关EMS/RF温热模式的详情，请参照前一页「EMS/RF模式」的相关内容。

按摩模式 (Nurse)

- 按一下ON/OFF按键，打开电源，液晶屏为蓝色光亮状态。
- 按一下PHOTON按键，机身开始振动。按摩模式开启。

【EMS模式/RF温热模式可同步进行】
在使用按摩模式/RF温热模式期间，按下ON/OFF电源按键即可同步。
有关EMS模式/RF温热模式的详细介绍，请参照上一页码所介绍的「EMS/RF模式」。

关于计时功能

每个模式的脸部保养时长为10分钟。
开启电源后液晶屏将会显示时间，10分钟过后电源将自动切断。
可参考下面的保养手法，显示4分钟，小部位6分钟，合计一共10分钟。



选择好所要使用的模式后，液晶显示屏会显示出「10Min」，并以分钟为单位进行倒数。在倒数中若按任意键切换模式，倒数将会重新开始。


6 基本使用步骤

- 【使用时注意事项】
●在使用LED灯进行光子嫩肤的过程中，请闭上眼睛，请不要长时间直视LED灯。
●在本品进行光子嫩肤时，必须使用美容液。否则有可能因皮肤过于干燥造成摩擦力过大，导致对皮肤的伤害。（在进行光子嫩肤的LED灯照射时可以不使用美容液）
●使用时请确保手能触碰到本机背部的金属离子导通条。
●使用时请让3D按摩头与皮肤保持接触，请让按摩头要轻柔地慢慢滑动，不要过度用力地压迫皮肤，否则易对皮肤造成损伤。
●在使用时，请取下身上的手表、首饰等金属类制品。
●在使用中若皮肤感到异常、不适应，请立即停止使用并咨询专业医生或与本公司联系。


每天的脸部护理时长请控制在每个模式10分钟。※10分钟后，机器会自动切断电源

小部位保养 眼周2分钟 唇周2分钟 颈部2分钟 合计6分钟

- △注意 ●颈部中间为敏感位置，请勿用3D按摩头接触按摩此部位。
●在对眼周做护理时请特别注意，不要用3D按摩头接触按摩眼珠的正上方皮肤。

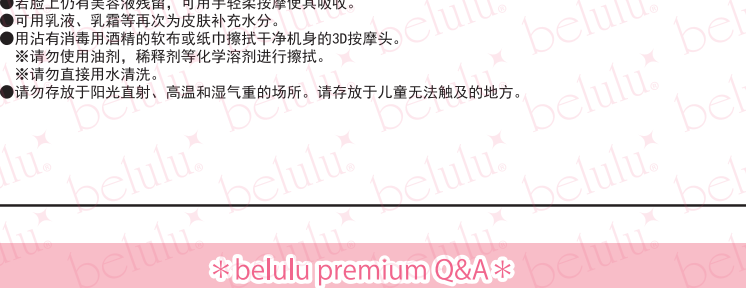

脸颊保养 一侧2分钟 另一侧2分钟 合计4分钟

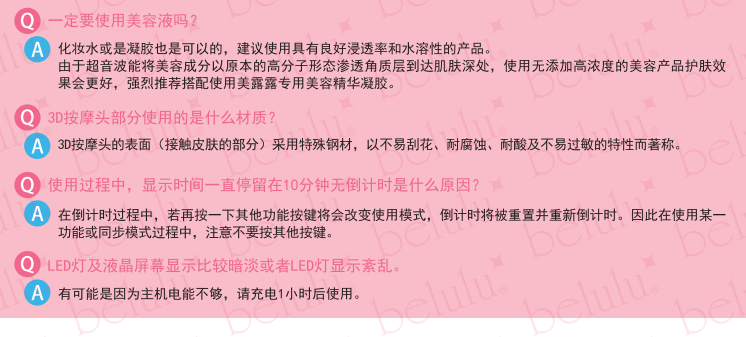

请根据自身情况制定一周护理频率。可根据自己的需要，安排重点护理的身体部位。

7 保养结束后

- 按ON/OFF按钮2秒以上，关闭本机电源。
- 若脸上仍有美容液残留，可用手轻柔按摩使其吸收。
- 可用乳液、面霜等再次为皮肤补充水分。
- 用沾有消毒用酒精的软布或纸巾擦拭干净机身的3D按摩头。
- ※请勿使用油类、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。
- 请勿直接用水清洗。
- 请勿存放于阳光直射、高温和湿气重的场所。请存放于儿童无法触及的地方。

belulu premium Q&A

- Q EMS/RF温热模式是如何运作的呢？
A EMS/RF温热模式是将电流导入肌肤，并不会产生振动。将3D按摩头紧贴肌肤，会有短暂轻微的刺激感，同时还有轻柔的温热感。
- Q 是否可以每天使用？
A 尽管这款美容仪所搭载的功能具有绝佳美容效果，但过于频繁使用会对肌肤造成负担。因此我们建议一周使用3次左右可达到保养功效。同理也应按照保养步骤中所记载的时间来使用。
- Q 一定要使用美容液吗？
A 化妆水或是凝胶是可以的，建议使用具有良好渗透性和水溶性的产品。由于本产品能将美容成分以原本的高分子形态渗透角质层到达肌肤深处，使用无添加高浓度的美容产品护肤效果会更好，强烈推荐搭配使用美容液专用美容精华凝胶。
- Q 3D按摩头部分使用的什么材质？
A 3D按摩头的表面（接触皮肤的部分）采用特殊钢材，以不易刮花、耐腐蚀、耐酸及不易过敏的特性而著称。
- Q 使用过程中，显示时间一直停留在10分钟无倒计时是什么原因？
A 在倒计时过程中，若再按一下其他功能按键将会改变使用模式，倒计时将重置并重新倒计时。因此在使用某一功能或同步使用过程中，注意不要按其他按键。
- Q LED灯及液晶显示屏显示比较暗淡或者LED灯显示紊乱。
A 有可能是因为主机电量不够，请充电1小时后使用。

本保修书将承诺按照所规定内容进行。
购买后请在保修期内若发生故障，请参照本说明书的说明进行维修委托。

【保修证明】	
■品番：_____	■品名：belulu premium
■保修期限：自购买日起1年内	
■购买者姓名：_____	
■住址：_____	
販売店：株式会社 BEAUTIFUL ANGEL 販売日付： 年 月 日 印	

- 保修书未填写的情况属于无效，请确认是否已经填写。万一有未填写的情况，请直接与本公司联系。
- 本书承诺在符合保修条件的前提下为客户提供免费维修服务。本书所承诺的用户在法律上的权利，超过保修期后需要维修服务的有关情况如有不明之处，详情请直接咨询本公司。
- （免费保修相关规定）
1.在保修期内，按照说明书使用而产生故障的情况可以进行免费维修。
2.在保修期内，用户需保修时请填写保修书，并将产品和保修书邮寄至本公司指定维修点进行免费维修。
3.属下列情况之一，即使在保修期内，也不属于免费保修范围：
a.因使用不当、自行修理和人为改造等引起的故障及损伤；
b.故障后因移动、跌落及运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损伤；
c.因火灾、地震、雷击等自然灾害、公害、异常电压等造成的故障和损伤；
d.保修书上未填写顾客姓名、购买日期的，或是书面有涂改情况的。
- 保修期内的修理等售后服务，如有不明之处，请通过下列方式与我们联系。
TEL：045-227-5121 E-mail：shop@kireido.com
〒221-0801 神奈川県横浜市中区神奈川2-29-25 株式会社ビューティフルエンジェル 修理係