



belulu® Smart
美・ル・ル スマート



衷心感谢您购买本公司产品。

使用前，请仔细阅读注意事项及使用说明，以确保您能安全、放心地使用本品。

另外，在说明书的最后附带有保修证明，请您妥善保管。

1 安全注意事项 -安全正确地使用本品的必读指南-

使用前请仔细阅读本篇「安全注意事项」，以便您正确地使用本品。

为了防止您在使用时因操作不当而造成伤害自身、及他人财产的意外事故，我们制作了本注意事项。在此我们列举了各种操作错误以及有可能造成的危险，请您仔细阅读，并按照指示使用本品。

本书内容是保证使用者安全、正确地使用本品的重要资料，若您要将本品借用他人或赠予他人，请确保能将本说明书一同转交。

【字样及含义】

表示	意味
	危险 若违反此处所记载的事项进行使用，将有极大可能造成死亡或重伤的意外。
	警告 若违反此处所记载的事项进行使用，将有可能发生死亡或重伤的意外。
	注意 若违反此处所记载的事项进行使用，将有可能对人身或财产造成伤害。 ※对伤害主要指对房屋、金钱或家畜、宠物等造成的伤害。

【标记的含义】

	表示「危险・警告・注意」其中一项。具体内容可查见此标记附近的文字或图片。
	表示「禁止事项」。具体内容可查见此标记附近的文字或图片。
	表示「必须遵守的指示」（一定要遵守）。具体内容可查见此标记附近的文字或图片。

使用前请阅读

△危险



- 正在使用下列医疗电子器械的人士，请勿使用本品。
 - 心跳起搏器等体内植入式医用电子器材
 - 人工心肺机等维持生命电子装置
 - 心电图等装着式医用电子器材
 - 其他需要装置在体内的医疗电子器材
- ※若使用本品，将可能造成医疗电子器械的勿操作，导致意外发生。

△警告



- 符合下列情况的人士，请勿使用本品。
 - 急性病患者
 - 热性疾病患者
 - 结核性疾病患者
 - 血友病患者
 - 血压异常人士
 - 恶性肿瘤患者
 - 传染病患者
 - 心脏病患者
 - 心绞痛患者
 - 多发性硬化症患者
 - 患有紫斑病等容易内出血的病患者
 - 有皮肤癌病史的人士
 - 由糖尿病及其他疾患引起的皮肤异常者
 - 孕妇与刚结束生产的产妇
 - 哺乳中产妇
 - 患有癫痫的人士
 - 患有面部神经痛的人士
 - 瘢痕体质的人士
 - 患有特发性反应性炎症的人士
 - 对化妆品或化学纤维敏感的人士
 - 有青春痤疮发炎症状的人士
 - 过敏体质或皮肤敏感人士
 - 对化妆品或化学纤维敏感的人士
 - 美国激素类长期服用者或因肝功能障碍导致毛细血管瘤扩张的人士
 - 因事故或患有头部或眼部后遗症的人士
 - 患有眼疾（白内障、青光眼、视网膜剥离、眼底出血等）的人士
 - 婴幼儿
 - 无法自主控制自己行为的人士
 - 生理期中的女士
 - 患有其他疾病，正在接受医生治疗身体状况异常的人士
 - ※可能会因意外造成皮肤或身体的伤害

使用场所・电源

△警告



- 本品采用非防水结构，为避免发生烫伤、触电等情况，请勿在浴室等湿气较重的场所使用。
- 请勿于厨房、暖炉周围等高温、有火的地方或车内、太阳直射的地方使用或放置本品，否则有可能造成触电事故或故障。
- 请勿在连接插头或插座有灰尘或垃圾时使用，否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。

△警告



- 请使用本品指定的电源适配器，并在规定的电压环境下使用，否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。
- 非充电时，请把充电连接线从机器上拔下来。拔下插头时请不要拉扯连接线，请用手握住插头再从机器上拔下。若用力拉扯充电线，有可能造成电线被拉断或短路、触电等事故。

使用前准备及使用时注意

△警告



- 请按照本品的使用目的（脸部护理）进行使用，否则有可能引起身体不适。
- 若按照说明书记载的使用方法使用，否则有可能造成身体不适或故障情况。
- 请按照本书所记载的使用时长与使用频率使用，否则有可能引起身体不适。



- 本品属于家用电器。请勿用于商业用途。否则有可能引起事故或身体不适。
- 若发生机器或连接线路有破损、故障、变形、异常发热或插头松动等情况，请停止使用。否则有可能造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。
- 请勿用沾水的手去触摸机器或连接线、插头，或试图拔下电源适配器，否则有可能造成触电、短路等的事故。

△注意



- 使用时，请遵守以下规定。
 - 皮肤较敏感的人士，为防止皮肤出现不适，在初次使用前，请在皮肤不显眼位置用最低档位短时间试用一次，并观察皮肤反应。确认无异常后方可使用。
 - 若身上的金属制品接触到3D按摩头，将有可能出现危险情况。请在使用前取下身上的饰品等金属制品。
 - 进行卸妆、脱毛的皮肤部位，当日不可使用本品。
 - ※若执意使用，将有可能出现皮肤红肿现象。
 - 本品在通电状态下时，请勿长时间放置不取。否则有可能发生安全事故或危险。
 - 若使用前请把操作按钮全部按一遍，确认机器可以正常工作后再进行使用。若发生损伤、异常等状况，请立即停止使用，并与本公司联系。请执意使用，否则有可能造成事故或身体不适。

△警告



- 在使用本品后若感到疼痛或发生疹子、皮肤发红、发痒或其他皮肤异常症状，请立即停止使用并联络本公司或专业医生咨询。请勿执意使用，否则有可能造成更严重的皮肤伤害或身体不适。
- 若使用本品时若发生机器产生异常或异常发热的情况，请立即停止使用并联络本公司进行维修检测。请勿执意使用，否则有可能造成事故伤害或故障。

修理・保管

△警告



- 请勿放置于儿童或无法自主表达意识的人士所能触及到的场所，否则有可能发生人身伤害或导致机器故障。
- 在修理本机时必须先切断电源，千万不可在机器充电中或工作中进行修理，否则易有触电的危险。



- 严禁购买者自行对本机或其附属品进行分解、改造或修理，否则会有起火或工作状态异常而造成事故伤害的可能，本公司也将不对其进行免费保修。若本机发生工作不正常等任何异常情况，请立即与本公司联络。

△注意



- 充电时请勿放置于高温、湿气重、摇晃不定或阳光直射的场所。请放置于阴凉、安全的地方，否则容易造成机器故障或缩短使用寿命。
- 若要丢弃本品，请您按照所住地区的条例规定进行回收处理。为了地球环境的美好，请勿对机器置之不理。



- 若要清洁本机或其附属品，请勿用稀释剂、精油、汽油等挥发油，或含药物、研磨剂的清洁剂和热水来擦拭，否则易引起变色或变形的损坏。如果机身污垢较严重，可用软布沾稀释后的中性清洁剂并拧干后，轻轻擦拭机身。待机身污垢被擦干净后，再用干布擦干。
- 请勿将本机及其附属品放置于发热器具周围，或放入微波炉和高压容器内，否则易造成机器发热、起火、故障等的事故。
- 请勿让本机及其附属品承受高空坠落、敲打等强烈冲击。另外，若因上述原因造成了本机及其附属品的损坏，请停止使用，否则有可能造成事故或伤害。
- 请勿令本机及其附属品沾水或用水清洗，否则可能因触电、短路造成事故或故障。

2 关于售后服务

- 使用中若发生任何异常，请立即切断电源，并在确认购买日期后与本公司联系。
- 请确认本书最后的保修证明内容，并妥善保管。
- 本公司承诺保修期内免费修理，不承担往来邮寄费用。
- 保修期过后可修理范围内的故障修理费用将由购买者承担。

3 配套内容与各部位名称


※附属配件及包装根据销售场合会有可能无预告变更请悉知。



【本体仕様】
充电时长：4~8小时 输入：5V/0.5A
适用类型：锂离子电池
高度：180×长度40×厚度44mm 重量：146g
【附录的AC适配器使用说明】
输入：100~240V 50/60Hz ± 0.2A 输出：5V/1A

4 充电方法

- 购买后第一次使用时或长时间未使用，机器会出现反应较为迟钝的情况，请先充满电。
- 将充电线的充电接口插入机身的充电口处，USB插头插入电脑或AC适配器的USB端口。
- 充电时「POWER CHARGE」指示灯会亮起，表示正在充电。
- 若发生机器或连接线路有轻微损坏，属于正常现象。
- 本机充电时间与机器使用后残留电量成正比，所以每次充电时间不一定一样。
- 充电完成后「POWER CHARGE」将会熄灭，请在灯熄灭后及时拔出插头。
- 除充电情况外，请不要让本机长期处于连接USB电源的通电状态。

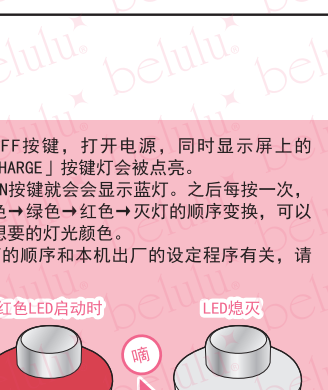

- 为了保护内置电池，即使长期不用，也要保持每月充电一次，防止过度放电。
- 如果正常充电的使用时间却依旧很短，有可能是电池寿命将尽。

●为保证安全使用，请先进行过敏测试

- 将美容液涂抹在手臂内侧皮肤较薄处，逐一试用本产品所有功能（如下页所示）。
- 确认无异常反应后方可进行脸部护理。万一出现异常反应，应立即停用，并咨询医生。

5 指示灯、按键的含义

LEVEL	可调节（离子模式和超声波模式的工作强度）	HIGH	超声波模式被设定为「强」时会亮起。
ION+/ION-	可选择（正负离子工作模式）	LOW	超声波模式被设定为「弱」时会亮起。
SONIC	开启超声波模式。	ION+	在正离子导出模式进行时会亮起。
PHOTON	开启光子嫩肤的LED灯。	ION-	在负离子导入模式进行时会亮起。
ON/OFF	电源开关。	SONIC	在超声波模式进行时会亮起。
		POWER	在电源开启时和充电时会亮起。

■可选择的模式组合■

- 超声波 (SONIC) + 光子嫩肤 (PHOTON)
- 超声波 (SONIC) + 光子嫩肤 (PHOTON) + 离子模式
- 超声波 (SONIC) + 离子
- 光子嫩肤 (PHOTON) + 离子

通过对应的按键，可自由选择自己想要使用的功能。
例如：想要进行「超声波 (SONIC) + 光子嫩肤 (PHOTON)」的组合护理，只需启动超声波模式并设定好强度后，再按下光子嫩肤 (PHOTON) 功能键就可以了！设置顺序也可以调换。

6 基本的操作方法

光子嫩肤 (PHOTON)



超声波 (SONIC)



离子模式 (负离子导入・正离子导出)



【最佳推荐使用次数】 超声波：每周3次 离子导出：每周3次 离子导入：每日 光子嫩肤：每日
超声波+离子导出：每周3次 超声波+离子导入：每周3次


【使用时注意事项】

- 在使用LED灯进行光子嫩肤的过程中，请闭上双眼，请不要长时间直视LED灯。
- 在用水洁面进行导入等护理时，必须使用美容液，否则有可能因为皮肤过于干燥造成摩擦过大，导致对皮肤的伤害。（在进行光子嫩肤的LED灯照射时可以使用美容液）
- 使用时请确保手指能碰到本机背部的金属离子导通条。
- 使用时请注意3D按摩头的平面紧贴皮肤，请注意按摩时要轻柔地慢慢滑动，不要过度用力地压迫皮肤，否则易对皮肤造成损伤。
- 在使用时，请取下身上的手表、首饰等金属制品。
- 在使用中若皮肤感到异常、不适应，请立即停止使用并咨询专业医生或与本公司联系。




基本的步骤是洗脸→深层清洁→保湿→光子嫩肤。
您可以根据喜好，在进行离子导出或光子嫩肤照射时，追加超声波波动。

脸颊保养 一侧2分钟 另一侧2分钟 合计4分钟

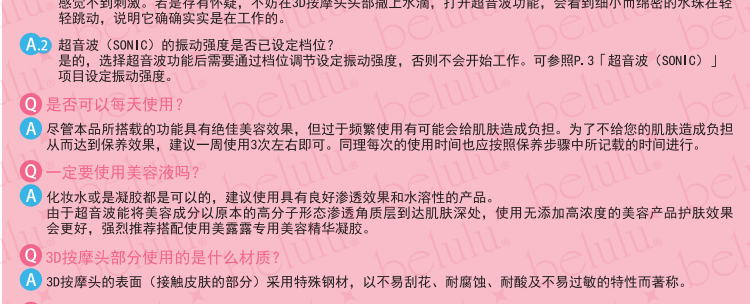

小部位保养 眼周2分钟 唇周2分钟 颈部2分钟 合计6分钟

- △注意 ●颈部中间为敏感位置，请勿用3D按摩头接触按摩该部位。
- 在对眼周做护理时请特别注意，不要用3D按摩头接触按摩眼珠的正上方皮肤。

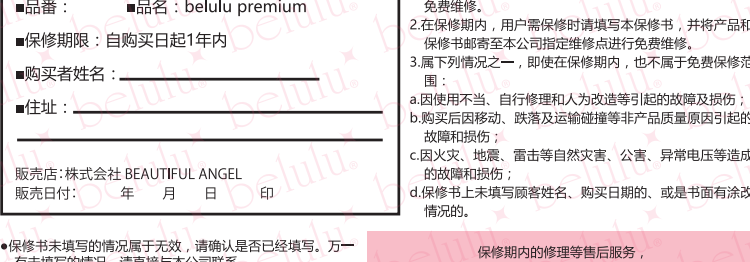

* Belulu smart Q&A *

- Q 使用时为何感觉不到超音波 (SONIC) 的振动呢？
A1 本产品的超音波功能 (SONIC) 可以达到1秒钟大约振动300万次，这种速度下的振动肉眼是无法看到的，肌肤也感觉不到刺激。若是存有怀疑，不妨在3D按摩头顶部滴上水滴，打开超音波功能，会看到细小而绵密的水珠在轻轻跳动，说明它确实是在工作的。
A2 超音波 (SONIC) 的振动强度是否已设定档位？
是的，选择超音波功能后需要通过档位调节设定振动强度，否则不会开始工作。可参照P.3「超音波 (SONIC)」项目设定振动强度。
- Q 是否可以每天使用？
A 尽管本品所搭载的功能具有绝佳美容效果，但过于频繁使用有可能会给肌肤造成负担。为了不给您的肌肤造成负担从而达到保养效果，建议一周使用3次左右即可。同理每次的使用时间也应按照保养步骤中所记载的时间进行。
- Q 一定要使用美容液吗？
A 化妆水或是凝胶都是可以的，建议使用具有良好渗透效果和水溶性产品。由于超音波能将美容成分以原本的高分子形态渗透角质层到达肌肤深处，使用无添加高浓度的美容产品护肤效果会更好，强烈推荐使用使用美容液专用美容精华凝胶。
- Q 3D按摩头部分使用的是什么材质？
A 3D按摩头的表面（接触皮肤的部分）采用特殊钢材，以不易刮花、耐腐蚀、耐酸及不易过敏的特性而著称。
- Q 功能指示灯LED灯表示混乱。
A 有可能是因为主机电量不够，请充电1小时后使用。

本保修书将承诺按照所规定内容进行。

购买后在保修期内若发生故障，请参照本书的说明进行维修委托。

【保修证明】

■品番： ■品名：belulu premium
■保修期限：自购买日起1年内
■购买者姓名： _____
■住址： _____
販売店：株式会社 BEAUTIFUL ANGEL
販売日付： 年 月 日 印

（免费保修相关规定）

- 1.在保修期内，按照说明书使用而产生故障的情况可以进行免费维修。
- 2.在保修期内，用户需指定时填写本保修书，并将产品和保修书邮寄至本公司指定维修点进行免费维修。
- 3.属下列情况之一，即使在保修期内，也不属于免费保修范围：
 - a.因使用不当、自行修理和人为改造等引起的故障及损伤；
 - b.购买后因移动、跌落及运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损伤；
 - c.因火灾、地震、雷击等自然灾害、公害、异常电压等造成的故障和损伤；
 - d.保修书上未填写顾客姓名、购买日期的，或是书面有涂改情况的。

保修期内的修理等售后服务，如有不明之处，请通过下列方式与我们联系。
TEL: 045-227-5121 E-mail: shop@kireido.com
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町2-5-15
Relax 6F
株式会社 BEAUTIFUL ANGEL