



belulu® 美・ル・ル

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いてまいりますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本品をご使用中は、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを直接見ますと、目を傷めるおそれがあります。
 - 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
 - 万一、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
 - 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
 - スチーム等高温になる場所や本品や電源アダプターを使用中に放置しないであってください。
 - 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
 - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止し医師に相談してください。
 - 下記リストをよくご確認ください。該当する方は本品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。
- 注意**
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 使用中、痛み等があった場合は、すぐに3Dヘッドを肌から離してください。
 - 落としたり、叩いたり強い衝撃を与えないでください。
 - 約4〜8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
 - 充電中以外は充電ケーブルを本体から外してください。
 - 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、柔らかく濡れた布巾でやさしく拭いてください。ペンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 急性疾患 ●熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内埋込式医用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機、心臓などの装着型医用電子機器） ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方） ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節のよ ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髪、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

美・ル・ル 機能紹介

光エステ(Photon)

3色のLEDをお肌を活性化させ、美肌に導きます。
各LEDの効能は、下記の「LEDライトのカラーと効果」をご参照ください。

超音波(Sonic)

超音波の高速振動により、お肌の余分な角質や内部に入り込んだ汚れをはじき出され、お肌が柔らかくなります。

また、新陳代謝が活発になり、老廃物の排出やむくみ改善が期待できます。

イオン導出(プラスイオンモード)

超音波振動がプラスイオンの吸引能力を利用して、毛穴の奥の汚れや老化角質をしっかりと掃除。通常のメイク落としより洗浄力が高く、手の届かない毛穴つまりや黒ずみをこそりかき出すので、生まれたもののきれいな肌。

超音波(SONIC)と同時に使うことで、さらに効果が高まります。

イオン導入(マイナスイオンモード)

マッサージと同時に行うことによりマイナスイオンの^{はいせきりく}浸透力を高めて、美容成分が肌の細かいところまで浸透し、深いレベルまでの美容効果を発揮します。

イオン導出できれいになった毛穴に、イオン導入で美容成分をしっかり吸収させます。

超音波(SONIC)と同時に使うことで、さらに効果が高まります。

LEDライトのカラーと効果

LEDライトは色ごとに波長が異なり肌の奥に届く深さも違うため、色によって肌に様々な効果をもたらします。
お肌の悩みに合わせてカラーを選べます。




赤LED:
630nm波長。コラーゲンを増やしてシミ・シワ・たるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効果が期待できます。



青LED:
415nm波長。ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。できってしまったニキビを静寂化し、さらにニキビがでにくい肌に整えます。

セット内容と製品仕様

※製品仕様や外観は予告無く変更になる場合があります。

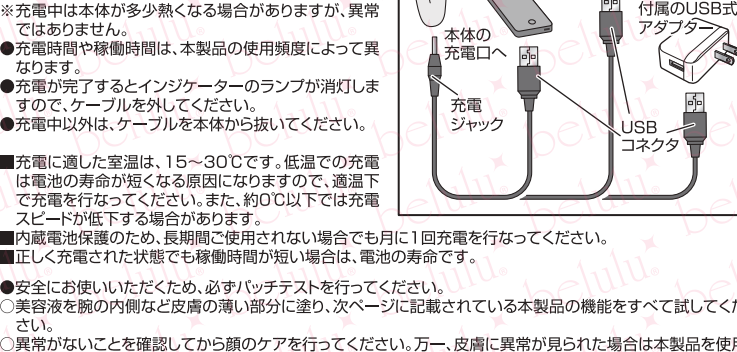

【本体仕様】
充電時間: 4〜8時間 入力: 5V/0.5A 使用電池: リチウムイオンバッテリー
高さ: 175×幅: 90(ヘッド部分)×厚さ: 45mm 重さ: 175g
【USB式アダプター仕様】
入力: 100〜240V 50/60Hz 0.2A 出力: 5V/1A

充電について


- ご購入後初めて使用する場合や長期使用しなかった場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。
 - 充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプターのUSBポートに接続します。
 - 電源ボタン横のインジケーターにランプが点滅します。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
 - 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
 - 充電が完了するとインジケーターのランプが消灯しますので、ケーブルを外してください。
 - 充電中以外には、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15〜30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、過高温で充電を行なうと危険です。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも充電は電池の寿命です。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。
- 安全にお使いいただくため、必ずパチテストを行ってください。
 - 美容液を顔の内側など皮膚の薄い部分に塗り、次ページに記載されている本製品の機能をすべて試してください。
 - 異常がないことを確認してから顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本製品を使用せず、当社または医師にご相談ください。

よくあるお問い合わせ：使用中、美顔器を持っている手にビリビリとした刺激や痛みを感じます。漏電ですか？
漏電ではありません。本品は持ち手の金属部に微電流を流し、肌の「リアゾーン」を抜けて皮膚の深部まで美容成分を浸透させるもので、人によっては刺激を感じる場合があります。微電流は人体には無害ですが、気になる場合は超音波レベルを下げてお使いください。


ボタン操作




Selectボタン 超音波モード、イオンモードの設定を行います。

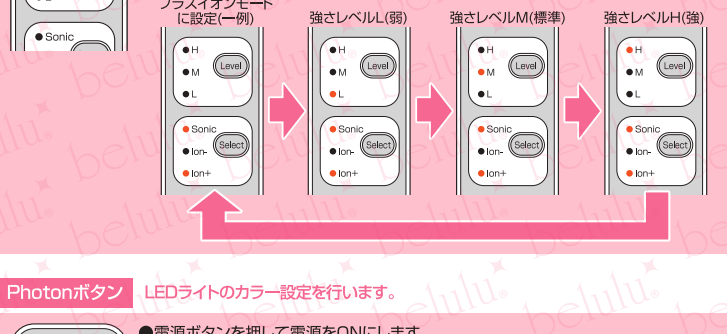

Levelボタン 超音波モード、イオンモードの強さ設定を行います。

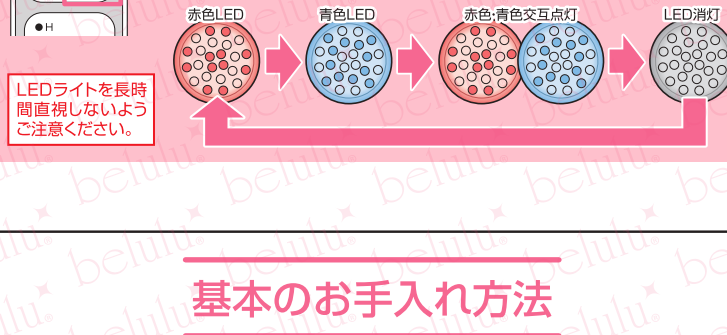

Photonボタン LEDライトのカラー設定を行います。

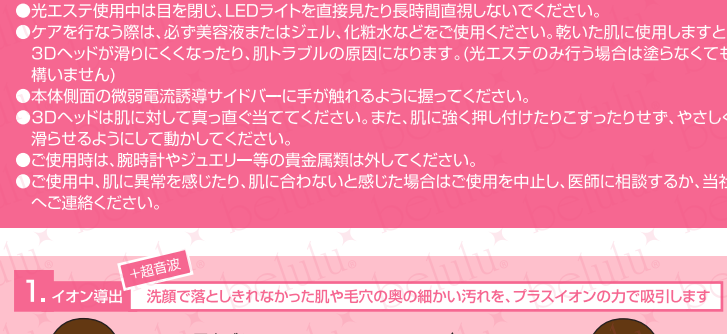

基本のお手入れ方法

- 光エステ使用中は目を閉じ、LEDライトを直接見たり長時間直射しないでください。
- ケアを行なう際は、必ず美容液またはジェル、化粧水などをご使用ください。乾いた肌を使用しますと、3Dヘッドが滑りなくなったり、肌トラブルの原因になります。(光エステのみ行う場合は塗らなくても構いません)
- 本体側面の微弱電流誘導サイドバーに手が触れるように握ってください。
- 3Dヘッドは肌に対して真直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすりすぎたりせず、やさしく滑らせるように動かしてください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類をはずしてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

1. イオン導出 +超音波 洗顔で落とされなかった肌や毛穴の奥の細かい汚れを、プラスイオンの力で吸い出します

- ① 通常通り洗顔し、水気をしっかりとふき取ってください。
- ② 3Dヘッドに付属のコットンと固定ゴムをしっかりと固定します。
- ③ 水またはふき取り化粧水をコットンにたっぷり浸み込ませます。
- ④ PHOTONボタンでプラスイオンモードに設定したら、3Dヘッドをやさしく肌に当て、右の図を参照しながらケアを行ってください。

●汚れが溜まりやすい小鼻の脇を重点的に行うなど、ご自身の肌の状態に合わせてアレンジしてください。
●ケアが終わりましたら3Dヘッドからコットンを外し、顔や3Dヘッドに残った水やふき取り化粧水をきれいに拭き取ってください。

2. イオン導入 +超音波 マイナスイオンの力で、肌の奥に美容成分を浸透させます イオン導出後に行うとより効果的です。

- ① 美容液・美容ジェル・化粧水などを3Dヘッドに乗せる、または顔に直接塗り塗ります。
- ② PHOTONボタンでマイナスイオンモードに設定したら、3Dヘッドをやさしく肌に当て、右の図を参照しながらケアを行ってください。
- ③ ケア中に美容液・美容ジェル・化粧水などが足りなくなったり3Dヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度塗り足してください。

③ 乳液やクリーム等でフタをして脂分を捕まえます。乳液・クリーム等はお手持ちのもので構いません。

●乾燥しやすい部分を重点的に行うなど、ご自身の肌の状態に合わせてアレンジしてください。
●3Dヘッドに残ったジェル等は、きれいに拭き取ってください。
●続けて光エステを行う場合は、脂分補給やジェルの拭き取りはせずそのまま行ってください。

+α

3. 光エステ カラーLEDで、お肌の悩みを徹底改善 お好みで美容液・美容ジェル・化粧水等をご使用ください。

- ① P.1のLEDカラーの機能一覧からご自身の悩みを選び、PHOTONボタンで設定します。
- ② 赤色LEDはシワ、緑LEDは色素沈着、青色LEDはニキビ部分など、改善したい箇所に光を当ててください。
- ③ 乳液やクリーム等でフタをして脂分を捕まえます。乳液・クリーム等はお手持ちのもので構いません。

●美容液・美容ジェル・化粧水等をご使用でない場合も、3Dヘッドを清潔に保つためウェットティッシュ等で拭いてください。

いつもの洗顔 → イオン導出(イオン) → イオン導入(イオン) → 光エステ(Photon)

洗顔→イオン導出→イオン導入→光エステの順で行うのが基本のステップです。お好みでイオン導入時、光エステ時に超音波を追加してください。

フェイスクア 片側2分、反対側2分 計4分

- ① 顎からフェイスラインに沿って耳の下まで滑らせます。
- ② 顎・口の横・鼻の横を起点に斜めに滑らせます。
- ③ ②と同じルートで、円を描きながら滑らせます。
- ④ フェイスラインから顔の中心に向かって滑らせます。
- ⑤ フェイスラインから真上に滑らせます。
- ⑥ 目の横・眉上を起点に真上に滑らせます。

パーツケア 目元2分、口元2分、首元2分 計6分

△注意 ●首の中心部は危険ですので、絶対に3Dヘッドを当てないでください。
●目の周辺をケアする際は、特にご注意ください。眼球の真上に3Dヘッドを当てないでください。

目元 目の上下を中心から外側に向かって滑らせた後、同じルートで円を描きながら滑らせます。眼球の真上は避けてください。

口元 口の上下を中心から外側に向かって滑らせた後、同じルートで円を描きながら滑らせます。

首元 首の両側を、下から上に向かって滑らせた後、同じルートで円を描きながら滑らせます。首の中心部は危険ですので、3Dヘッドを当てないでください。

【推奨使用頻度】

超音波エステ：週3日 イオン導出：週3日 イオン導入：毎日 光エステ：毎日

超音波エステ+イオン導出：週3日 超音波エステ+イオン導入：週3日

美・ル・ル Q&A

Q 超音波(SONIC)が振動していない気がするのですが…?

A.1 超音波(SONIC)は1秒間に約300万回振動しており、その速さから振動は目に見えたり、肌に刺激を感じるものではありません。気になる場合は、3Dヘッドに水滴をたらしてみてください。水滴が1秒間に揺れたり、跳ねたり、跳ねたりする音が超音波振動しています。

A.2 超音波振動(SONIC)の強さレベルを設定してありますか？
超音波レベルを強く設定しなくても振動はしますが、P.5の「超音波(SONIC)」の項目をご参照の上、毎日レベルを設定してください。

Q 使用の時間は長ければいいのでしょうか？

A 本製品に搭載されている機能は高い美容効果を発揮しますが、その頻繁に使用しすぎるとお肌に負担をかける可能性があります。単にお肌に負担をかけずにお手入れをしていただくために、週3回のご使用をお願いしております。同様の理由で、1日の使用時間もお手入れ手順に記載されている時間をお守りください。

Q 使うのは美容液でなければいけませんか？

A 化粧水やジェルでも大丈夫です。浸透性を考慮し、水溶性のものをおすすめしております。また、美容成分が高分子のまま肌の奥まで浸透させるため、美容成分が高濃度で無添加のものを使用することで、より効果が高まります。美・ル・ル専用の美容ジェルも販売しておりますので、是非ご利用ください。

Q 3Dヘッド部分の材質は何ですか？

A 3Dヘッドの表面(皮膚に触れる部分)には、ステンレスを使用しております。傷や腐食・サビに強く、アレルギーを起こりにくいといわれています。

Q インジケーターのランプが勝手に変わってしまいます。(ボタンに手を触れていないのにランプが順番に移動しています。)

A 充電残量が少なくなっています。付属の充電ケーブルを接続し、充電を行ってください。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものではありません。
お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

【修理規定】

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有効になります。
a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d. 本書の提示がない場合。
e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

【保証書】 ※美顔器以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

■品番: belulu

■修理保証期間: 到着日から6ヵ月間

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店: 株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印

【修理費用について】

- 商品到着後1ヶ月以内(初期不良の場合) ……無償修理・交換させていただきます。その際の送料は弊社が負担致します。
- 商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以内の場合 ……修理代無料で行わせて頂きます。その際の送料は弊社が負担致します。
- 商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以上の場合 ……修理代・往復送料をお客様負担にて対応させていただきます。尚、商品の返品は、到着後7日以内のものに限りです。

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

TEL: 045-227-5121 E-mail: shop@kireido.com
〒231-0027 神奈川県横浜市都筑区扇町2-5-15
リラクティブビル6F
株式会社ビューティフルエンジェル