


# belulu® ~ClearVeil~ 家庭用光脱毛器

## 美・ル・ル クリアベール

### 取扱説明書

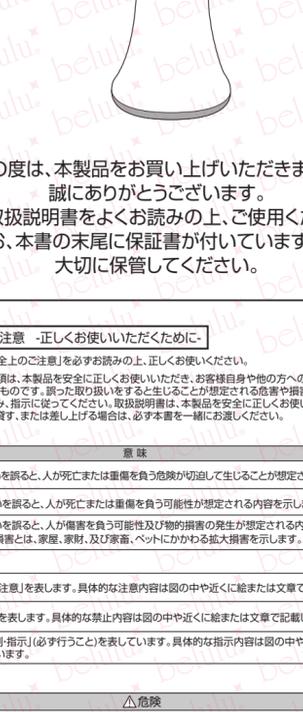

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。  
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

## 1 安全上のご注意 - 正しくお使いいただくために -

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただく、お客様自身や他の方への危害や財産等の損害を未然に防ぎます。誤った取り扱いや使用による生じるご使用上の想定される危険や損害の程度を表しているもので、必ずよくお読みください。取扱説明書は、本製品を安全に正しくお使いいただくために必要です。本製品を人に貸す、または譲り受けられる場合は、必ず本製品と一緒にお渡しください。

表示	意味
	<b>△危険</b> 取り扱いは誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
	<b>△警告</b> 取り扱いは誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	<b>△注意</b> 取り扱いは誤ると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家庭、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

【表示の意味】  
 「危険事項」を表します。具体的な注意事項内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。  
 「禁止事項」を表します。図の中や近くに絵または文章で記載しています。  
 「行為の強制・指示(必ず行うこと)」を表します。具体的な指示内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。

### ご使用前に

#### △危険

- 必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品を使用しないでください。
- パワースターター等の体内植入式医療用電子機器 ○人工肺等の生命維持用医療用電子機器 ○心電図等の装着型医療用電子機器 ○その他、体内に装着している医療用電子機器  
※医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。

#### △警告

- 下記に当てはまる方は、本製品のご使用をお避けください。
  - 急性疾患がある方 ○熱性疾患のある方 ○結核性疾患の方 ○血圧疾患の方
  - 血圧変動がある方 ○悪性腫瘍がある方 ○伝染病のある方 ○心臓病の方 ○狭心症の方
  - 3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方 ○多発性骨化性筋症の方
  - 麻痺病など内出血しやすい方 ○皮膚がん(表皮がん)がある方 ○てんかんをお持ちの方
  - 顔面神経痛をお持ちの方 ○皮膚異常疾患の方 ○妊娠中(授乳中)の方 ○授乳中の方
  - 顔面神経痛をお持ちの方 ○クイッド体質の方 ○アレルギー性皮膚炎の方
  - 通商の旅行をされている方 ○ニキビが化膿し炎症を起こしている方
  - アレルギー性皮膚炎で専門医の指導下で治療中の方 ○化粧品や化学繊維等でかぶれひびくことがある方
  - アトピー性皮膚炎の長期服用中(併用)抗がん剤治療で毛髪脱落を起している方
  - 車などにより顔面や顔料の剥離がある方 ○海水浴や大浴場へ行く前の方
  - 本製品を使用する前後2週間以内に美白化粧品やシミケアに含まれる化粧品等を使用する、または使った方
  - 乳幼児 ○自分の顔面や手足、顔毛を剃ることができない方
  - その他、医師の治療を受けている時や機体、肌身に異常がある場合※事故や、肌身に異常が起きるおそれがあります。

#### △警告

- 乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所でご使用しないでください。守らないと事故やケガなどの事故のおそれがあります。
- 本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身の修理は絶対に行わないでください。発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不良につきましては、必ず当社へご連絡ください。

#### △警告

- 充電や保管は高温多湿、直射日光の当たる場所を避け、涼しい安全な場所で行ってください。守らないと事故や故障の他、製品の劣化を早めます。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の条例に従って処分してください。地球環境のため、放置しないでください。
- 本体や付属品を洗浄する際は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油・薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯や洗剤は使用しないでください。変色、変質や傷がつくおそれがあります。汚れひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布を濡してよく絞り、やさしく汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で拭き上げておきましょう。
- 本体や付属品を熱湯に浸けたり、電子レンジや高温圧力鍋に入れないでください。発熱、発火、故障等の原因となります。
- 本体や付属品を高い所から落としたり、叩いたり強い衝撃を与えないでください。また、発火の原因で本体や付属品の損傷は発生し、使用しなくなることがあります。ケガや故障のおそれがあります。
- 本製品や付属品を水につけたり、水洗いしないでください。感電やショート、事故、故障のおそれがあります。

#### △警告

- ご使用時、以下の事項をお守りください。
  - 初めて使用する際は、お肌が敏感な方は、目立たない部分にて使用時間を短くし、出力レベルを低く設定する様子を見ながら使用してください。守らないと肌トラブルや事故のおそれがあります。
  - 顔に当たらない様子を見ながらフラッシュが当たりますと危険です。ご使用時は、資金調度はおこなってください。顔面神経痛への使用はお避けください。守らないと腫れたり、赤みが出る場合があります。
  - 本製品を充電させたまま長時間放置しないでください。事故やケガのおそれがあります。
  - 使用前の準備作業が完了して、電源が入った状態でフラッシュ照射を行ってください。ケガ、損傷、異常動作の発生は発生せず、弊社へご連絡しないでください。守らないと事故やケガのおそれがあります。

#### △警告

- 乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所でご使用しないでください。守らないと事故やケガなどの事故のおそれがあります。
- 本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身の修理は絶対に行わないでください。発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不良につきましては、必ず当社へご連絡ください。

#### △注意

- ご使用時、以下の事項をお守りください。
  - 初めて使用する際は、お肌が敏感な方は、目立たない部分にて使用時間を短くし、出力レベルを低く設定する様子を見ながら使用してください。守らないと肌トラブルや事故のおそれがあります。
  - 顔に当たらない様子を見ながらフラッシュが当たりますと危険です。ご使用時は、資金調度はおこなってください。顔面神経痛への使用はお避けください。守らないと腫れたり、赤みが出る場合があります。
  - 本製品を充電させたまま長時間放置しないでください。事故やケガのおそれがあります。
  - 使用前の準備作業が完了して、電源が入った状態でフラッシュ照射を行ってください。ケガ、損傷、異常動作の発生は発生せず、弊社へご連絡しないでください。守らないと事故やケガのおそれがあります。

#### △警告

- 乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所でご使用しないでください。守らないと事故やケガなどの事故のおそれがあります。
- 本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身の修理は絶対に行わないでください。発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不良につきましては、必ず当社へご連絡ください。

#### △注意

- 充電や保管は高温多湿、直射日光の当たる場所を避け、涼しい安全な場所で行ってください。守らないと事故や故障の他、製品の劣化を早めます。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の条例に従って処分してください。地球環境のため、放置しないでください。
- 本体や付属品を洗浄する際は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油・薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯や洗剤は使用しないでください。変色、変質や傷がつくおそれがあります。汚れひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布を濡してよく絞り、やさしく汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で拭き上げておきましょう。
- 本体や付属品を熱湯に浸けたり、電子レンジや高温圧力鍋に入れないでください。発熱、発火、故障等の原因となります。
- 本体や付属品を高い所から落としたり、叩いたり強い衝撃を与えないでください。また、発火の原因で本体や付属品の損傷は発生し、使用しなくなることがあります。ケガや故障のおそれがあります。
- 本製品や付属品を水につけたり、水洗いしないでください。感電やショート、事故、故障のおそれがあります。

△ 下記の【表A 使用可能な肌色表】をご参照ください

本品は、ムタ毛やダ毛の元になる毛根と色素が濃い部分にレーザーを当てて脱毛します。  
下記の表で肌の色が濃褐色・黒褐色に該当する方は、やけどの危険があるため、本品の脱毛機能をご使用いただけません。


肌の色	OK	OK	OK	OK	※注意 肌色レベルを高く 設定していただく	使用不可 やけどの危険が あります
肌の色	明るい肌色	やや明るい肌色	淡黄白色 標準的な肌色	小変色 茶褐色	褐色	濃褐色 黒褐色

※本品の使用が可能な肌色でも、シミやクレーターが深い場合はご使用いただけない場合があります。

肌の色	肌色レベル	肌色レベル	肌色レベル	肌色レベル	肌色レベル	肌色レベル
肌	レベル3-5 3-4回照射	レベル3-4 3-4回照射	レベル3-4 3-4回照射	レベル2-3 3-4回照射	レベル1-2 2-3回照射	使用不可
腕	レベル3-5 2回照射	レベル3-4 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル1-2 2-3回照射	使用不可
脚	レベル3-5 2-3回照射	レベル3-4 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル1-2 2-3回照射	使用不可
口周り	レベル3-5 2-3回照射	レベル3-4 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル1-2 2-3回照射	使用不可
顔	レベル3-5 3-4回照射	レベル3-4 3-4回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル2-3 2-3回照射	レベル1-2 2-3回照射	使用不可

※肌色レベルは肌の色素濃度を表し、肌の色が濃くなるほど肌色レベルは高くなります。

## 2 セット内容・名称

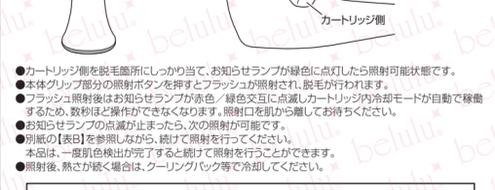

【本体仕様】  
●入力電力:36W  
●定格電圧:100V~240V  
●定格周波数:50Hz/60Hz  
●保存温度:0~45℃  
●使用温度:5~35℃

★別売で「アクネケア」「エイジングケア」のカートリッジを販売しております。

## 3 使用方法

### 本体に通電させる

- 電源コードのプラグを脱毛器本体下部のコード差し込みに差し込みます。
- ACプラグを電源コンセントに差し込みます。
- 正しく通電されるとお知らせランプが赤色に点滅します。

※電源だけが入った状態です。電源が入っていません。  
※カートリッジが装着されていない状態で通電させないでください。

### 肌色検出を行う

本品は安全装置により、センサーが肌を検知していない状態ではフラッシュを照射できません。

① 操作ボタンを2秒以上長押しすると電源ONになり、お知らせランプが赤色に点滅し液晶ディスプレイが点滅表示されます。

② 肌色センサーを腕など顔面に近い肌色検出部に近づけると、肌色センサーの表示が点滅し、お知らせランプが赤色に点滅しフラッシュが点滅します。

③ 肌の色が検知されるとお知らせランプが緑色に点滅し、液晶ディスプレイに肌色レベルが表示されます。

### レベル設定を行う

操作ボタンを押すことで、照射レベルが下部のように切り替わります。  
別紙の【表B】の肌色レベル設定を参照し、照射レベルを設定してください。

レベル1 (肌色検出時) → レベル2 → レベル3 → レベル4 → レベル5

## 4 脱毛を行う

### 脱毛を行う前の準備

- 照射箇所を清潔にし、よく乾かしておいてください。
- 脱毛を行う際の毛の長さは、2~3mmを推奨しております。
- 毛が長い場合はシェーバー等で長さを整え、短くは2~3mm程度まで伸ばしてください。
- ワックスや脱毛クリームは使用しないでください。
- ジェルや化粧水等は不要です。
- ほくろやシミが多い場合は、絆創膏等でカバーしてください。色素が濃い部分に熱が集中し、やけどを起すおそれがあります。

### フラッシュ照射を行う

フラッシュ照射時は強い光が出ます。光は一瞬ですが、なるべく目視しないようにご注意ください。

●カートリッジを脱毛箇所にかかり当て、お知らせランプが緑色に点滅したら照射可能状態です。

●本体下部のフラッシュボタンを押すとフラッシュが照射され、脱毛が行われます。

●フラッシュ照射中はフラッシュが赤色・緑色交互に点滅し、お知らせランプが赤色に点滅しフラッシュが点滅します。

●お知らせランプが点滅が止まったら、次の照射が可能となります。

●別紙の【表A】を参照しながら、続けて照射を行ってください。

●肌色検出が完了すると続けて照射を行うことができます。

●照射後、熱さが続く場合は、クーリングパック等で冷ましてください。

照射口が肌に対して垂直に当たって、照射口全体を肌で覆うようにしっかりと当ててください。照射口の一部が当たっていても、肌を傷つけても構いません。

●毛が長い場合は、照射口を毛の根元から約2cm程度まで近づけてください。

●肌の色が濃くなるほど、照射口を肌で覆うようにしっかりと当ててください。

効果的に脱毛を行うには、毛が生え変わる周期に合わせて照射する必要があります。

休止期 → 成長期(3ヶ月~数年) → 退行期(2~3週間) → 休止期

●1回目のフラッシュは休止期から成長期へ移行するときに実施してください。2回目のフラッシュは成長期から退行期へ移行するときに実施してください。3回目のフラッシュは退行期から休止期へ移行するときに実施してください。4回目のフラッシュは休止期から成長期へ移行するときに実施してください。5回目のフラッシュは成長期から退行期へ移行するときに実施してください。6回目のフラッシュは退行期から休止期へ移行するときに実施してください。7回目のフラッシュは休止期から成長期へ移行するときに実施してください。8回目のフラッシュは成長期から退行期へ移行するときに実施してください。9回目のフラッシュは退行期から休止期へ移行するときに実施してください。10回目のフラッシュは休止期から成長期へ移行するときに実施してください。

## 5 脱毛が終わったら

### 脱毛後

- 脱毛後は、非常にデリケートな状態になっています。シェーバーやワックス等で剃削し、化粧水やクリーム等で保湿を行ってください。
- 2~3日外出する場合は、必ずSPF30以上の日焼け止めを塗ってください。


### 脱毛器本体

- 操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグを抜いてください。
- 本体の照射口はエレクトロニクスや鋭く絞った繊維布巾等でやさしく拭いてください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

## 6 カートリッジの付け替え

ご希望のタイプに合わせて、カートリッジを付け替えることができます。

必ず電源を切り、コードを抜いた状態で行ってください。

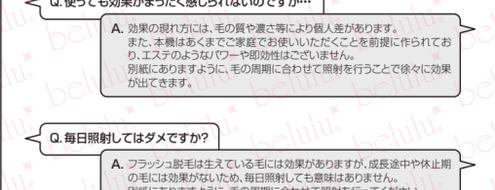

カートリッジの種類は、カートリッジ裏側に貼っているシールの文字で見分けることができます。

- 【HR】 脱毛用  
フラッシュ光を毛根に効果的に届かせる。
- 【AC】 アクネケア用  
ニキビの炎症を抑える他、ニキビができていない肌にも効果的です。(別売)
- 【SR】 エイジングケア用  
肌を活性化し、気になる年齢肌を直接アプローチします。(別売)

## 7 アクネケア・エイジングケア

- アクネケア用またはエイジングケア用カートリッジを装着し、電源を切らずに電源をONにします。
- 操作方法の「肌色検出を行う」レベル設定を行うを参照し、レベルを設定してください。
- 脱毛を行うに際して、カートリッジの照射口をニキビまたは年齢肌がある部分に当て、フラッシュ照射を行います。
- フラッシュ照射後はお知らせランプが赤色・緑色交互に点滅しカートリッジ内冷却モードが自動で稼働するため、数秒間は操作ができません。
- お知らせランプが点滅が止まったら、次の照射が可能となります。
- 照射後、熱さが続く場合は、クーリングパック等で冷ましてください。

### ケアが終わったら

- ヒタムCが含まれたパック等で冷まし、化粧水やクリームで保湿を行ってください。
- 2~3日外出する場合は、必ずSPF30以上の日焼け止めを塗ってください。

### 脱毛器本体

- 操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグを抜いてください。
- 本体の照射口はエレクトロニクスや鋭く絞った繊維布巾等でやさしく拭いてください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

## 8 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

- 電源コードは正しく接続されていますか?  
コードのつなぎが間違っていたり、接続が不十分です。通電できませんので電源が入りません。  
【確認方法】を参照し、正しく接続してください。
- カートリッジはしっかりと装着されていますか?  
カートリッジが装着されていなかったり、カートリッジの差し込みが不十分だと安全装置が稼働し、電源が入りません。  
カートリッジを「カチカチ」音がするまでしっかりと装着してください。
- 操作ボタンを長押ししていますか?  
操作ボタンを軽く触っただけでは電源が入りません。  
2秒以上長押ししてください。

【解決しない場合は】  
ケーブルの断線、もしくは本体の初期不良および故障が考えられます。上記で、当社へご連絡ください。

- 肌の色が別紙の【表A】の「濃褐色」「黒褐色」に該当していませんか?  
【表A】で肌の色が濃褐色・黒褐色に該当する場合はやけど防止の観点から使用できない肌色レベルに該当する場合があります。
- 「肌色センサー」を肌に対していませんか?(フラッシュ照射口を当てていませんか?)  
本体の片側にフラッシュ照射口、反対側に肌色センサーが設置されています。フラッシュ照射口を肌に対しては必ず肌色センサーを当てておきましょう。肌の色が濃くなるほど、照射口を肌で覆うようにしっかりと当ててください。
- 肌色センサーが肌にしっかりと当たっていますか?  
センサーの一部が肌に対していなかったり、斜めになっていると、肌検知ができません。  
肌に対して垂直に、センサー全体を肌で覆うようにしっかりと当ててください。

【解決しない場合は】  
本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。

- フラッシュ照射口が肌に対して当たっていませんか?  
照射口の一部が肌に対して当たっていても、斜めになっていると、安全装置が稼働し、フラッシュ照射ができません。  
肌に対して垂直に照射口を当ててください。
- 残りショット数が少ない可能性があります。  
カートリッジの残りショット数が少なくなると、自動的に変色が起ります。新しいカートリッジと交換してください。(変色が起っても品質に影響はありません。)

【動作確認しても作動しない場合は】  
本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。

## よくあるお問い合わせ

Q. フラッシュ照射時にジェル等を塗る必要が無いのはなぜですか?  
A. フラッシュは肌に対して熱影響は高く、高い効果がありますので、ジェル等は必要ありません。  
照射後はクールダウン及び保湿のために美容液やジェル等を塗ってアフターケアを行ってください。

Q. 妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか?  
A. 妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモン(バランス)が不安定でお肌もデリケートな状態になっているため、ご使用タイミングによっては顔にアトピー性皮膚炎が起る場合があります。  
必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただきますようお願いいたします。  
(脱毛器の機能は母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。)

Q. 使っても効果がまったく感じられないのですが...  
A. 効果の現れ方には、毛の質や濃さ等により個人差があります。  
また、本機はあくまで家庭用ですので、ご使用タイミングや照射回数、照射部位によっては効果が現れない場合があります。  
別紙の【表A】を参照しながら、肌の周期に合わせて照射を行うことで徐々に効果が現れます。

Q. 毎日照射してはダメですか?  
A. フラッシュ脱毛は生えている毛にのみ効果がありますので、成長途中や休止期の毛には効果がありません。毎日照射しても効果はありません。  
別紙の【表A】を参照しながら、肌の周期に合わせて照射を行ってください。

Q. 返品できますか?  
A. 初期不良の場合のみ、商品到着日から7日以内であれば返品・返金を承りますので、当社へご連絡ください。  
それ以外の返品・返金はできません。

## 保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受付番号または注文番号 | 氏名 | 購入商品 | 購入からの期間 | 故障状況

上記の項目を添えて、お電話サポートまたはメールにてご連絡ください。

E-mail: support@belulu.com  
固定電話:0120-09-5121 | 携帯・スマートフォン:045-227-5121

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヶ月以上経過した場合は、修理品の往送料をお客様にご負担いただきます。  
※保証期間経過後は、診断をして修理できる場合はご希望により有料にて修理させていただきます。  
※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

〒231-0027 神奈川県横浜市中央区磯野町2-15-1 リラックスビル6F  
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】  
●本体以外の付属品は消耗品のため、保証対象外となります。  
●修理期間中に修理を行うことをお約束するものではありません。  
●修理期間中に修理を行う場合は、修理期間の延長を依頼していただく場合があります。

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。  
2. 保証期間内に故障して修理を受けたい場合は、商品と本書をご提示の上、ご連絡ください。  
3. 次のような場合は、保証期間外となります。  
a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。  
c. 火災、地震、落雷その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
d. 本書の提示がない場合。  
e. 本書に日本語のみ、お買い上げの日の記入がない場合。あるいは文字を書き換えられた場合。  
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

●製品名: ■製品名 belulu ClearVeil  
●保証書発行日: ■保証書発行日(使用回数に関わらず)  
●お客様名: ■お客様名  
●ご注文: ■ご注文  
●受付番号: ■受付番号  
●販売店: ■販売店株式会社ビューティフルエンジェル  
販売日付: 年 月 日 印

●修理期間中の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理しているお買い上げ日(店舗印)の記載無くても問題ございません。  
ただし、お問い合わせや修理依頼の際は、お買い上げの日付をお知らせください。お申し込みの受付番号(ご注文番号)を必ずお書き添えください。  
●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとに限り有効です。  
●この保証書は、お客様がお持ちの製品について、保証期間経過後の修理について不問な場合は、当社までお問い合わせください。