


家庭用光脱毛器 belulu® ~ClearVeil mini~ 使用说明书

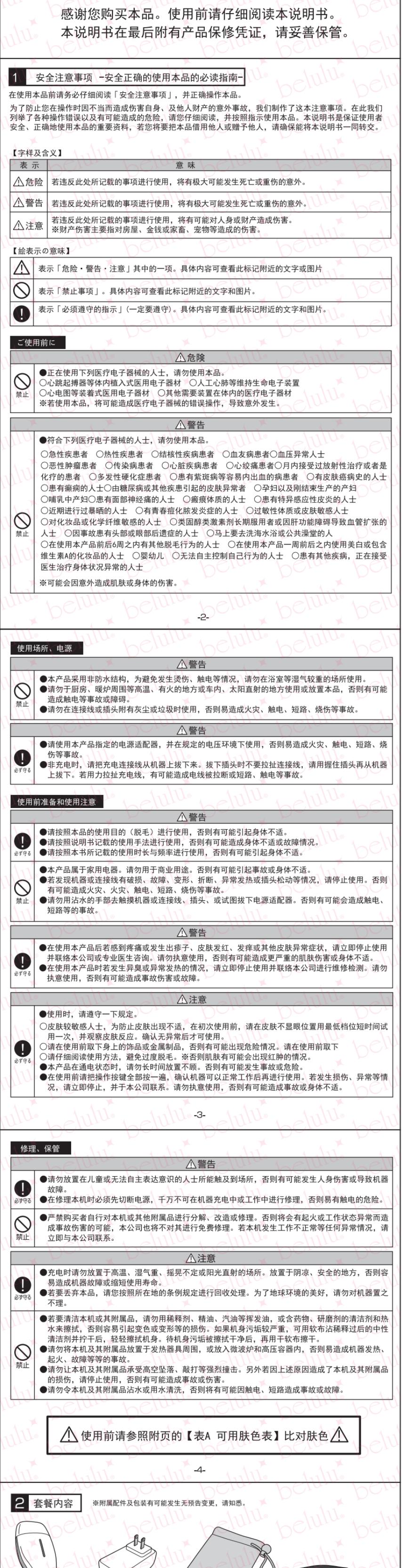

感谢您购买本品。使用前请仔细阅读本说明书。

本说明书在最后附有产品保修凭证，请妥善保管。

1 安全注意事项—安全正确的使用本品的必读指南

在使用本品前请仔细阅读「安全注意事项」，并正确操作本品。

为了防止因操作错误及不当可能造成的伤害，我们仔细阅读了产品说明，并按照说明使用本品。本说明书是保证使用者安全、正确地使用本品的重要资料，若您将本品借给他人或赠予他人，请确保能将本说明书一同移交。

【字样及含义】

表1	△ 危险	意味
	△ 警告	若违反此处所记载的事项进行使用，将有极大可能发生死亡或重伤的意外。
	△ 注意	若违反此处所记载的事项进行使用，将有可能对人身或财产造成伤害。

【△表示的意味】

△	表示「危险・警告・注意」其中的一项。具体内容可查看此标记附近的文字或图片。
○	表示「禁止事项」。具体内容可查看此标记附近的文字和图片。

【△使用前】

△ 危险	●正在使用下列医疗电子器械的人士，请勿使用本品。 ○心脏起搏器等体内植入式器械 ○使用电子器械 ○人工心脏等维持生命医疗电子器械 ※若使用本品，可能造成医疗电子器械的错误操作，导致意外发生。
------	---

△ 警告	●符合下列医疗电子器械的人士，请勿使用本品。 ○急性疾患者 ○热疮性疾患者 ○结核性疾病患者 ○心血管病患者 ○血压异常人士 ○恶性肿瘤患者 ○心脏病患者 ○心脏疾病患者 ○心绞痛患者 ○通过受放疗治疗或者是在化疗的患者 ○多发性硬化症患者 ○患有斑斑病恶化的患者 ○患有癌恶化的患者 ○哺乳妇女 ○面部有面部疼痛的人士 ○瘢痕体质的人士 ○患有特异敏感性皮炎的人士 ○对化妆品或化学物质过敏的人士 ○有痤疮恶化发炎的患者 ○对化妆品或化学物质过敏的人士 ○因事故造成头部或眼部受伤者 ○马上要进行手术或治疗的人士 ○患有其他疾病，正在接受医生治疗身体状况异常的人士 ○婴幼儿 ○无法自己控制自己行为的人士 ○患有其他疾病，正在接受医生治疗身体状况异常的人士 ※可能会因意外造成肌肤或身体的伤害。
------	---

-2-

【使用场所、电源】

△ 警告	●本产品采用防水结构，为避免发生烫伤、触电等情况，请勿在浴室等湿气较重的场所使用。 ●请勿在潮湿、暖炉或靠近高温、有火的物体或车内、太阳直射的地方使用或放置本品，否则可能造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。 ●请勿在连接电线插头附近有灰尘或垃圾时使用，否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。
------	---

【△使用前准备和使用注意】

△ 警告	●请按说明书的指示电源线进行使用，否则有可能引起身体不适。 ●请勿在连接电线插头附近有灰尘或垃圾时使用，否则可能引起身体不适。
------	--

【△注意】

△ 注意	●使用前，请遵守一下规定。 ○皮肤对敏感人士，为避免皮肤出现不适，在初次使用前，请在皮肤不显眼位置用低档位短时间试用一次，若有不适反应，请勿继续使用。 ○请仔细阅读本品的使用方法，避免误用脱毛膏，否则可能造成皮肤情况。请立即停止使用。 ●本产品在通电状态时，若长时间放置机器，可能会造成火灾、触电、短路、故障、异常发热或插座松动等情况，请停止使用并联系本公司进行维修检测。请勿执意使用，否则有可能造成事故或故障。
------	---

-3-

【△修理、保管】

△ 警告	●请勿置放在儿童或无法自主表达意识的人士所能触及到场所，否则有可能发生人身伤害或导致机器故障。 ●在修理本机时必须先切断电源，千万不可在机器充电或工作中进行修理，否则易造成触电的危险。 ●严禁损坏机器的对本机或其他附属品进行分解、改造、修理、拆卸、敲打等强烈撞击。否则将会有起火或任何异常情况，造成火灾、触电、短路、故障、异常发热或插座松动等情况。
------	--

【△注意】

△ 注意	●充电时请勿放置于高湿、气温高、摇晃剧烈或阳光直射的场所，放置于阴凉、安全的地方，否则容易造成机器故障或缩短使用寿命。 ●若要丢弃本品，请勿将其丢弃在垃圾桶内，以免造成环境污染。请勿将机器置之不理。
------	--

△ 使用前请参照附页的【表A 可用肤色表】比对肤色 △

-4-

【2 套内容】

●更换灯头时，请务必切断电源，拔下电线。

【3 通电方法】

●将电源插头直接接到机身的电源线接口。 ●并将AC适配器连接到家用的电源插座。 ●正确连接后，红色LED状态指示灯会自动亮起。此时仅是连接状态。脱毛机并未开启。
--

-5-

【4 按键操作】

本机可以通过背上的按键对所有设定进行操作。

【电源的接入】

●长按电源按钮2秒以上，则开启电源。 ●连接电源线后红色亮起，则使用。若长时间未使用，则会自动熄灭。再次使用时，长按电源按钮2秒以上即可。
--

-6-

【5 进行脱毛】

●进行脱毛之前的准备

●照射时机器会发出强烈的光。请佩戴防护眼镜。强光只有一瞬间，请注意这时不要直视机器。 ●将面部剃净并保持干燥，保持干燥。 ●使用本款脱毛机进行脱毛操作时，建议毛的长度为2~3mm。如果汗毛过长请将其剪短至2~3mm。若汗毛过长请将其剪至2~3mm。
--

-7-

【6 脱毛结束后】

●脱毛后的皮肤状态较敏感，请用冰毛巾进行冷却，并用化妆水或乳液等进行保湿。

【7 灯头的更换】

●本品可通过更换灯头实现更多功能，顾客可根据自身需要自行选购其他功能的灯头。
--

【8 祛痘・抗衰老护理】

●照射时机器会发出强烈的光。请佩戴防护眼镜。强光只有一瞬间，请注意这时不要直视机器。
--

-8-

【9 常见的问题和故障自检】

●是否准确地接入电源？ ●请检查是否由于接线方法错误或接触不良等问题导致机器不通电。请参考『通电方法』的说明，正确连接好电源。
--

-9-

【常见问题】

Q: 使用时为什么不用涂抹凝胶？ A: 如果使用面部胶，面部胶被机器的强光照射后有可能发生化学反应，或导致热量过高，引起面部红肿，或导致面部不适。
--

-10-

【Q: 怀孕中可以使用吗？

A: 怀孕中不可以使用。由于人体在怀孕时，体内荷尔蒙会有不稳定的现象，导致肌肤较为敏感。因此在使用时，有可能引起肌肤状况。请务必与专业医生咨询，根据自身皮肤状况进行选择。(脱毛机对母体和胎儿均无影响和损害。) 请安心使用。

-11-

【Q: 用了以后感觉不到什么效果...】

A: 脱毛效果的表现程度，会因汗毛体质和浓密程度而导致每个人有所不同。请依照附页的『表A 可用肤色表』对照自己的肤色，选择适合的灯头。

-12-

【Q: 不适合我的皮肤怎么办？】

A: 可能属于个人原因，购买时请向本公司进行退货退款。※因为属于个人原因，回来后由顾客承担。
--

-13-

【Q: 可以每次都用吗？】

A: 脱毛效果只对生长长期的毛发有效，对还没长出的毛发和停止生长的毛发无效。请依照附页的『表A 可用肤色表』对照自己的肤色，选择适合的灯头。
--

-14-

【Q: 不适合我的皮肤怎么办？】

A: 可能属于个人原因，购买时请向本公司进行退货退款。※因为属于个人原因，回来后由顾客承担。
--

-15-

【Q: 适合我吗？】

A: 适合所有肤质，但不适合敏感性肌肤。请依照附页的『表A 可用肤色表』对照自己的肤色，选择适合的灯头。

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1"