


家庭用光脱毛器

belulu® ~ClearVeil mini~

美・ル・ル クリアベール mini

取扱説明書

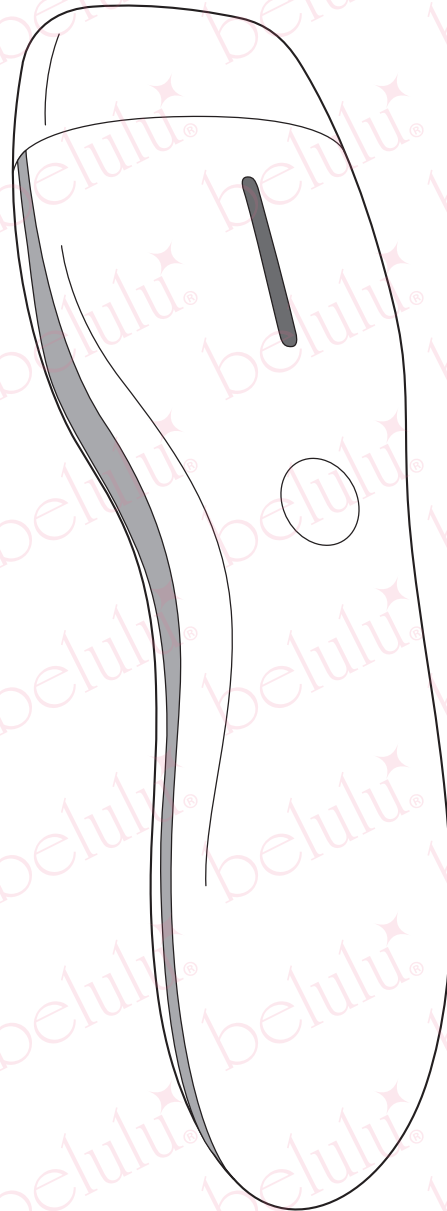

この度は、本製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので
大切に保管してください。

1 安全上のご注意 -正しくお使いいただくために-

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の方への危害や財産等への損害を未然に防止するものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずよく読み、指示に従ってください。取扱説明書は、本製品を安全に正しくお使いいただくために必要です。本製品を人に貸す、または差し上げる場合は、必ず本書を一緒にお渡しください。

【表示と意味】

表示	意味
 危険	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
 警告	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

【絵表示の意味】

	「危険・警告・注意」を表します。具体的な注意内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。
	「禁止事項」を表します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。
	「行為の強制・指示」(必ず行うこと)を表しています。具体的な指示内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。

ご使用前に

⚠ 危険	
	●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、本製品を使用しないでください。 ○ペースメーカー等の体内植込式医療用電子機器 ○人工肺等の生命維持用医療電子機器 ○心電図等の装着型医療電子機器 ○その他、体内の装着している医療用電子機器 ※医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。
⚠ 警告	
	●下記に当てはまる方は、本製品のご使用をお避けください。 ○急性疾患がある方 ○有熱性疾患がある方 ○結核性疾患の方 ○血友病疾患の方 ○血圧異常の方 ○悪性腫瘍がある方 ○伝染病疾患の方 ○心臓疾患の方 ○狭心症の方 ○3ヵ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方 ○多発性硬化症の方 ○紫斑病など内出血しやすい方 ○皮膚ガン病歴がある方 ○てんかんをお持ちの方 ○糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方 ○妊娠中・妊娠直後の方 ○授乳中の方 ○顔面神経痛をお持ちの方 ○ケロイド体質の方 ○アトピー性皮膚炎の方 ○過度の日焼けをしている方 ○ニキビが化膿し炎症を起こしている方 ○アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ○化粧品や化学繊維等がかぶれた経験がある方 ○ステロイド系ホルモン剤の長期服用や肝機能障害で毛細血管の拡張を起こしている方 ○事故等により頭部や眼科的後遺症がある方 ○海水浴や大衆浴場へ行く前の方 ○本品を使用する前後6週間以内に他の脱毛を行う、または行った方 ○本品を使用する前後1週間以内に美白化粧品やビタミンAが含まれた化粧品等を使用する、またはされた方 ○乳幼児 ○自分の意思で動いたり、意思表示ができない方 ○その他、医師の治療を受けている時や療養中、身体に異常がある場合 ※事故や肌、身体に異常が起きるおそれがあります。

ご使用場所・電源

⚠ 警告



禁止

- 本製品は防水仕様ではありません。浴室など水がかかりやすい場所での使用や充電はしないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 台所やストーブなど火気、高温の近くや車内、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでください。事故や感電、故障のおそれがあります。
- コードやプラグにホコリやゴミが付着したまま使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。

⚠ 警告



必ず守る

- 使用電圧、ケーブルなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。守らないと火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。
- 使用中以外や保管する際は、コードを本体及びコンセントから抜いてください。プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグ本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張りますと、断線やショート、感電のおそれがあります。

準備及びご使用時

⚠ 警告



必ず守る

- 必ず本製品の使用目的(体及び体の脱毛・ケア)に沿ってご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 説明書で定められた手順で操作してください。事故や体調不良、故障を起こすおそれがあります。
- 使用時間や使用頻度は本書の指示に従ってください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。



禁止

- 防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所では使用しないでください。
- 本製品は家庭用機器です。業務目的でのご使用はしないでください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 本体やコードの破損、故障、変形、断線など不具合がある場合や異常に発熱する場合、コンセントやプラグへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。
- 濡れた手で本体やコード、プラグを触ったり、コンセントを抜き差ししないでください。感電やショート、事故のおそれがあります。

⚠ 警告



必ず守る

- 本製品を使用し、痛みや不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ等皮膚症状が現れた場合やその他皮膚に異常を感じた時は直ちにご使用を中止し、当社にご連絡いただくか専門医にご相談ください。守らないと肌トラブルや体調不良を起こすおそれがあります。
- 本製品のご使用中に異臭や異常発熱した時は直ちに使用を中止し、点検のため当社にご連絡ください。守らないと事故や故障、ケガのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- ご使用時は、以下の事項をお守りください。
- 初めて使用される方や肌が敏感な方は、目立たない部分で使用時間を短くしたり、出力レベルを低く設定するなど様子を見ながら使用してください。守らないと肌トラブルや事故のおそれがあります。
- 身に着けている貴金属類にフラッシュが当たりますと危険です。ご使用時は、貴金属類は外してください。
- 脱毛箇所への過度のご使用はお避けください。※守らないと腫れたり、赤みがでる場合があります。
- 本製品に通電させたまま長時間放置しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。
- 使用前に操作ボタンをすべて操作し、本体が正常に作動するか確認を行ってください。万一、損傷、異常等がある場合は使用せず、弊社へご連絡ください。守らないと、事故や体調不良を起こすおそれがあります。

お手入れ・保管

⚠ 警告



必ず守る

- 乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所に保管してください。守らないと事故やケガ、故障のおそれがあります。
- 本体のお手入れをする際は必ず電源を切り、充電中や稼働中は行わないでください。守らないと感電などの事故のおそれがあります。



禁止

- 本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不具合につきましては、必ず当社へご連絡ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 充電や保管は高温多湿、振動、直射日光の当たる場所を避け、涼しくて安全な場所で行ってください。守らないと事故や故障の他、製品の劣化を早めます。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の条例に従い処分してください。地球環境のため、放置はしないでください。



禁止

- 本体や付属品を洗浄する際は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯を使用しないでください。変色、変質や傷がつくおそれがあります。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸してよく絞り、やさしく汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕上げてください。
- 本体や付属品を熱器具に近付けたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発火、故障等の原因になります。
- 本体や付属品を高い所から落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。また、上記が原因で本体や付属品が損傷した場合は使用しないでください。ケガや故障のおそれがあります。
- 本製品や付属品を水につけたり、水洗いしないでください。感電やショート、事故、故障のおそれがあります。

⚠ 別紙の【表A 使用可能な肌色表】をご参照ください ⚠


本品は、ムダ毛やムダ毛の元になる毛根など色素が濃い部分に熱ダメージを与えて脱毛します。
下記の表で肌の色が濃褐色・黒褐色に該当する方は、やけどの危険があるため、本品の脱毛機能をご使用いただけません。

【表A】	OK	OK	OK	OK	要注意 発光レベルを低く 設定してください	使用不可 やけどの危険が あります
肌の色	明るい肌色	やや明るい肌色	淡黄白色 標準的な色	小麦色 茶褐色	褐色	濃褐色 黒褐色


※本品の使用が可能な肌の方でも、シミやホクロが多い場合はご使用いただけない場合がございます。

2 セット内容・名称


※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

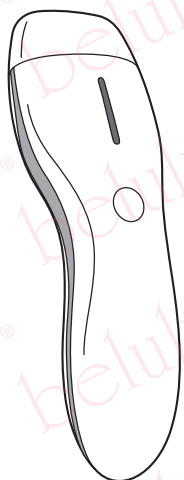

脱毛器本体

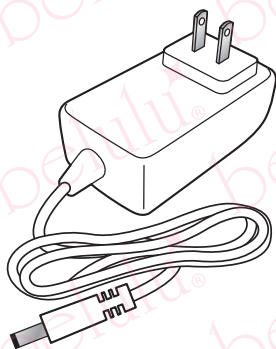


電源コード

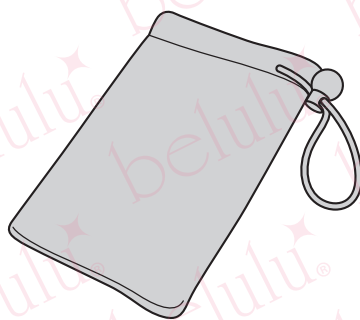


ポーチ




保護メガネ

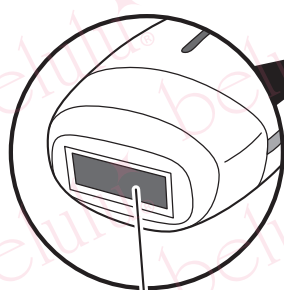

照射口及び
肌センサー

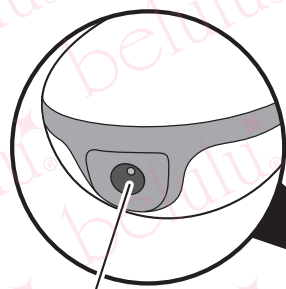

コード差込口

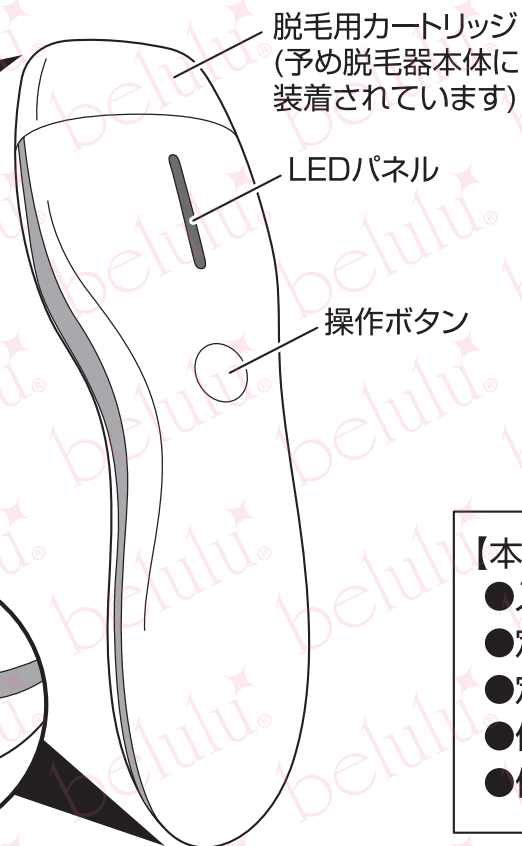

脱毛用カートリッジ
(予め脱毛器本体に
装着されています)

LEDパネル

操作ボタン


【本体仕様】

- 入力電力:35W
- 定格電圧:100V～240V
- 定格周波数:50Hz/60Hz
- 保存温度:0～45℃
- 使用温度:5～35℃

★別売りで「美肌ケア」「アンチエイジングケア」の
カートリッジを販売しております。

3 通電方法


- 電源コードのプラグを脱毛器本体下部のコード差込口に差し込みます。
 - ACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
 - 正しく通電されると、LEDパネルに赤色LEDが点滅します。
- ※通電だけしている状態です。電源は入っていません。

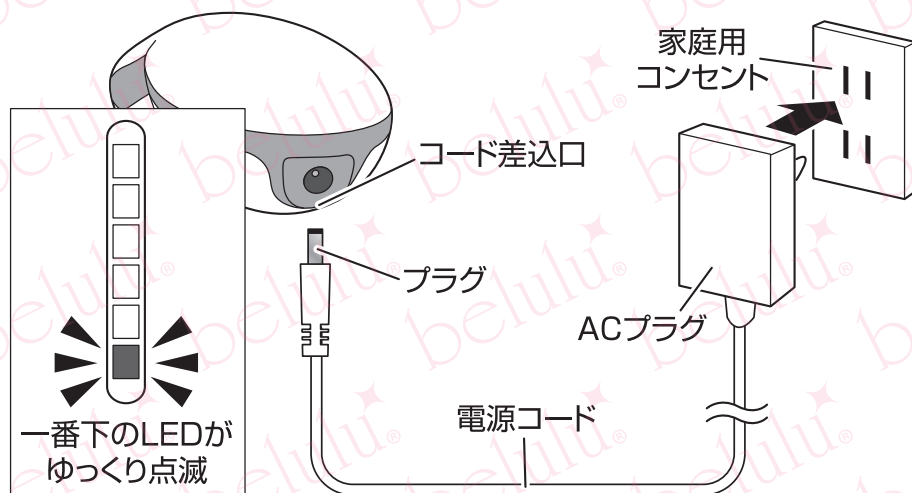

4 ボタン操作

全ての操作を、本体背面の「操作ボタン」でおこないます。

電源を入れる

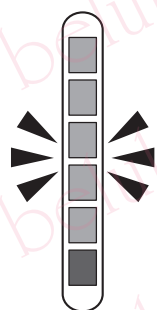

- 操作ボタンを2秒以上長押しするとファンが稼働します。
- 赤色LEDの点滅が止まり、下から2番目～6番目に青色LEDが点滅します。



- 数回の点滅の後、青色LEDの点灯で照射レベルが表示されます。最初はレベル1に設定されています。

照射レベルを設定する

操作ボタンを押すごとに、下図のように強さレベルが変わります。

レベル1



レベル2



レベル3



レベル4



レベル5



レベル2



レベル3



レベル4



■カートリッジを装着していない状態で通電したり、電源を入れたりしないでください。■

5 脱毛を行う

脱毛を行う前の準備


- フラッシュ照射時は強い光が出ます。保護メガネを装着してください。光は一瞬ですが、なるべく直視しないようにご注意ください。
- 照射箇所を清潔にし、よく乾かしておいてください。
- 脱毛を行う際の毛の長さは、2～3mmを推奨しております。
毛が長い場合はシェーバー等で長さを整え、短い場合は2～3mm程度まで伸ばしてください。
- ※ワックスや毛抜き、電気針、脱毛剤等は使用しないでください。
- ジェルや化粧水等は塗らないでください。
- ほくろが多い場合や濃いシミがある場合は、絆創膏等でカバーしてください。色素が濃い部分に熱が集中し、やけどを起こすおそれがあります。

肌検知を行う

本製品は安全装置により、機器が肌を検知していない状態ではフラッシュを照射できません。




- 照射口を肌にしっかりを当てます。
- 肌が正しく検知されると、LEDパネルの赤色LEDが緑色に変わります。
- この状態になるとフラッシュを照射することができます。

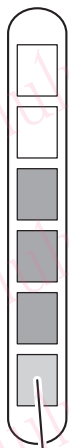

赤色LEDが
緑色に
変わります

照射口は肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。照射口の一部が肌に当たっていないかったり、斜めになっていると、肌検知ができません。

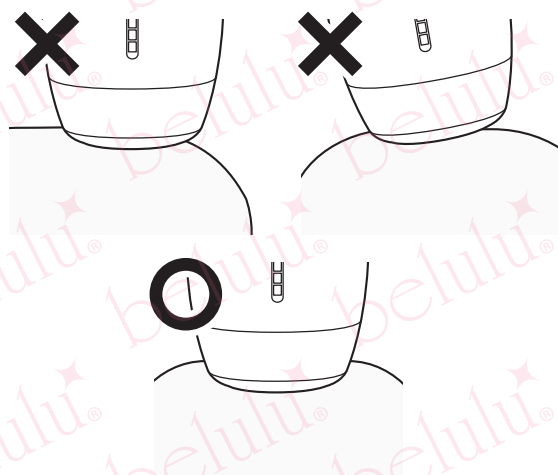

フラッシュ照射を行う

フラッシュ照射時は強い光が出ます。保護メガネを装着してください。光は一瞬ですが、なるべく直視しないようにご注意ください。



- 肌検知が完了した状態のまま、操作ボタンを1回押します。
- フラッシュが照射され、脱毛が行われます。
- フラッシュ照射後はカートリッジ内冷却モードが自動で稼働するため、数秒ほど操作ができなくなります。(赤色LEDが点滅します。)
- 別紙の【表B】を参照しながら、続けて照射を行ってください。
- 肌検知後に本体を動かしてしまいますと、肌検知状態が解除されフラッシュ照射ができなくなります。肌検知からフラッシュ照射までは本体を動かさないようご注意ください。
- 照射後、熱さが続く場合は、クーリングパック等で冷却してください。


■別紙に詳しい照射周期が記載されておりますので、ご参照ください。■

【表B】


肌の色 照射箇所	明るい肌色	やや明るい肌色	淡黄白色 標準的な色	小麦色 茶褐色	褐色	濃褐色 黒褐色
脇	レベル3～5 3～4回照射	レベル3～4 3～4回照射	レベル3～4 3～4回照射	レベル2～3 3～4回照射	レベル1～2 2～3回照射	使用不可
腕	レベル3～5 2回照射	レベル3～4 2～3回照射	レベル2～3 2～3回照射	レベル2～3 2～3回照射	レベル1～2 2～3回照射	使用不可
脚	レベル3～5 2～3回照射	レベル3～4 2～3回照射	レベル2～3 2～3回照射	レベル2～3 2～3回照射	レベル1～2 2～3回照射	使用不可
口周り	レベル3～5 2～3回照射	レベル3～4 2～3回照射	レベル2～2 2～3回照射	レベル2～2 2～3回照射	レベル1～2 2～3回照射	使用不可
顔	レベル3～5 3～4回照射	レベル3～4 3～4回照射	レベル2～3 2～3回照射	レベル2～3 2～3回照射	レベル1～2 2～3回照射	使用不可

※表Bに記載の照射回数は目安です。
刺激に敏感な方や、痛み・熱さを強く感じる場合は、
照射レベルを下げたり照射回数を減らしてください。

効果的に脱毛を行うには、毛が生え変わる周期に合わせた施術が必要になります。

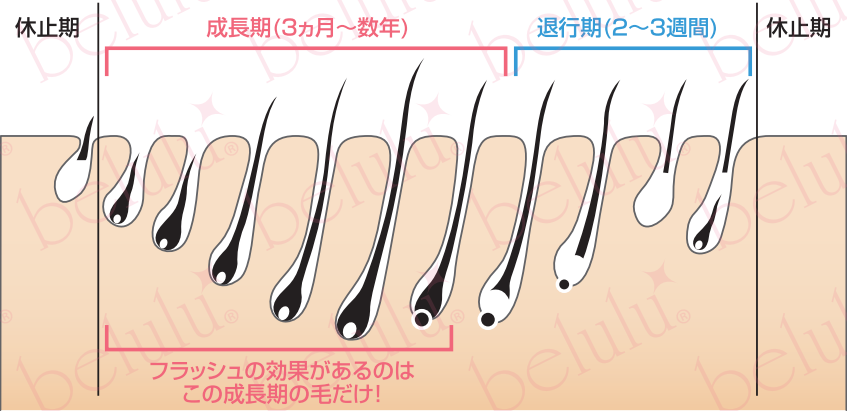

毛には、毛根が活動停止して毛が生えない状態の「休止期」、毛根が細胞分裂して毛が伸びる「成長期」、成長が止まり自然に毛が抜ける「退行期」があり、これらが混在しています。
フラッシュが効果を発揮するのは毛根が活発になっている成長期の毛のみ。
1度目の照射で今生えている毛は抜け落ちますが、しばらくすると休止期を終えた毛が伸びてきます。このタイミングで2度目の照射を行い、さらに退行期→休止期を経た毛が伸びてきたタイミングで3度目の照射を行う、といった感じで定期的にフラッシュ照射を行うことで、徐々に毛が生えにくくなっていきます。

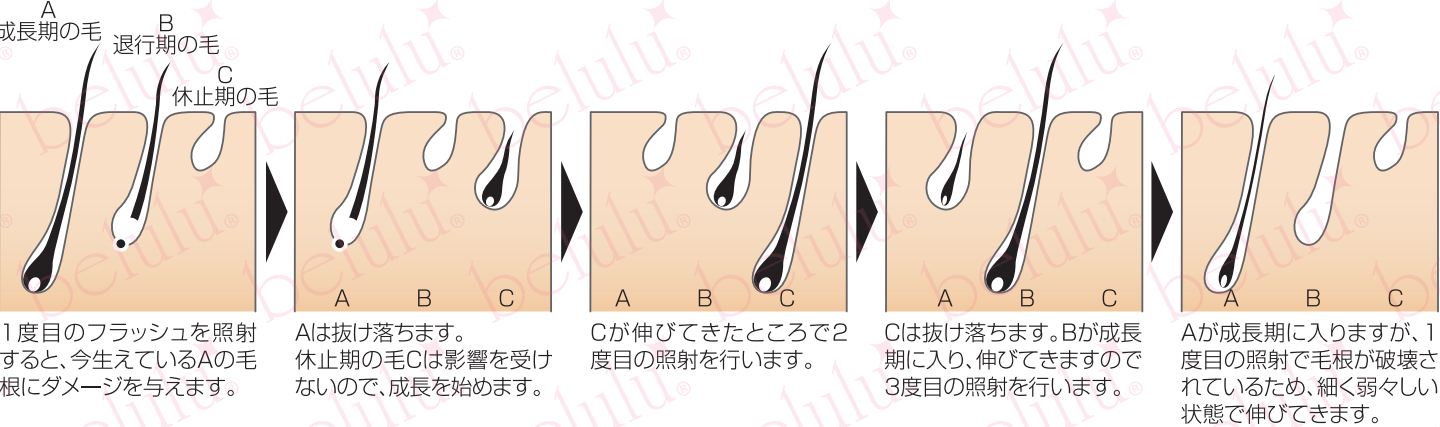

開始から5回目までは2～3週間に1度、6回目以降は4～6週間に一度の照射が目安です。
毛の周期は場所や人により異なりますので、毛が伸びてきたと感じたら照射してください。

6 脱毛が終わったら

お肌

- 脱毛後の肌は、非常にデリケートな状態になっています。クーリングパック等で冷却し、化粧水やクリーム等で保湿を行ってください。
- 脱毛後に外出する場合は、必ずSPF30++以上の日焼け止めを塗ってください。


脱毛器本体

- 操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグを抜いてください。
- 本体や照射口はウェットティッシュや硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。
※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
※ベンジン、シンナー等の溶剤類は使用しないでください。
- 清潔を保つため、箱等に入れゴミやホコリがつかないように保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。


7 カートリッジの付け替え

ご希望のお手入れに合わせて、カートリッジを付け替えることができます。

必ず電源を切り、コードを抜いた状態で行ってください。

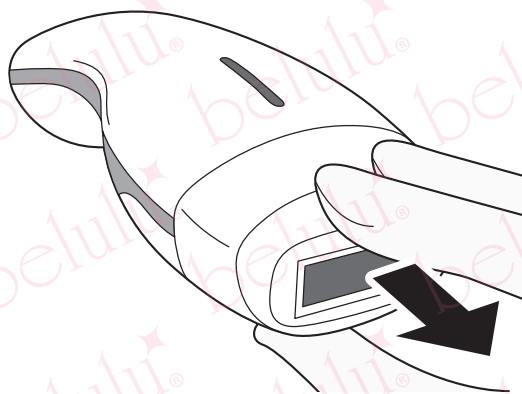


カートリッジの上下を持って引っ張ると、カートリッジが外れます。

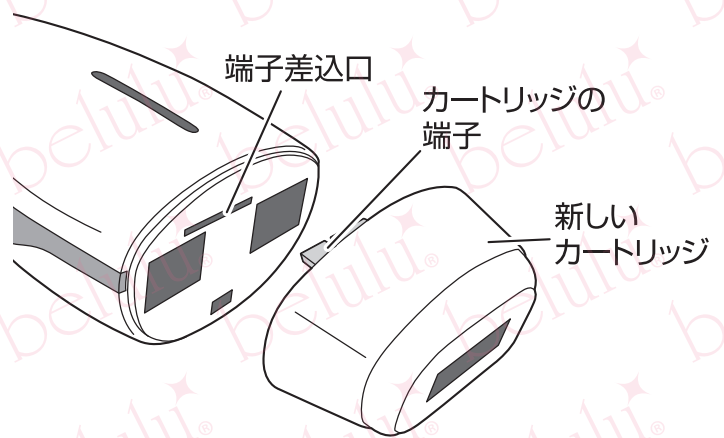

新しいカートリッジを用意し、向きを確認して本体に装着します。
カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。

カートリッジの種類は、カートリッジ裏側に貼っているバーコードシールのアルファベットで見分けることができます。

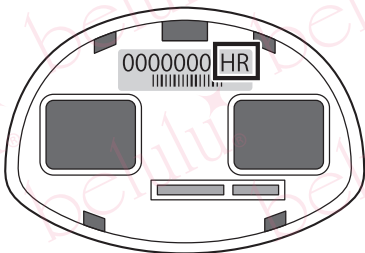

【HR】脱毛用
フラッシュ光で毛根に熱ダメージを与えて効果的に脱毛。

【AC】ニキビケア用
ニキビの炎症を抑える他、ニキビがでにくい肌に整えます。

(別売り)

【SR】アンチエイジングケア用
肌を活性化し、気になる年齢肌に直接アプローチします。

(別売り)

8 ニキビケア・アンチエイジングケア

※脱毛とは一日以上間隔を空けてください。

フラッシュ照射時は強い光が出ます。保護メガネを装着してください。
光は一瞬ですが、なるべく直視しないようにご注意ください。



- ニキビケア用またはアンチエイジング用カートリッジを装着し、コードをつないで電源をONにします。
- 【ボタン操作】を参照し、レベルを設定します。
- 【脱毛を行う】を参照し、カートリッジの照射口をニキビまたは年齢が気になる部分に当てて肌検知を行います。
鏡を見ながら行うことを推奨しております。

危険ですので、
目の周辺には照射しないでください。



- 肌検知が完了した状態のまま、操作ボタンを1回押します。
- フラッシュが照射され、ニキビケア及びアンチエイジングケアが行われます。
- フラッシュ照射後はカートリッジ内冷却モードが自動で稼働するため、数秒ほど操作ができなくなります。(赤色LEDが点滅します。)
- ケアする場所をずらし、続けて照射を行ってください。
- 肌検知後に本体を動かしてしまいますと、安全装置が稼働しフラッシュ照射ができなくなります。肌検知後からフラッシュ照射までは本体を動かさないようにご注意ください。
- 照射後、熱が続く場合は、クーリングパック等で冷却してください。

ケアが終わったら

お肌

- ビタミンCが含まれたパック等で冷却し、化粧水やクリームで保湿を行ってください。
- ケア後に外出する場合は、必ずSPF30++以上の日焼け止めを塗ってください。

脱毛器本体

- 操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグを抜いてください。
- 本体や照射口はウェットティッシュや硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。
※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
※ベンジン、シンナー等の溶剤類は使用しないでください。
- 清潔を保つため、箱等に入れゴミやホコリがつかないように保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

9 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

通電しない 電源が入らない	●電源コードは正しく接続されていますか? コードのつなぎ方が間違っていたり、接続が不十分ですと通電できませんので電源が入りません。 【通電方法】を参照し、正しく接続してください。 ●カートリッジはしっかり装着されていますか? カートリッジが装着されていなかったり、カートリッジの差し込みが不十分ですと安全装置が稼働し、電源が入りません。 カートリッジを「カチッ」と音がして隙間がなくなるまでしっかり装着してください。 ●操作ボタンを長押ししていますか? 操作ボタンを軽く押しただけでは電源は入りません。 2秒以上長押ししてください。 【解決しない場合は】 ケーブルの断線、もしくは本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
肌検知ができない	●肌の色が別紙の【表A】の「濃褐色」「黒褐色」に該当していませんか? 【表A】で肌の色が濃褐色や黒褐色に該当する場合はやけど防止の観点から使用できないため肌検知できません。 ●カートリッジが照射口が肌にしっかり当たっていますか? 照射口の一部が肌に当たっていないかったり、斜めになっていると、肌検知ができません。 肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。 【解決しない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
フラッシュが照射 されない	●フラッシュ照射口が肌にしっかり当たっていますか? 照射口の一部が肌に当たっていないかったり、斜めになっていると、安全装置が稼働しフラッシュ照射ができません。 肌検知をした状態のまま本体を動かさずに操作ボタンを押してください。 ●残りショット数が無くなっている可能性があります。 カートリッジの残りショット数が少なくなると内側に変色が起こります。 新しいカートリッジと交換してください。 (変色が起こっても品質には影響はありません。) 【動作確認しても作動していない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
使用を続けていると照射できなくなったりボタン操作がしにくくなる	●少し時間をおいてゆっくり操作してください。 本品は、照射直後やランプ点滅中はボタン操作を行なう事ができなくなります。 また、照射を続けていると熱が蓄積されることにより一時的に安全装置が作動し照射が行えなくなることがあります。(いずれも故障ではありません) 少し時間をおいたり、ボタンを押す間隔を空ける等、ゆっくり操作してください。 【動作確認しても作動していない場合は】 本体の故障が考えられますので、当店へご連絡ください。

よくあるお問い合わせ

Q. フラッシュ照射時にジェル等が必要ないのはなぜですか？

A. フラッシュ光は肌に悪影響がなく、高い肌ケア効果がありますので、ジェル等は必要ありません。
ただし、肌を守るために脱毛後のアフターケア(クールダウンや保湿)はしっかりと行ってください。

Q. 妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか？

A. 妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモンバランスが不安定でお肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては稀に肌トラブルが起こる場合がございます。
必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおすすめしております。
(脱毛器の機能が母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。)

Q. 子供にも使えますか？

A. 中学生以下のお子様を使用する場合は、以下をご了承の上、目立たない場所でパッチテストを行い、一番弱いレベル設定で保護者の監視の下でお使いいただきますようお願い致します。

- 二次成長期は毛も著しく成長しているため、処理を行ってもすぐに毛が再生します。
- フラッシュ式脱毛は毛の黒い色素に反応し処理をする仕組みですが、色素が薄く細いお子様の毛にはあまり効果が無い可能性がございます。
- 二次成長中はホルモンバランスが不安定な為、肌荒れなどを起こす場合がございます。
- お子様は大人と比べて肌が薄く弱いため、肌トラブルを起こす場合がございます。

ホルモンバランスや毛の成長が安定する高校生以上からのご使用を推奨しております。

Q. 使っても効果がまったく感じられないのですが…

A. 効果の現れ方には、毛の質や濃さ等により個人差があります。
また、本機はあくまでご家庭でお使いいただくことを前提に作られており、安全のためエステと比べると出力が低めの設定になっております。
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行うことで徐々に効果が出てきます。

Q. 毎日照射してはダメですか？

A. フラッシュ脱毛は生えている毛には効果がありますが、成長途中や休止期の毛には効果がないため、毎日照射しても意味はありません。
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行ってください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2-66 満利屋ビル5F
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu ClearVeil mini
■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書

によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。