

belulu[®] for Acne

美・ル・ル for アクネ

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いておりますので大切に保管してください。



ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は、LEDライトを長時間直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が生じた場合は、直ちに本体の電源を切り、誤使用を中止してください。
- 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置しないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品の使用を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください。該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、すぐに3Dヘッドを肌から離してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 使用しない時は電源ケーブルを本体・家庭用コンセントから抜いてください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。
- ペンジン、シンナー、アルコール等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様ご自身の修理等をされた際の怪我・故障・破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記に当てはまる方は、ご使用をお避けください。〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 伝染病疾患 ●心臓疾患 医療用電子機器を使用されている方(ペースメーカーなどの体内埋込式衣装電子機器、人工肺などの生命維持用電子機器、心電図などの装置型医療電子機器) ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中・授乳中の方 皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌に敏感な方) ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 特に体調がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分(首の中央) ●頭髮、粘膜などのデリケートゾーン


美・ル・ル for アクネ 機能紹介

ニキビに効果的な青色LEDだけを搭載した ニキビケア専用美顔器

★こんなにある! 青色LEDの嬉しい・効果★

- *アクネ菌を殺菌
- *アクネ菌が排出し、大量の活性酸素を生み出す「ポルフィリン」という毒素を無毒化
- *皮脂腺からの過剰な皮脂分泌を抑制
- *毛穴の収縮
- *炎症性ニキビの沈静化
- *ニキビがでにくい肌を整える
- *ニキビ痕の改善・皮膚表面再生

ニキビが治るだけでなく、再発しにくくなります。
使い続けてニキビレスを目指しましょう!

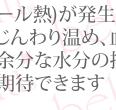

じんわりあったかRF温熱(ラジオ波)搭載

★ラジオ波とは★



特殊な微弱電流を流し、電磁波で肌の分子を振動させます。
これにより分子同士の摩擦熱(ジュール熱)が発生、温熱効果が生まれます。
お肌を内側から広範囲にわたってじんわり温め、血行を促進。
肌細胞を活性化させたり、老廃物・余分な水分の排出をスムーズにします。
むくみや肌荒れなどの改善効果が期待できます

ニキビや肌荒れが気になる時に! いつでも手軽に自宅ケア♪

青色LEDとRF温熱は同時に稼動します。
単体でのご使用はできません。ご了承ください。

-1-

製品仕様

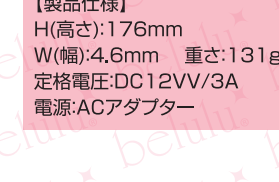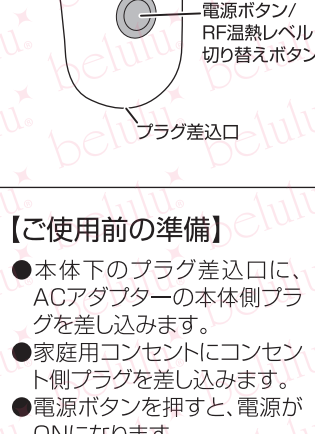

【製品仕様】
H(高さ):176mm
W(幅):4.6mm 重さ:131g
定格電圧:DC12VV/3A
電源:ACアダプター

【ご使用前の準備】

- 本体下のプラグ差込口に、ACアダプターの本体側プラグを差し込みます。
- 家庭用コンセントにコンセント側プラグを差し込みます。
- 電源ボタンを押すと、電源がONになります。





ニキビは毛穴に皮脂が詰まった状態から始まり、黒ニキビ→赤ニキビ→黄色ニキビと悪化していきます。
なるべく黒ニキビや赤ニキビのうちにケアを行いましょう。
早く対処すればするほど治りも早く、綺麗になります。




-2-

操作方法

- 電源ボタンを押すと電源がONになり、青色LEDが点灯します。
- 同時にRF温熱(ラジオ波)も稼動します。
- 電源ボタンを押すごとにRF温熱(ラジオ波)の温熱レベルが上がります。4段階のレベルからお好みのレベルに設定してください。
- RF温熱の温熱レベルが4の状態電源ボタンを押すと、電源がOFFになります。
- 温熱レベルを下げたい場合は、一度電源をOFFにしてから再度設定してください。

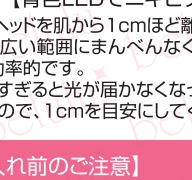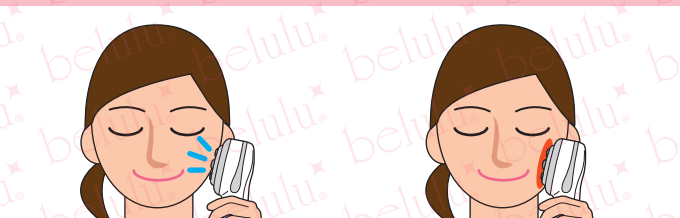

【青色LEDでニキビケア】
3Dヘッドを肌から1cmほど離します。
肌の広い範囲にまんべんなく光が当たり、効率的です。
離しすぎると光が届かなくなってしまいますので、1cmを目安にしてください。

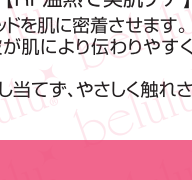

【RF温熱で美肌ケア】
3Dヘッドを肌に密着させます。
電磁波が肌により伝わりやすくなり、強く押し当てず、やさしく触れさせましょう。

【お手入れ前のご注意】

- 普段通り洗顔してタオルで水気をしっかり拭き取ります。
- RF温熱ケアを行う場合は、潤滑剤として美容液や美容ジェルを塗ってください。(LEDケアのみの場合は、塗らなくても構いません。)
- 光エッセ中は目を閉じてください。LEDライトを長時間直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか当社へご連絡ください。

-3-

RF温熱(ラジオ波)のお手入れ手順

フェイスケア

片側2分
反対側2分
計4分



パーツケア

目元2分
口元2分
首元2分
計6分



気になる部分は重点的にケアするなど、お肌の状態や悩みに合わせて手順をアレンジしてください。
青色LEDは毎日、RF温熱(ラジオ波)は週3日を目安にお手入れしてください。

お手入れが終わったら

- 美容液や美容ジェルが肌に残っている場合は、手でやさしくなじませます。
- いつもの保湿のお手入れを行ってください。
- 3Dヘッドについて美容液や美容ジェルをきれいに拭き取り、消毒用アルコールを付けたやわらかい布やウェットティッシュなどで拭いて清潔にしてください。
- シンナー・ペンジン等の溶剤類は使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリが多い場所を避けて保管してください。また、お子様の手が届かないようご注意ください。

-4-

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から、上記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

【保証書】 ※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。	
■品番:	■品名:belulu for Acne
■修理保証期間:到着日から1年間	
■お客様住所:	
■ご住所:	
■受注番号:	
販売店:株式会社ビューティフルエンジェル	
販売日付:	年 月 日 印

〈修理規定〉 1.取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合には、修理対応致します。 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。 3.次のような場合には、保証期間内でも有料になります。 a.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b.お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。 c.火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d.本書に提示がない場合。 e.本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。	【修理費用について】 ●商品到着後1ヶ月以内(初期不良)の場合 ...無償修理・交換させていただきます。 その際の送料は弊社が負担致します。 ●商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以内の場合 ...修理代無料で使用させていただきます。 その際の送料は弊社が負担致します。 ●商品到着後、使用回数に関わらず3ヶ月以上の場合 ...修理代・往復送料をお客様負担にて対応させていただきます。 尚、商品の返品は、到着後7日以内のものに限りです。
---	---

保証期間中の修理などアフターサービスについて
ご不明な点がございましたら、
下記までお問い合わせください。
固定電話:0120-09-5121
携帯・スマートフォン:050-4560-1423
E-mail:shop@kireido.com
〒221-0801 神奈川県横浜市中区神大寺2-29-25
謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

-5-