


この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

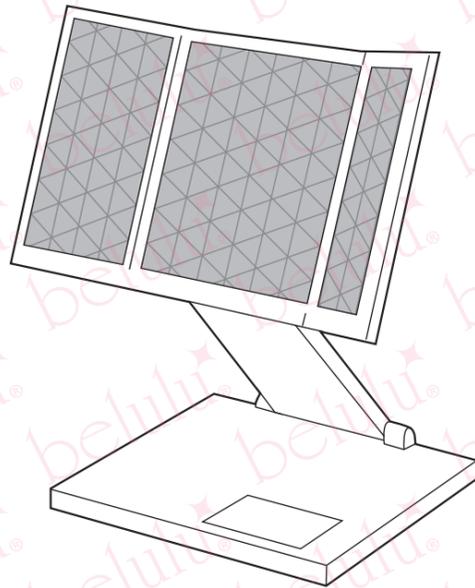

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は保護メガネを着用し、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを長時間直射しますと、目を傷めるおそれがあります。
- 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ACアダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本製品のご使用を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本製品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- 本製品のご使用時や保管時は、水平で安定した場所に置いてください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 本体の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。また、ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 皮膚ガン病歴がある方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方) ●特に健康がすぐれない方

〈下記の部位には使用しないでください〉


- 悪性腫瘍 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●粘膜などのデリケートゾーン

美・ル・ルヒカリ 機能紹介

420個の高光度LEDによる光エステでパーフェクト美肌!
三面鏡のようにになっているので、顔の側面など隅々までまんべんなくケアできます。

LEDライトのカラーと効果

基本のカラーは赤・青・黄色の3色。色ごとに波長が異なり肌に届く深さが違うため様々な効果をもたらします。

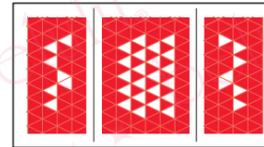


赤LED

ブライティングモード

ハリや弾力不足など年齢による肌トラブルが気になり始めた時に。


※赤LEDが点灯しない箇所は、不可視赤外線LEDとなります。故障ではありません。

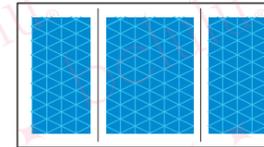

青LED

スムーズスキンモード


皮脂や乱れた生活リズムなどによる繰り返す思春期肌。

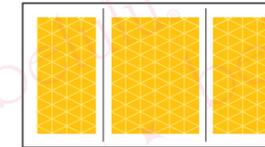

黄色LED

トーンアップモード

肌のくすみやシミなどによるお肌のトーンが気になり始めた時に。

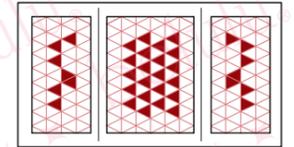

赤外線


赤外線モード

赤外線でお肌をあたため、肌本来の力をサポートします。


※赤外線機能は稼働時常に働いています。
※不可視光線となるので目には見えません。

さらに!!複数カラーの同時点灯も可能です!!


複数のケアが一度にできるから、忙しくてじっくりお手入れする時間がない方におすすめ!

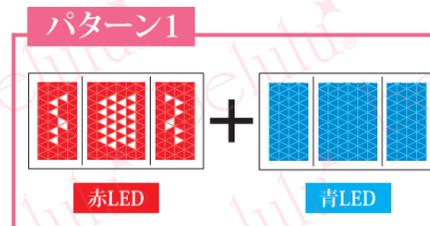


パターン1

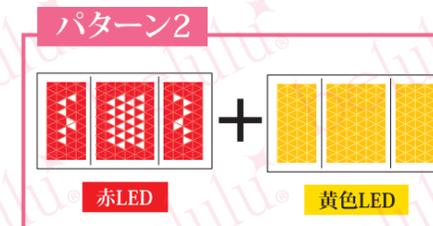

パターン2

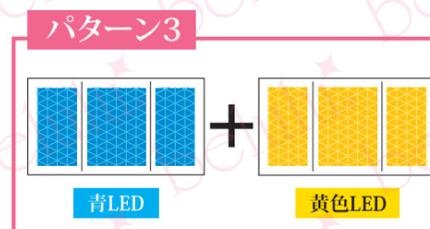

パターン3

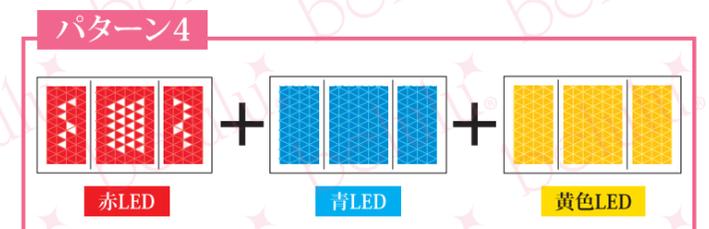

パターン4

悩みに合わせたお手軽コースモードを搭載

LEDライトのカラーが自動で変わる、お手軽コースモードを2種搭載しています。

【Aモード】

- 黄色→赤→青の順に照射されます。


【Bモード】

- 黄色→青の順に照射されます。

ご都合に合わせて照射時間の設定が可能

1分～60分の範囲内で、1分刻みで照射時間を設定することができます。

本体仕様

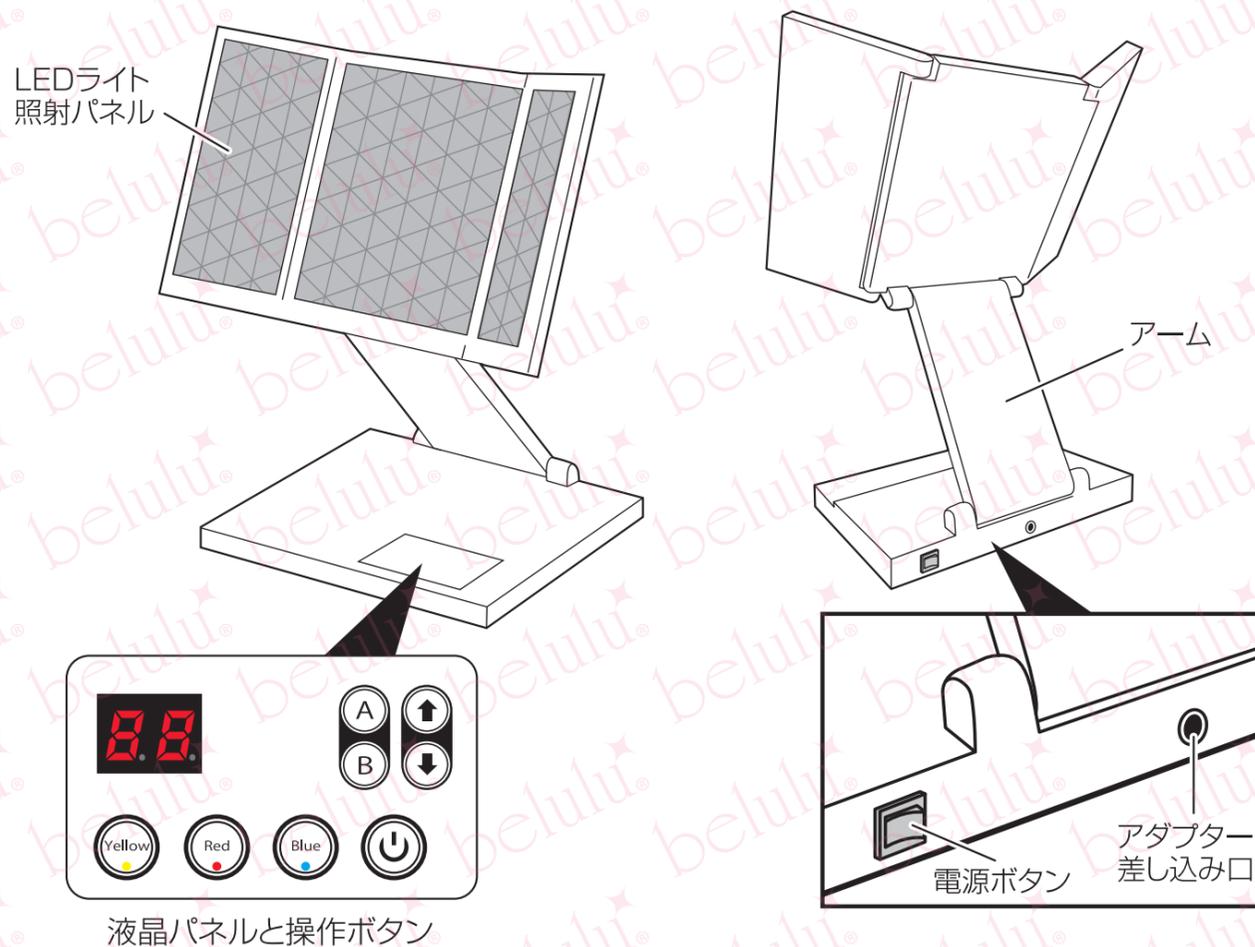

【セット内容】


- belulu Hikari本体
- 保護メガネ ●電源ケーブル
- 保証書付き取扱説明書(本書)

【製品仕様】


- 定格電圧: AC100-240V(50Hz/60Hz)
- 定格消費電力:36W
- 重量:約1.8kg
- サイズ: 縦21×横25×高さ7.5cm (折り畳み時)

【ご使用前の準備】

- 本体背面のアダプター差し込み口に、ACアダプターの本体側プラグを差し込みます。
- 家庭用コンセントにACアダプターのコンセント側プラグを差し込みます。
- 本体背面の電源ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り電源がONになります。

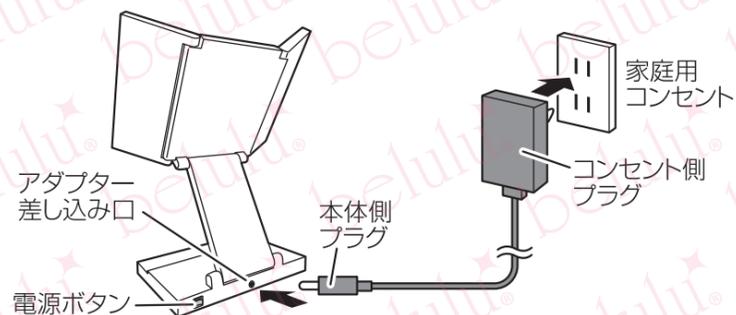


操作ボタンの説明

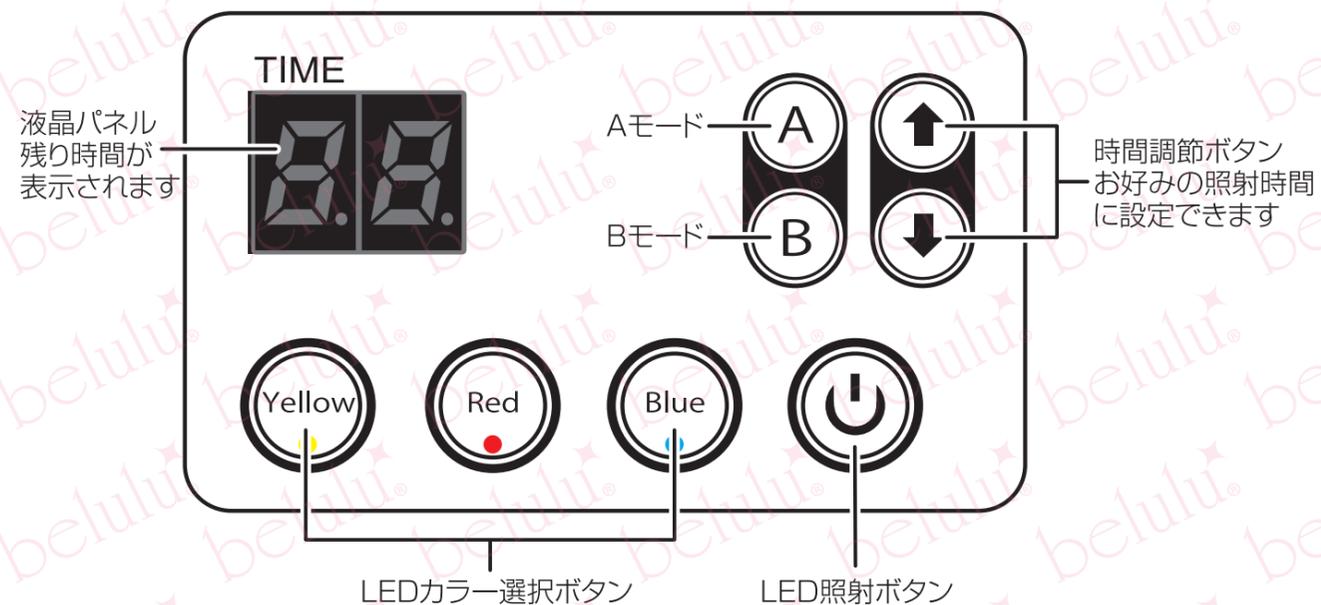

照射時のご注意

- 水平で安定した場所に本体を置いてください。
- LED照射パネルとアームをお好みの角度に調節してください。
- 顔の位置は、本体のセンターパネルに合わせてください。
- LED照射パネルから顔までの距離は、20cm～40cm程度空けてください。

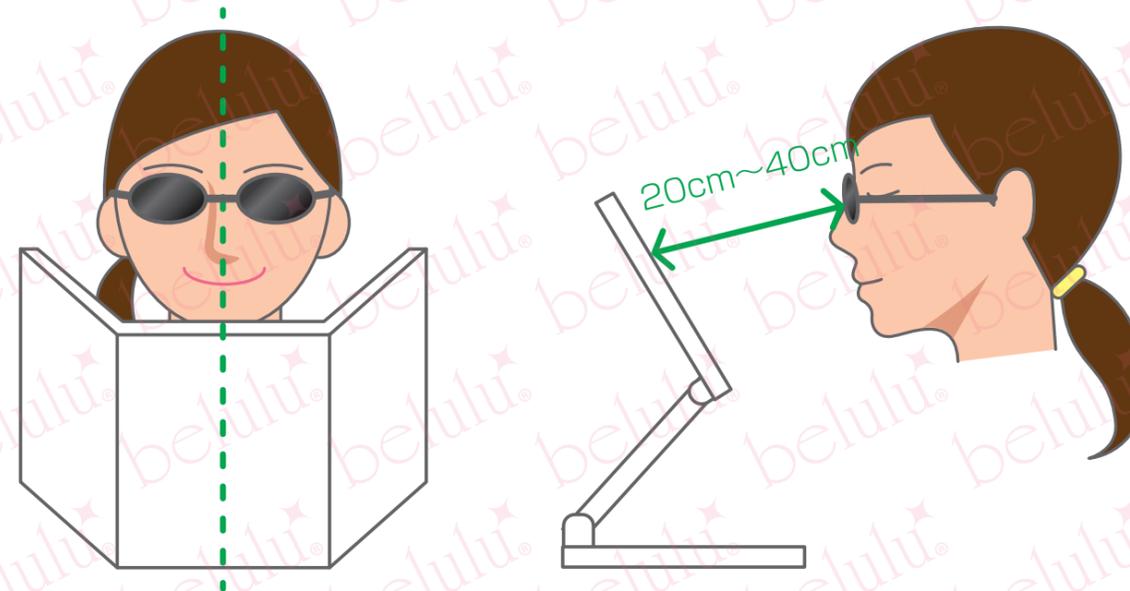

- 普段通り洗顔してタオルで水気をしっかり拭き取った後、化粧水や美容液を塗ってください。
- 光エステ中は保護メガネを着用し、目を閉じてください。LEDライトを長時間直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか当社へご連絡ください。

操作方法

基本の使い方

- ACアダプターを接続して電源をONにすると、「ピー」と音が鳴り、液晶パネルに「00」と表示が出ます。
- 単色照射の場合は、カラー選択ボタンの中から照射したい色のボタンを押します。この時、液晶パネルに残り時間20分を表す「20」が点滅します。
- LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、カウントダウンが始まります。(1分毎に音が鳴ります。)
- 残り時間が0になると、LEDが自動で消灯します。
- LED照射時にLED照射ボタンを押すことでもLEDが消灯します。

【赤色LEDを照射する場合】




カラー選択ボタンの中の赤色LEDのボタンを押します。

液晶パネルに残り時間(20分)が表示され、点滅します。

LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、カウントダウンが始まります。

【照射時間を変更する場合】

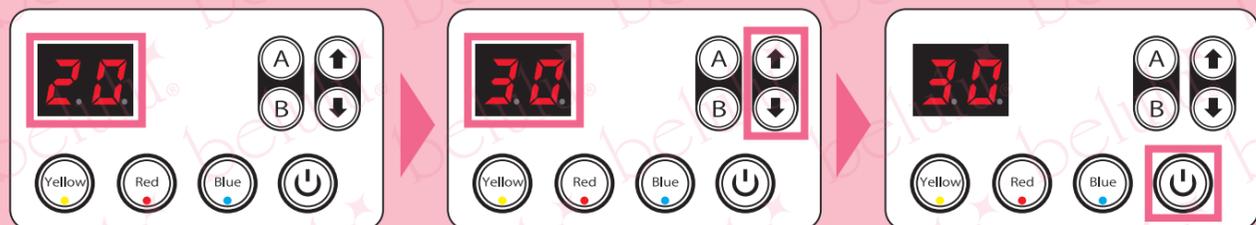

お好みのLEDカラーを選択し、液晶パネルに20分と表示されたことを確認します。

時間調節ボタンを押し、時間を設定します。(1～60分の範囲内で、1分刻みで設定可能)

時間の設定が完了したら、LED照射ボタンを押します。

【複数のカラーを同時照射する場合】



照射したいカラーのボタンを1回ずつ押します。

液晶パネルに残り時間(20分)が表示され、点滅します。時間設定も可能です。


LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、カウントダウンが始まります。

- LEDカラーを変更したい場合は、一度LED照射ボタン押してLEDを消灯し、再度設定してください。

お手軽コースモード

- ACアダプターを接続して電源をONにします。
- 行いたいケアモードのボタンを押します。この時、液晶パネルに残り時間が表示されます。
※モードによって時間が異なります。また、コースモードは照射時間が決まっているため、時間設定はできません。
- LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、一定時間経過するとLEDカラーが自動で切り替わります。
※カウントダウン中は、1分毎に音が鳴ります。
- 残り時間が0になると、LEDが自動で消灯します。
- LED照射時にLED照射ボタンを押すことでもLEDが消灯します。

【Aモード】(10分)

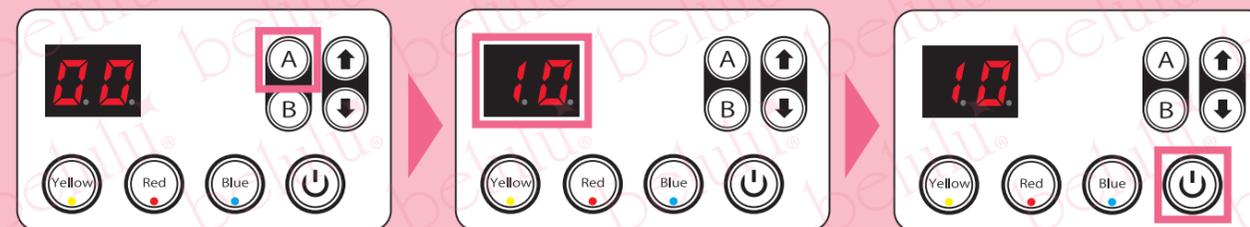

モード選択ボタン「A」を押します。

液晶パネルに残り時間(10分)が表示され、点滅します。時間設定はできません。

LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、カウントダウンが始まります。

●Aモードの流れ



【Bモード】(8分)




モード選択ボタン「B」を押します。

液晶パネルに残り時間(8分)が表示され、点滅します。時間設定はできません。

LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、カウントダウンが始まります。

●Bモードの流れ

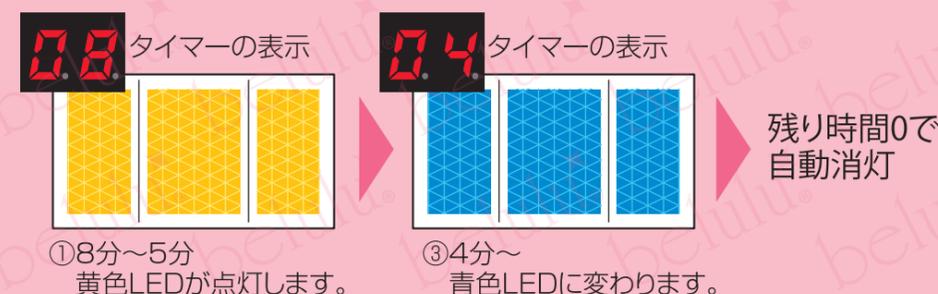

※各モードの残り時間やLEDカラーが切り替わる時間は、予告なく変更になる場合がございます。

美・ル・ル ヒカリは体にもご使用いただけます!




ヒップのたるみ、デコルテのザラつき、背中ニキビ等々・・・顔だけでなく体のお悩みにも、belulu Hikariでケアしましょう。

お手入れが終わったら

- クリーム等をたっぷり塗って、脂分を補いましょう。
- 本体背面の電源ボタンを押して電源を切り、ACアダプターを家庭用コンセントと本体から外してください。
- 汚れが気になる場合は、硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコールを浸み込ませたやわらかい布等でやさしく拭いてください。
※防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。
※ベンジン・シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- 本体を折りたたんでください。

【本体の折りたたみ方】

- LED照射パネルを奥に倒しながら、アームを手前に引き倒します。(図1)
- 3つ折になるように完全に折りたたみます。(図2)
- ホコリ防止の為、照射パネルに布等をかぶせておくことをおすすめします。

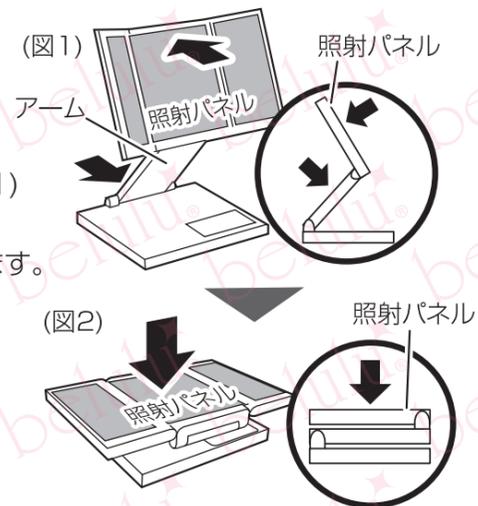

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

- ※ご使用回数に関わらずご購入から3か月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。
- ※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。
- ※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒232-0801
神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d. 本書の提示がない場合。
e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu hikari

■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。