

感谢您购买本品。使用前请仔细阅读本说明书。
本说明书在最后附有产品保修凭证，请妥善保管。



使用前请务必仔细阅读。

警告

- 请使用本品指定的电源适配器，并在规定的电压环境下使用。
- 在使用本品的过程中请务必佩戴遮光眼镜，请勿直视LED彩光灯。如果长时间直视彩光灯，很容易对眼睛造成伤害。
- 若本品发生破损、故障、变形或电源线损坏，请您停止使用。
- 若本品发生冒烟、异味或异常过热时，请您立即切断电源并停止使用。
- 请勿用力拉扯AC适配器的电源线。在双手潮湿时请勿触摸金属插头部分。
- 请勿在暖炉等高温场所使用或放置本品及电源适配器。
- 当双手湿润、有水气或沾灰的情况下，请勿使用本品。
- 本品不具备防水功能，请一定不要在浴室或湿气重的场所使用，否则会引起灼伤或触电，并有可能造成仪器故障。
- 若在使用后皮肤出现异常情况，请马上停止使用并咨询医生。
- 请仔细阅读下面的列表，符合情况的人群请勿使用本品。
- 请勿自行分解、改造本品，易对本品以及其配件造成故障甚至损坏，因自行拆解本品所造成的问题，本公司概不负责。

注意

- 在使用本品或保管放置时，请置于水平且稳定的地方。
- 请勿敲击、跌落本品，请勿遭受强烈撞击。
- 请勿用水清洗本品。若机身被弄脏，请用软布沾少许水，拧干后再进行擦拭。请勿使用油剂，稀释剂等化学溶剂进行擦拭。
- 因违反上述警告、注意事项或因自行拆解而造成的损伤、故障、破损等问题，本公司概不负责。

美・ル・ル ヒカリ 功能介绍

420个高光度LED美肤灯，塑造美丽肌肤！

LED美肤灯让肌肤更具活性化，打造最美丽肌肤。

其特有的三面环绕大面积照射，可涵盖侧脸，使每寸肌肤都得以精心呵护。

LED美肤灯的彩光和功效

基本彩光为红、蓝、黄三色，由于颜色不同其波长也不同，深入肌肤的程度也不同，因此可获得各种不同的功效。请根据自身的肌肤状况，选择对应的彩光。

红色LED

增加胶原蛋白，有效改善皱纹、松弛的年龄肌，可有效修复受紫外线损伤的肌肤，具有一定的抗衰老功效。

蓝色LED

可有效排出引发痤疮的活性氧，缓解生成的痤疮，对于易生成的痤疮肌肤可有效平整。

黄色LED

促进新陈代谢，使肌肤的血液循环正常化，有效改善暗疮、痘印、伤口等色素沉淀问题。

可实现多彩光同时照射

该运行模式为一次照射多功效的复合护理，推荐比较忙碌而又想获得较好功效的使用者使用。


模式1



模式2



模式3

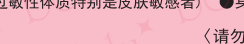

模式4



搭载2种程序运行模式，解决您的肌肤烦恼

LED彩光模式自动转换，解放双手，让美肤更轻松。

【抗衰老模式】

- 黄色→红色→蓝色，依次顺序照射。
- 除了可以缓解生成的痤疮之外，还能有效改善红血丝、血管扩张、色素沉淀等问题。

【祛痘模式】

- 黄色→蓝色，依次顺序照射。
- 对于肌肤粗糙·皱纹·松弛·毛孔粗大，因干燥引起的暗疮，都能有效改善。

可根据自身状况，设定照射时间

在5分～60分钟的范围内，以每一分钟为基准，进行照射时间的设定。

-2-

〈禁用人群〉


- 有皮肤癌病史人群 ● 皮肤疾病（特应性皮炎者、因过度日晒引起肌肤炎症者、痤疮化脓并引发炎症者、过敏体质特别是皮肤敏感者） ● 身体十分不健康者

〈请勿用于以下身体部位〉

- 恶性肿瘤处 ● 整形植入单晶硅片部位 ● 黏膜等敏感部位

机身图

〈正面〉

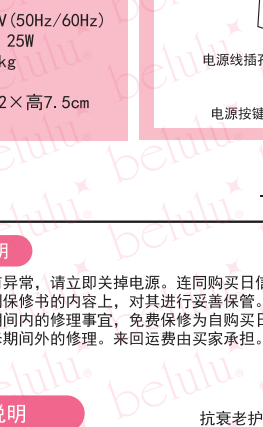

〈背面〉



【包装内容】

- belulu Hikari 机体
- 遮光眼镜 ● AC适配器
- 保修书及使用说明书

【产品规格】

- 额定电压：AC100～240V (50Hz/60Hz)
- 消费电力：25W
- 重量：1.4kg
- 尺寸：宽21×长32×高7.5cm

【使用前准备】

- 将电源线机身接口端插入机身后的电源线插孔。
- 将电源插头插入家用插座中。
- 按一下机身后的电源按键，在听到「哔」一声后，表示电源开启。




-3-

售后服务说明

- 在使用中若有异常，请立即关掉电源。连同购买日信息与我公司取得联系。
- 在确认好下列保修书的内容上，对其进行妥善保管。
- 对于在保修期内的修理事宜，免费保修为自购买日起三个月内，往返运费由卖家承担。
- 对于超过保修期外的修理。来回运费由买家承担。修理费用将视情况收取。

操作按键说明

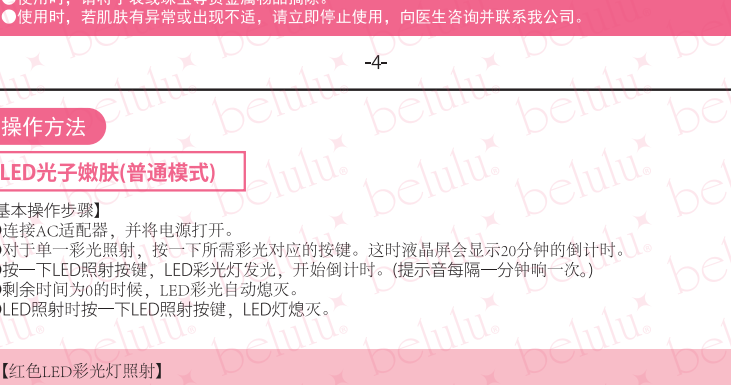

照射期间注意事项

- 请将美容仪器机身水平放置。
- 在光子嫩肤护理中，请佩戴遮光眼镜并闭上眼睛。如果长时间直视LED彩光灯，可能会对眼睛造成伤害。
- 使用时，请将手表或珠宝等贵金属物品摘除。
- 使用时，若肌肤有异常或出现不适，请立即停止使用，向医生咨询并联系我公司。

-4-


操作方法

LED光子嫩肤(普通模式)

【基本操作步骤】

- 连接AC适配器，并将电源打开。
- 对于单一带光照射，按一下所需彩光对应的按键。这时液晶屏会显示20分钟的倒计时。
- 按一下LED照射按键，LED彩光灯发光，开始倒计时。(提示音每隔一分钟响一次。)
- 剩余时间为0的时候，LED彩光自动熄灭。
- LED照射时按一下LED照射按键，LED灯熄灭。

【红色LED彩光灯照射】

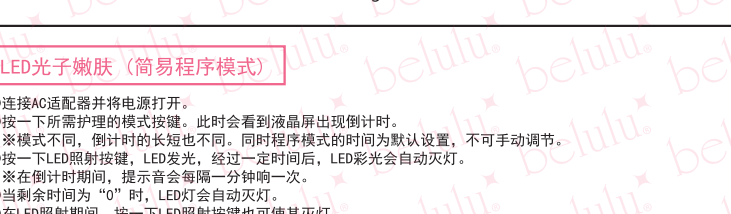

【照射时间的设定】



【多彩光同时照射】



- 如果需要变更LED彩光灯，请按一下LED照射按钮，待其熄灭后，再进行设定。

-5-


LED光子嫩肤(简易程序模式)

- 连接AC适配器并将电源打开。此时会看到液晶屏出现倒计时。
- 按一下所需护理的模式按键。并将产品模式和保修书的时间为默认设置，不可手动调节。
- 按一下LED照射按键，LED发光，经过一定时间后，LED彩光会自动熄灭。
- ※在倒计时期间，提示音会每隔一分钟响一次。
- 当剩余时间为“0”时，LED灯会自动熄灭。
- 在LED照射期间，按一下LED照射按键也可使其熄灭。


【抗衰老护理模式】（10分钟）




● 抗衰老护理模式流程

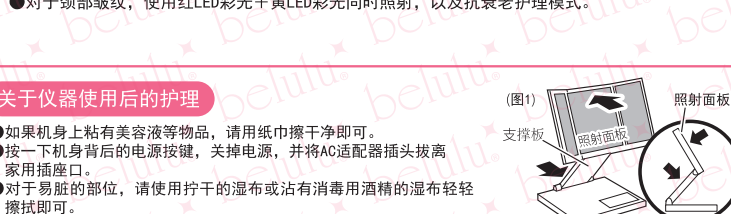

【祛痘护理模式】（8分钟）

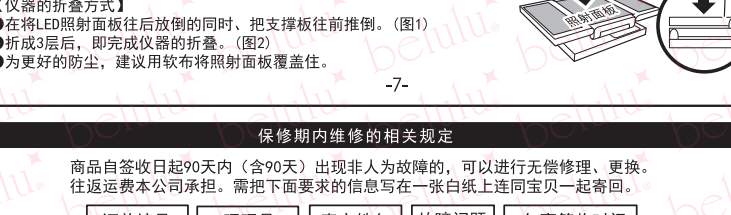


● 祛痘护理模式流程

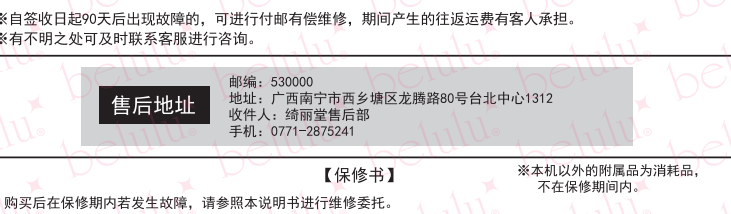

-6-

Belulu Hikari 同样适用于身体各部位

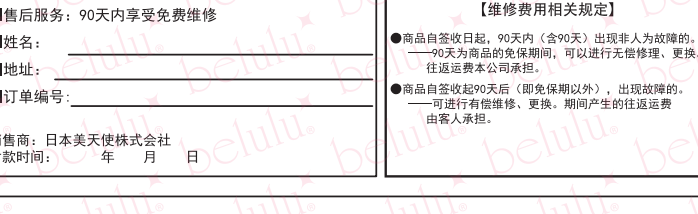

除了臀部的皱纹、颈部到胸部之间的粗糙面、背部的痤疮等等之外，还有脸部和各身体部位的肌肤问题。belulu hikari 对此都能有效改善。

示例：

- 对于背部的痤疮，使用蓝色彩光以及祛痘护理模式。
- 对于颈部皱纹，使用红LED彩光+黄LED彩光同时照射，以及抗衰老护理模式。

关于仪器使用后的护理

- 如果机身上粘有美容液等物品，请用纸巾擦干后即可。
- 按一下机身背后的电源按键，关掉电源，并将AC适配器插头拔离家用插座口。
- 对于易脏的部位，请使用拧干的湿布或沾有消毒用酒精的湿布轻轻擦拭即可。
- 本产品无防水功能，请勿直接用水清洗。
- ※请勿使用汽油、稀释剂等溶剂擦拭。
- 请将仪器折叠后妥善保管。

【仪器的折叠方式】

- 在将LED照射面板往后放倒的同时，把支撑板往前推倒。(图1)
- 折成3层后，即完成仪器的折叠。(图2)
- 为更好的防尘，建议用软布将照射面板覆盖住。

-7-

保修期内维修的相关规定

商品自签收日起90天内（含90天）出现非人为故障的，可以进行无偿修理、更换。往返运费本公司承担。需把下面要求的信息写在一在白纸上连同宝贝一起寄回。

订单编号 旺旺号 真实姓名 故障问题 包裹签收时间

保修期内的修理等售后服务，如有不明之处，可拨打下面售后电话进行咨询。

TEL：0771-2875241

※自签收日起90天后出现故障的，可进行付邮有偿维修，期间产生的往返运费有客人承担。

※有不明之处可及时联系客服进行咨询。

售后地址

邮编：530000
地址：广西南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心1312
收件人：绮丽堂售后部
手机：0771-2875241

【保修书】

购买后在保修期内若发生故障，请参照本说明书进行维修委托。

〈维修相关规定〉

- 按照说明书使用而产生故障的情况可以进行维修。
- 在保修期内，用户需保修时请填写本保修书，并将产品和保修书邮寄至本公司指定维修点进行免费维修。
- 属下列情况之一，在90天内的免费期间，恕不保修：
 - 因使用不当、自行修理和人为改造等引起的故障及损伤；
 - 购买后因移动、跌落及运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损伤；
 - 因火灾、地震、雷击等自然灾害、公害、异常电压等造成的故障和损伤；
 - 无法出示本保修书；
 - 保修书上未填写顾客姓名、购买的日期、或是有涂改的情况。

■型号： ■品名：belulu hikari

■售后服务：90天内享受免费维修

■姓名：_____

■地址：_____

■订单编号：_____

销售商：日本美天株式会社
付款时间：_____年____月____日

【维修费用相关规定】

- 商品自签收日起，90天内（含90天）出现非人为故障的。——90天为商品的免费期间，可以进行无偿修理、更换。往返运费本公司承担。
- 商品自签收起90天后（即免费期以外），出现故障的。——可进行有偿维修、更换。期间产生的往返运费由客人承担。