



使用说明书

感谢您购买本产品，使用本产品前请仔细阅读说明书。


同时，本说明书附保修内容，请妥善保管。

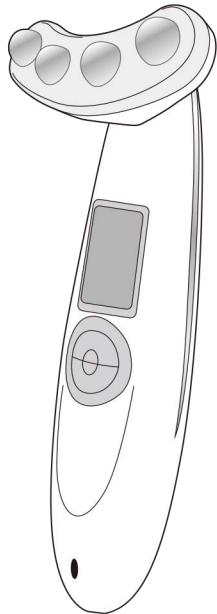

※下图仅供参考，请以收到实物为准。

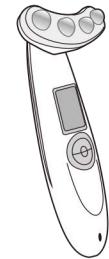

belulu Rebirth 本体

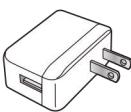

AC适配器



护眼罩



充电线

微电流导流条

LED灯

3D按摩头

液晶显示屏

操作按键

充电指示灯

充电口

【本机规格】

充电时间：4~8小时 输入电流：5V/0.5A
使用电池：锂电池
高：158mm
宽：63mm(含头部)
厚：35mm(含头部)
重量：107g

【USB适配器规格】

输入电流：100~240V 50/60Hz 0.2A
输出电流：5V/1A

- 警告**
- 使用电压，电源适配器等必须在本说明书指定条件下使用。
 - 使用本产品的过程中请勿直视LED灯，避免照射眼睛，否则有伤及眼睛的危险。
 - 如果本产品有破损、故障、变形、电源线断线等不良情况，请中止使用。
 - 若本产品发生冒烟，异臭或异常过热时，请您立即切断电源并停止使用。
 - 电源适配器的电源线电源的拉伸、潮湿的手请勿触碰插头。
 - 请勿在暖炉等高温场所附近放置本产品和电源适配器。
 - 请避免在手湿、潮湿环境和多灰尘的情况下使用本产品。
 - 本产品不支持防水。在浴室等多湿气的场所请勿使用，否则可能引起烧伤、触电故障。
 - 若在使用后皮肤出现异常情况，请马上停止使用并咨询医生。
 - 请仔细查阅下方的《禁用人群》列表，符合情况的人群请勿使用本品。
 - 请勿自行分解、改造本品，易对本品以及其配件造成故障甚至损坏。因自行拆解本品所造成的问题，恕本公司概不负责。

- 注意**
- 对于肌肤薄弱处请勿过度使用。
 - 使用过程中若出现疼痛，请立即将3D导头从肌肤上拿开。
 - 请勿摔落或敲击机身。
 - 充电时间为4~8小时，充电结束后请勿再充电。
 - 平时使用期间请将充电线拔离本机。
 - 本产品不可水洗，若有污渍，请用拧干的湿抹布轻轻擦拭。请勿使用挥发油、稀释剂等溶剂类液体擦拭。
 - 如未遵守以上的注意事项和警告，对产品进行错误的使用，拆分或改造等，最终造成故障，破损等，不属于保修范围内的，恕本公司概不负责。

〈禁用人群〉

- 急性病患者 ● 热性疾病患者 ● 血压异常 ● 传染病患者 ● 心脏病患者 ● 医用电子器材使用者（如心跳起搏器等体内植入式医用电子器材、人工肺机等维持生命电子装置、心电图等装着式医用电子器材）
- 有皮肤病史者 ● 由糖尿病及其他疾患引起的皮肤异常者 ● 孕妇 ● 哺乳期产妇 ● 问题性皮肤（如特应性皮肤炎晒伤引起的皮肤炎症、粉刺暗疮化脓发炎、因过敏性体质引

〈禁用部位〉

- 恶性肿瘤 ● 伤口 ● 骨头及关节上方 ● 接受整形手术而使用硅胶的部位 ● 声带部分 ● 头发、眼周、耳周及口腔黏膜等敏感部位

-2-

3 本机的充电

● 液晶显示屏的右下方为3格电量，电量为1格或0格时请充电。



剩余
75~100%



剩余
50~74%



剩余
25~49%



剩余
0~24%

※充电余量百分比仅供参考

● 购入后第一次使用或长期未使用，或电量较少的情况下请及时充电。

● 充电期间请确保机器处于关机状态。

● 请将充电线接口接入正确的插口中。

● 充电期间指示灯为红色常亮。

※充电期间机身可能会有正常的轻微发热现象，并非异常。


● 充电时间和运转时间根据产品的使用频率有所不同。

● 充电结束后充电指示灯为绿色常亮，在此之前请不要拔掉充电线。

■ 充电常温为15~30°C，在低温下充电会造成电池寿命缩短，请在适合温度下充电。在0°C以下进行充电会出现充电速度下降的情况。

■ 为保护内部电池的寿命，即使长期不使用也请一个月至少充一次电。

■ 若正常充电但是使用时间变短，则表示电池接近使用寿命。

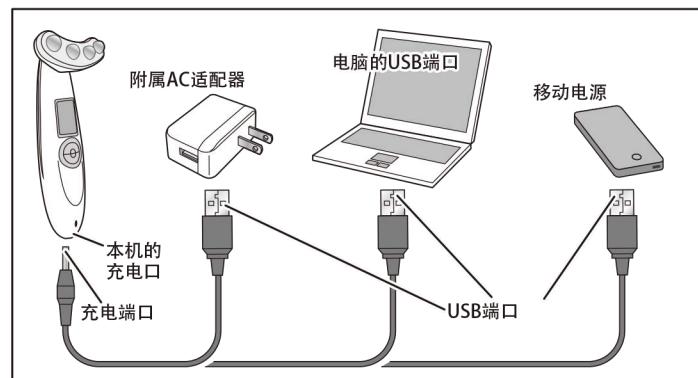


4 按钮操作

ON/OFF按钮

ON/OFF电源设定及EMS/RF温热模式。

- 按下ON/OFF按钮电源切到ON，液晶显示屏亮起蓝色灯显示各图标。
- 在此状态按下ON/OFF按钮，EMS/RF温热模式开始运作，（强度（弱））每次按下ON/OFF按钮强度增加。
- ※电源开启时如果不设定强度等级，EMS/RF温热模式不会自行启动。
- 在（强）的状态下按ON/OFF按钮，电源将切到OFF。若不能调低强度，请关闭电源后再次设定。

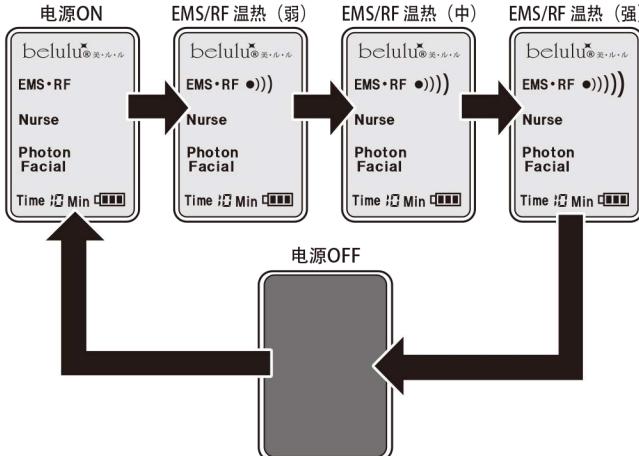

EMS/RF温热模式可搭配和光子嫩肤或震动按摩一起使用。
启光子嫩肤，请按 PHOTON按键。
具体的操作，请参考第6页【PHOTON按键】。


-5-

PHOTON按键

LED彩光和震动按摩的设定。



- 按下ON/OFF按钮开关，液晶显示屏亮屏，显示各个模式画面。
- 之后接PHOTON按键，模式依次为震动按摩（Nurse）、红灯模式、绿灯模式、蓝灯模式、三色依次闪烁。
- ※请勿长时间直视彩光灯。
- 在三色依次闪烁模式状态下按PHOTON按键，LED灯熄灭与液晶显示标识消失，仅剩蓝色亮屏。
- 如需改变灯光或模式，可通过PHOTON按键切换。

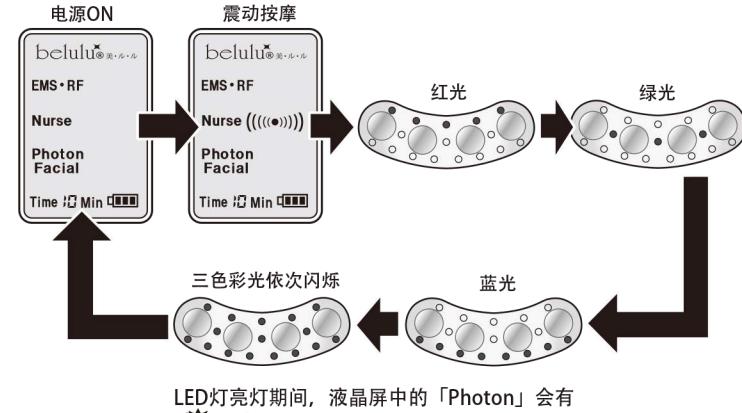

光子嫩肤功能与EMS/RF温热模式可同时使用。
EMS/RF温热模式可按ON/OFF按键启动。
更具体的操作，请参照第5页【ON/OFF按钮】的有关介绍。

-6-

5 使用前请注意

使用前请详细了解操作方法，做进行皮肤过敏测试。

操作方法

【EMS/RF温热模式】

- 1.请参照第5页【ON/OFF按钮】介绍的操作说明，设定EMS/RF温热模式。
 - 2.液晶显示屏上会显示RF/EMS模式的强度系数。
 - 3.在3D按摩头接触肌肤时，此模式会带来一定的刺激感，这是正常的反应。
- ※刺激感大小因人而异。

【震动按摩模式】

- 1.请参照第6页【PHOTON按钮】操作说明，设定震动按摩模式。
- 2.此功能启用后，液晶屏显示【Nurse】标识（如右图）。
- 3.启用震动模式时，会同时有声音与震动。

【光子嫩肤】

- 1.参照第6页【PHOTON按键】页面的操作模式，LED灯颜色转换顺序为：红色、绿色、蓝色、三色依次闪烁。
- 2.请注意LED灯是否亮灯。
- ※请勿长时间直视LED灯。
- 3.光子嫩肤模式下，液晶显示屏会出现相应【】标识。
- 4.使用光子嫩肤前请勿使用含感光成分的护肤霜，如维C、果酸、水杨酸、A醇、熊果苷等。

【电穿孔/无针美塑美容模式】

- 1.不会产生声音与震动。
- 2.刺激感大小因人而异。

皮肤过敏测试

- 用清水清洗手腕内侧，之后擦拭干净。
- 在手腕内侧涂抹美容液，并使用本仪器进行离子导入等所有功能的测试。
- 确定使用无异常后，在脸部进行美容按摩。万一皮肤出现异常过敏反应，请及时与医生或者本公司联系。

6 机能与功效

U字形按摩头充分贴合肌肤，有效改善眼部、嘴部肌肤松弛状况，拉伸紧致肌肤更有弹性。配合EMS/电穿孔/无针美塑美容模式效果使用更佳，让肌肤重焕新肌。

【EMS】每周三次

通过刺激肌肉产生脸部肌肉运动，锻炼表情肌，紧致法令纹，可达到瘦脸提升的效果，同时可以促进面部肌肤新陈代谢，增加胶原蛋白，恢复肌肤弹性。

※EMS与RF温热模式为同时进行。EMS无单一使用模式。

【RF温热】每周三次

通过高频微波数使得肌肤内部温度上升。在1MHz的微波下，能够有效地给肌肤升温，从而加快血液循环，促进肌肤细胞活性，排出肌肤废弃物。

※RF温热与EMS模式共同进行。RF温热无单一使用模式。

【震动美容模式】一周三次

通过震动软化皮肤，加快血液循环，促进细胞活性与新陈代谢，紧致肌肤，提升亮色。

【电穿孔深层导入模式】一周三次

电穿孔美容风靡日本美容界，无需打针注射即可将美容养分导入肌底。通过特殊电流可以将通常难以渗入至皮下部位的胶原蛋白、弹性蛋白、透明质酸等高分子导入至真皮层。渗透率远远超过普通美容仪。

※使用EMS/RF模式时，电穿孔导入模式会同步自动进行。电穿孔无单一使用模式。

【无针美塑模式】一周三次

与电穿孔深层导入模式相结合，能把溶脂美容液渗透至肌肤深层处。而使用普通的美容液无法达到溶脂瘦脸的效果。

※在开启EMS/RF模式时，无针美塑功能也会同时自动进行。无针美塑无单一使用模式。

【LED光子嫩肤】与导入同时进行或单独使用均可，每日最多20分钟。

不同的彩光颜色对应不同肌肤问题。

由于彩光颜色不同波长也不同，可深入肌肤不同维度，从而对肌肤产生美容效果。

可根据自身的肌肤状况来结合，选择合适的LED彩光模式。

注意：使用光子嫩肤前请勿使用含感光成分的护肤品，如维C、果酸、水杨酸、A醇、熊果苷等。

红色 LED

630nm波长。
可以增加胶原蛋白，改善年龄肌。修复被紫外线晒伤的皮肤，实现抗衰老护理。

绿色 LED

525nm波长。
促进新陈代谢，改善色斑暗沉，达到美白效果。

蓝色 LED

415nm波长。
可以控制引发粉刺暗疮的活性氧，抑制痘痘生长。

三色 闪烁

红绿蓝光依次闪烁。
全面护理肌肤，让肌肤焕发光泽透亮，省时省力。

组合模式选择

本产品的多模式功能可组合同步使用。

推荐希望短时间护理的用户使用。

EMS RF温热 + 震动按摩

EMS/RF温热的强度有L(弱)、M(中)、H(强)3档可选择。

EMS RF温热 + 光子嫩肤

EMS/RF温热的强度有L(弱)、M(中)、H(强)共3档可选择。

光子嫩肤有四种模式选择。

倒计时功能

开启电源后，液晶显示屏有时间显示，10分钟后会自动关闭电源，让您在合适的时间里可以放心使用。

选择好模式后，液晶显示屏右下方会出现10分钟标识，每过一分钟会倒计时。



-9-

-10-

以下使用步骤仅供参考，请结合自身肌肤状况使用。

- 卸妆后洗干净脸，把脸上多余水分擦干。
- 如果使用过量美容液的情况下，多余的美容液有可能会渗入到LED灯板缝隙中，为避免此情况发生，每次请少许适量使用美容液即可。
- 在脸部涂抹均匀美容液，涂抹方法参照以下步骤。

法令纹或脸部松弛对应

EMS/RF温热模式脸部护理

EMS RF温热



- ① 在脸部涂抹美容液或者化妆水。
※此时不需要使用乳液或者保湿霜。



在敷面膜的同时，使用本产品能达到更好的导入效果。



- ② 在ON/OFF按钮上选择EMS/RF模式。
选择合适的强度模式，敏感肌人群建议从弱到强模式递进。



- ③ 使用3D按摩头轻轻在肌肤上滑动。具体操作方法请参照第14页详细内容。

7 仪器的保管

请您务必遵守以下注意事项

- 本机器不防水，请勿放置在浴室或者水汽多的潮湿环境。
- 请勿将产品放置于暖炉等高温场所附近。
- 在使用光子嫩肤模式时，请勿裸眼直视LED彩光灯。
- 在使用本产品时，请尽量涂抹美容凝胶或化妆水使用，因为肌肤不够湿润情况下，3D按摩头可能会比较难以滑动。（光子嫩肤模式下可以不涂抹）。
- 本产品侧面会有微电流导条，请在使用时握好贴合。
- 3D按摩头轻轻贴合面部肌肤后，再慢慢滑动。
- 使用时请取下您的贵重金属首饰与手表。
- 使用本产品时，一旦觉得肌肤有异样感，请立即停止使用，并与医生或本公司取得联系。

【使用前准备】

- 美容液、美容凝胶或化妆水。
即高浓度的无添加美容成分，特别推荐附属的belulu专用美容液。
能有效渗入肌肤深层，进一步改善肌肤问题。

- 乳液和乳霜。
在日常护理完结束后使用。

皮肤干燥的对策


电穿孔深层导入/无针美塑模式
+震动按摩（nurse）来彻底保湿！



- ① 在脸部涂抹美容液或者化妆水。
※此时不需要使用乳液或者保湿霜。



在敷面膜的同时，使用本产品能达到更好的导入效果。

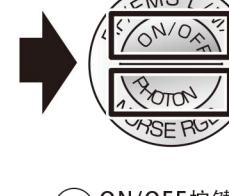

- ② ON/OFF按键设定EMS/RF温热模式，PHOTON按键设定震动美容模式。
EMS/RF模式的强度档位可选择。



- ③ 使用3D按摩头轻轻在肌肤上滑动。具体操作方法请参照第14页详细内容。

使用小建议




如果没有导入美容液或美容凝胶，可以使用化妆水+压缩面膜或含营养导入成分的贴片面膜。敷在脸上配合本仪器进行使用，令面膜效果更好。



- ① 在脸部涂抹美容液或者化妆水。
※此时不需要使用乳液或者保湿霜。



- ② ON/OFF按键设定EMS/RF温热模式，PHOTON按键设定震动按摩模式。EMS/RF模式的强度档位可选择。

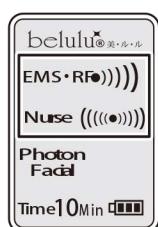

- ③ 使用3D按摩头轻轻在肌肤上滑动。具体操作方法请参照第14页详细内容。



-13-


- ④ 在EMS/RF模式与震动按摩结束后，按PHOTON按键开启绿色LED灯。将美容仪按摩头离开离肌肤一厘米处，照射在肌肤暗沉部位。

※此步骤需要摘除面膜。

【使用方法】

把脸区域划分成额头、鼻子、左脸颊、右脸颊、左脸颊、嘴巴左侧、嘴巴右侧等五大部分，用3D按摩头逐个区域按摩，嘴巴周围附近皮肤以及脸部容易干燥区域，请留意稍微延长按摩时间以便美容液能深入肌肤。

在使用本产品时，如若感到粗糙不滑腻时，需及时添加美容精华液、化妆水。

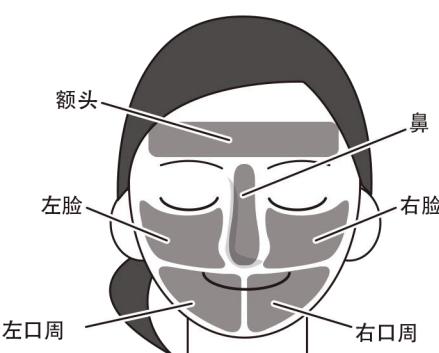

【区域停留时间】



以上操作仅供参考。具体情况请按自己实际进行。

由下到上、由里到外是基本的操作手法



以下颚或人中为起点，往脸颊方向向上推拿。



以鼻子一侧为起点，往太阳穴方向打圈推拿。



在鼻梁周围以及鼻梁上打圈推拿。




在额头部位上下左右循环打圈。

-14-


护理容易暴露年龄的锁骨部位



① 在锁骨部位充分涂抹美容护肤液体。

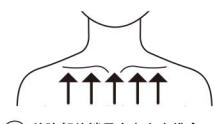

② 从胸部往锁骨方向向上推拿。

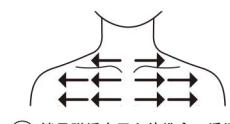

③ 锁骨附近由里向外推拿，缓缓向外按摩。


提拉紧致胸部



① 在胸部充分涂抹美容护肤品，从下往上逐渐推拿。



② 后背的肉以及副乳往内推拿。

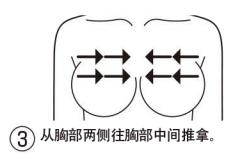


③ 从胸部两侧往胸部中间推拿。

塑造光润臀部



① 在臀部涂抹护肤品，使用本产品由下往上推拿。

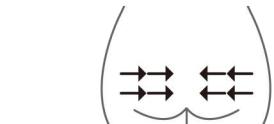

② 由外向里推拿。

9 常见问题

无法开机	<p>●是否无法充电？ 锂电池具有自然放电的特性。 使用前请先充电1小时左右，再按ON/OFF按钮开机。</p> <p>【问题仍未解决】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。</p>
无法充电或充电不稳定	<p>●正确连接充电线了吗？ 充电线插入地方不同，插入不足将无法通电，不能进行充电。请参照第4页【本机的充电】后，确认有无插错地方及是否插好插孔。</p> <p>【问题仍未解决】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。</p>
EMS/RF温热无法启动	<p>●请确认使用动作。 EMS/RF温热模式是没有震动的，并且也不会发出声音。更多详细操作请参照第7页【使用前注意】中的【EMS/RF温热模式】使用说明来进行操作。</p> <p>【问题仍未解决】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。</p>

8 使用结束后

- 请按ON/OFF按键关闭电源。
- 脸部残余的化妆水和美容液请用手部继续稍加按摩，使其充分吸收。
- 使用结束后，需要做好面部护理，补充乳液或者保湿霜等护肤品。
- 使用结束后，按摩头上残留的化妆水、美容液等请使用纸巾、湿布擦拭干净。
※请勿使用含有腐蚀性清洁剂。
※本产品不防水，请不要直接用水清洗。
- 为了保持日常清洁与干净，请置放在远离垃圾、灰尘的地方。
- 避免高温直射与湿润环境，请放在小朋友触及不到的地方。

电穿孔/无针美塑功能没有反应	<p>●请确认使用动作 电穿孔/无针美塑在启动期间，肉眼无法看出任何反应，也不能听到声音的。请参照第7页【使用前注意】中的【电穿孔/无针美塑】的说明进行操作。</p> <p>【确认已经启动但是没有任何反应】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。</p>
不操作的情况下液晶屏背光不亮	<p>●并非产品故障。 此为节能模式，在无按键操作的情况下，液晶显示屏背光将自动熄灭，按任意键即可再次亮屏。</p>
按键后直接进入下一个模式	<p>●并非产品故障。 电源开启后无操作期间，液晶显示屏背光自动熄灭。在此状态下按功能键，将转换为下一个模式。</p>
液晶显示屏亮光变暗	<p>●电量不足。 电池余量不够时液晶显示屏及LED灯的光将变弱。请连接充电线进行充电。</p> <p>【充电后此情况仍无改变】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。</p>
使用中发出“哔哔”的声音后关机	<p>●并非产品故障。 各功能模式运作十分钟后，本机器将自动关机。</p>

-17-

使用期间手部有漏电触感	<p>●这并非产品的漏电。 本机器手柄的金属部分有微电流流出，帮助美容成分穿过皮肤表层障碍浸透皮肤深部，根据个人情况会有刺激感。微电流对人体无害，但如有介意请将强度下调后使用。</p> <p>【即使将强度下降，也不适应微电流的情况】 如有需要请联系本店客服退换货。 *需在收货后七日内申请。</p>
-------------	--

常见问题

- Q. 必须使用美容液吗？**
- A. 化妆水和美容凝胶都没有问题，但是比较推荐水溶性好，且含有保湿成分的化妆水。同时美容成分中的高分子能有效渗入肌肤深处，使用高浓度无添加的美容液会发挥更好的效果。推荐搭配本产品使用的专用美容液。
- Q. 怀孕中（产前或产后）也可以使用吗？**
- A. 虽然怀孕中（产前或产后）也可以使用，但是由于这期间荷尔蒙不平衡，肌肤也处于脆弱的状态，而且也可能偶尔会出现皮肤过敏情况。建议务必询问医生后，根据皮肤状态再作使用。（美容仪的功能和美容液的成分不会对孕妇及胎儿造成影响，请安心使用。）

-18-

Q. 3D按摩头是什么材质？

A. 由不锈钢制成，能有效防止擦伤、耐腐蚀和不易生锈，且不易引起肌肤过敏。
※并非所有人都会引起过敏反应。担心过敏者请在手腕内侧进行过敏测试。

Q. 皮肤对产品不适应怎么办？

A. 请及时联系购入门店的客服进行处理。

Q. 每天使用本产品，效果会比较好吗？

A. 虽然本产品功能可以发挥较好的美容效果，但是过度频繁使用可能会给肌肤带来负担。为此，请按照本说明书的使用频度使用。并不是每天频繁的使用就可以很快得到效果，而是每天认真仔细地持续使用才是最重要的。

Q. 为什么使用后感觉看不到明显效果？

A. 美容效果的多少还是会因人而异的。
本产品的定位是以家用美容为前提的，相对于美容院级别的仪器的明显功效和即效性，不同人使用效果可能也会不同，而如果每天都能认真仔细地长期持续使用，是可以慢慢感受到实际效果的。

-19-

关于保修期间内的修理

凡在保修期间内属于免费维修

订单编号	名字	商品名	购入时间	故障状况
------	----	-----	------	------

返修时请附上以上内容，便于售后处理

E-mail: kireido@163.com Tel: 0771-2875241

※自购买日起3个月后，维修所产生的商品运费请自理
※超出保修期按成本收取相关维修费用
※如有疑问请联系本公司

售后地址 广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾路80号台湾街台北中心大厦13楼1312绮丽堂售后部

【保修卡】 ※配件属于消耗品，故不在保修范围内。

购买后在保修期内若发生故障，请参照本书的说明进行维修。

〈修理说明〉

1.按照说明书使用而产生故障的情况可以进行维修。
2.在保修期内，用户需保修时请填写本保修书，并将产品和保修书邮寄至本公司指定维修点进行免费维修。
3.属下列情况之一，即使在保修期内，也不在免费保修范围内：
a.因使用不当、自行修理和人为改造等引起的故障及损伤； b.购买后因移动、跌落及运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损伤； c.因火灾、地震、雷击等自然灾害、公害、异常电压等造成的故障和损伤； d.无法出示本保修书； e.保修书上未填写顾客姓名、购买的日期、或是书面有涂改的情况。

■型号:	■品名:belulu rebirth
■保修期:	自购买日起1年内（超3个月后维修运费自理）
■姓名:	_____
■住址:	_____
■订单编号:	_____

販売店: 株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

●保修书未填写的情况属于无效，请确认是否已经填写。万一有未填写的情况，请直接与本公司联系。
●本书承诺在规定保修期内及满足保修条件的情况下为客户提供免费保修服务。本书并非制约用户在法律上的权利。超过保修期后需要修理服务的情况如有不明之处，请直接与本公司咨询。

-20-