

belulu[®] Rebirth

사용설명서

본 제품을 구매해 주셔서 감사 드립니다.
이 사용 설명서를 잘 읽은 다음 제품을 사용해주십시오.
사용 설명서 안에 있는 보증서를 잘 보관 해주십시오.



사용 전에 반드시 읽어주세요.



경고

- 사용전압 AC어댑터 등은 반드시 본 사용설명서에 지정되어있는 상품에만 사용해주세요.
- 본 품을 사용 중에는 LED 라이트를 직접 보거나, 눈에 가까이 대는 일이 없도록 해주세요. LED 라이트를 직시하면 눈에 이상이 생길 우려가 있습니다.
- 만일 연기나 냄새, 가열 등 이상이 발생한 경우, 본체의 전원을 끄고 사용을 중지해주세요.
- 전원 어댑터의 코드를 억지로 늘리거나, 물에 젖은 손으로 플러그 부분을 만지지 말아주세요.
- 난로 등 고온 장소에서는 본품과 전원 어댑터를 사용하거나 방치하지 마세요.
- 젖은 손으로 사용하거나 물기 및 먼지 등이 부착 된 채로 사용을 피해주세요.
- 본품은 방수처리가 되어있지 않습니다.
- 욕실 등 습기가 많은 장소는 절대 사용하지 말아주세요. 화상이나 감전, 고장의 우려가 있습니다.
- 만일, 피부에 이상이 발생한 경우, 사용을 중지하시고 의사와 상담하세요.
- 하기의 리스트를 잘 확인하시고, 적합하지 않는 분은 본제품을 사용하지 말아주세요.
- 본품의 분해 등의 행동은 절대 하지 말아주세요.
- 본품 및 부속품의 고장, 파손의 원인이 됩니다.
- 상기의 주의, 경고에 따르지 않는 경우 등, 잘못 사용, 분해 된 때의 고장 파손등에 관해서는 보증 제외 대상으로, 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다



주의

- 피부의 약한 부분에 과도하게 사용하는 것을 삼가 해주세요.
- 사용 후 통증 등이 있을 경우, 즉시 사용을 멈추세요.
- 떨어트리거나 부딪치는 강한 쇼크를 주지 않도록 해주세요.
- 충전에는 약 4시간-8시간이 소요됩니다. 충전 완료 후 더 이상 충전을 하지 말아주세요.
- 충전 중 이외는 충전 케이블을 본체에서 빼주세요.
- 제품을 물에 적시지 마세요. 더럽혀진 경우에는 물에 적신 부드러운 천으로 부드럽게 닦아주세요.
- 렌즈, 시너 등의 로 화학 용제류로 닦지 말아주세요.
- 상기의 주의, 경고에 따르지 않거나, 잘못된 사용, 분해 등으로 인한 고장, 파손등에 관해서는 보증 제외 대상으로 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

<하기에 해당사항이 있는 분은, 사용을 피해주세요>

- 급성 질환 ● 유열성 질환 ● 혈압 이상 ● 전염병 질환 ● 심장 질환 ● 의용 전자 기구를 사용하는 분(페이스 메이커 등의 체내 스테르식 의료용 전자 기기, 인공 심폐 등의 생명 유지용 전자기, 심전도 등의 장착형 의료용 전자 기기) ● 피부 암 병력이 있는 분
- 당뇨병 및 다른 질환으로 인한 피부 이상 질환자 ● 임신 중인 분 ● 수유 중인 분
- 피부 트러블(아토피성 피부염, 과도한 햇빛으로 피부 염증이 생기는 분, 여드름이나 화농성 염증이 있는 분, 알레르기 체질인 분, 특히 피부가 민감한 편인 분)
- 화장품에 의한 피부염을 일으키는 분 ● 특히 건강이 좋지 않은 분
- 스테로이드계 호르몬제 등을 장기간 복용하고 있는 분

<사용을 피해주세요>

- 악성 종양 ● 상처 ● 뼈나 관절의 위 ● 성형 등 실리콘이 사용된 부분 ● 성대 부분
- 머리, 눈이나 귀 주변, 점막 등의 민감 존

2 상품내용&명칭

※제품사양이나 내용은 예고없이 변경 될 경우가 있습니다.



belulu Rebirth본체




AC어댑터



보호안경



충전 케이블

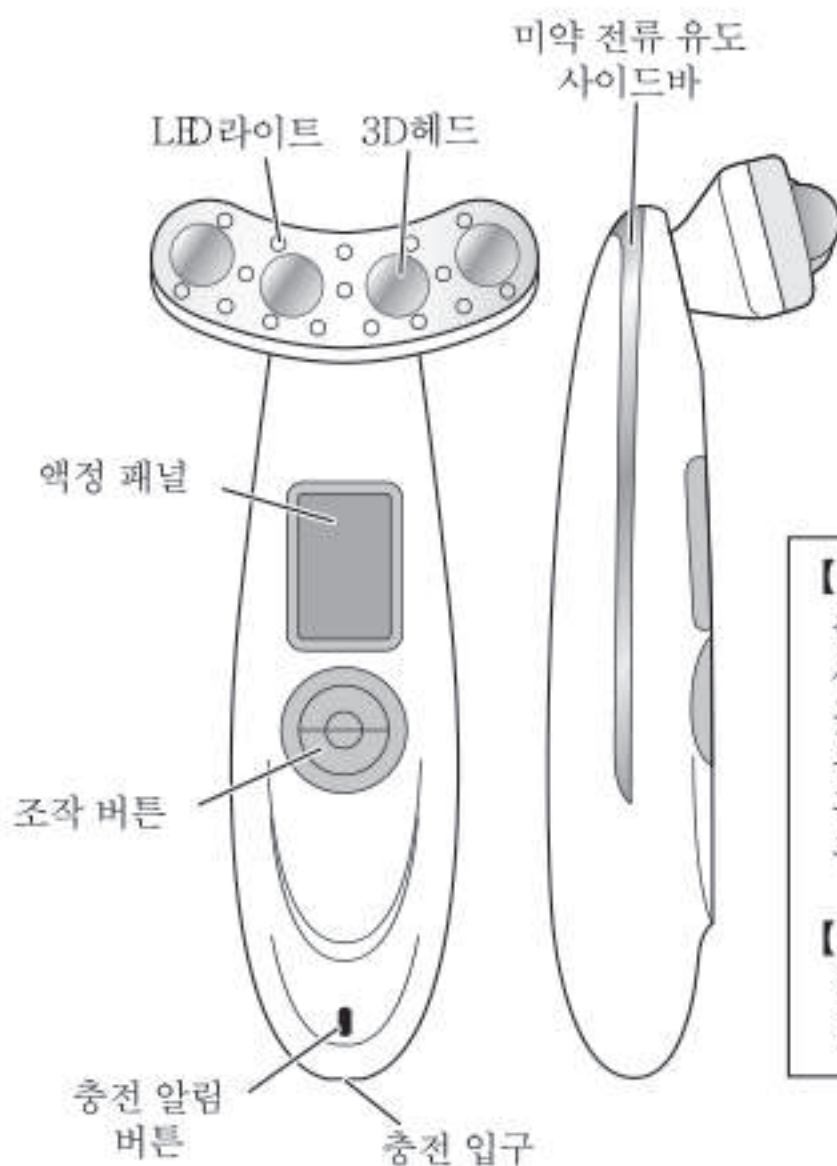

【본체사양】

충전시간 : 4~8시간 입력:5V/0.5A
 사용전지 : 이온 배터리
 높이 : 180mm
 폭 : 45mm (헤드부분)
 두께 : 35mm (바디부분)
 무게 : 100g

【USB 식 어댑터 사양】

입력: 100~240V 50/60Hz0.2A
 출력: 5V/1A

3 본체 충전

●액정패널 하단에 배터리잔량이 3단계로 표시됩니다. 잔량이 1이나 0 이 되면 충전을 해주세요.



잔량
75~100%



잔량
50~74%



잔량
25~49%



잔량
0~24%

※충전 잔량 표시는 대략적인 수치입니다.

●구입 후 처음 사용할 경우, 장기간 사용 하지 않을 경우, 배터리 잔량이 낮은 경우에는 본체를 충전해 주세요.

●충전 중에는 반드시 전원을 꺼주세요.

●충전 케이블의 충전 커넥터를 본체충전 입구나 USB 커넥터를 컴퓨터나, 부착식 USB 어댑터 등을 USB 포트에 꽂습니다.

●충전 알림 램프가 적색으로 점등 됩니다.

※충전 중에 본체가 다소 뜨거워질 경우가 있습니다. 본체나 어댑터에 문제가 있는 것은 아닙니다.


●충전 시간이나 가동 시간은 본체품의 사용에 따라 달라집니다.

●충전에 적합한 실온은 15~30℃입니다. 저온에서의 충전은 전지의 수명이 짧아지는 원인이 되므로, 알맞은 온도 하에서 충전을 하세요.

또한 약 0℃ 이하에서는 충전 속도가 저하 될 수 있습니다.

■ 내장 전지 보호를 위해 장기간 사용하지 않을 경우에도 한달에 1회 충전을 하세요.

■ 제대로 충전된 상태에서도 가동 시간이 짧을 경우는 전지의 수명 문제입니다.

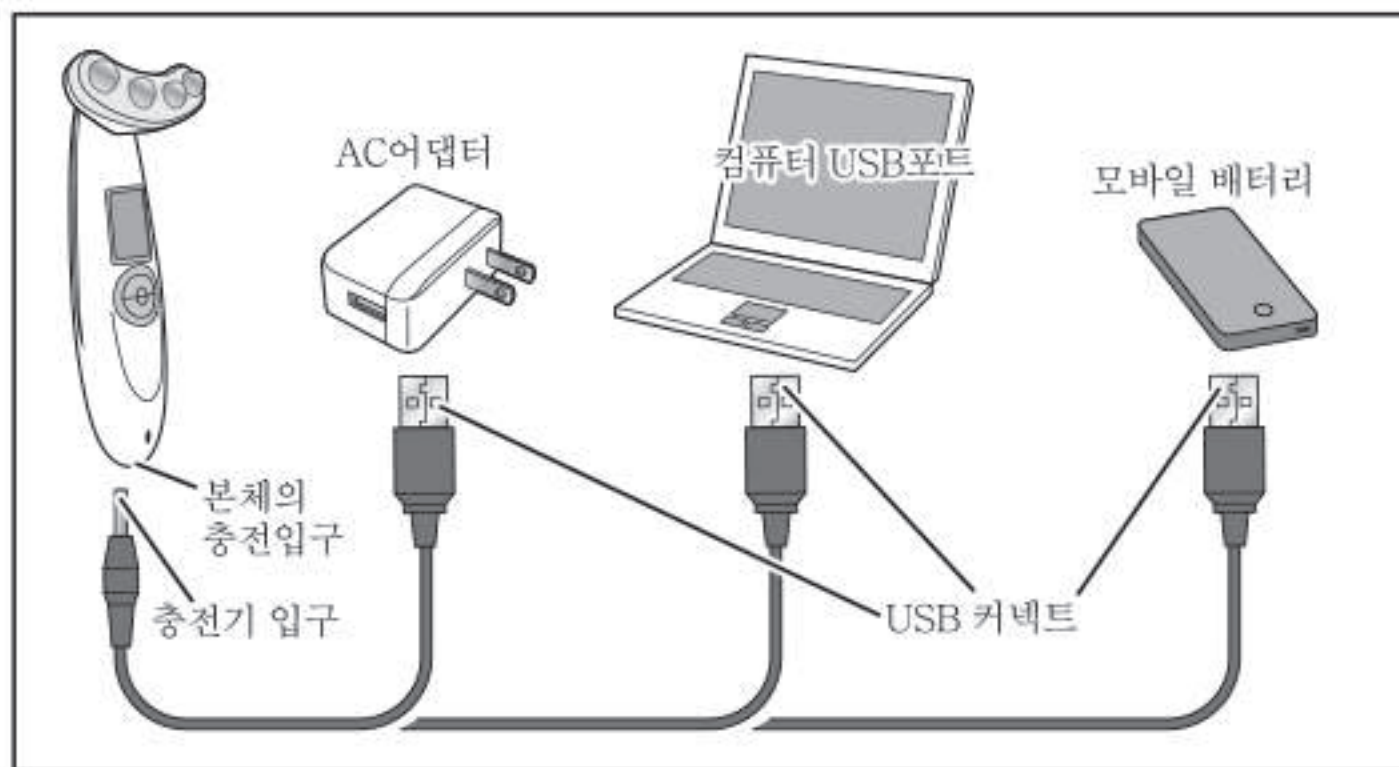

4 버튼 작동

ON/OFF버튼


전원 ON/OFF와, EMS/RF 온열모드를 설정합니다.



- ON/OFF 버튼을 누르면 전원이 켜지고, 액정 패널이 파란 불빛으로 점등하면서 아이콘이 표시 됩니다.
- 그 상태에서 ON/OFF 버튼을 누르면 EMS/RF 온열 모드가 작동 합니다. ON/OFF 버튼을 누를때 마다 강도가 올라갑니다.

※충전을 하면서 강도레벨을 설정 하면 EMS/RF 온열은 작동하지 않습니다.

- 강도 레벨 [약] 상태에서 ON/OFF 버튼을 누르면, 전원이 꺼집니다.
- 강도레벨을 내리고싶은 경우는, 전원을 끈 후 다시 켜서 설정해주세요.

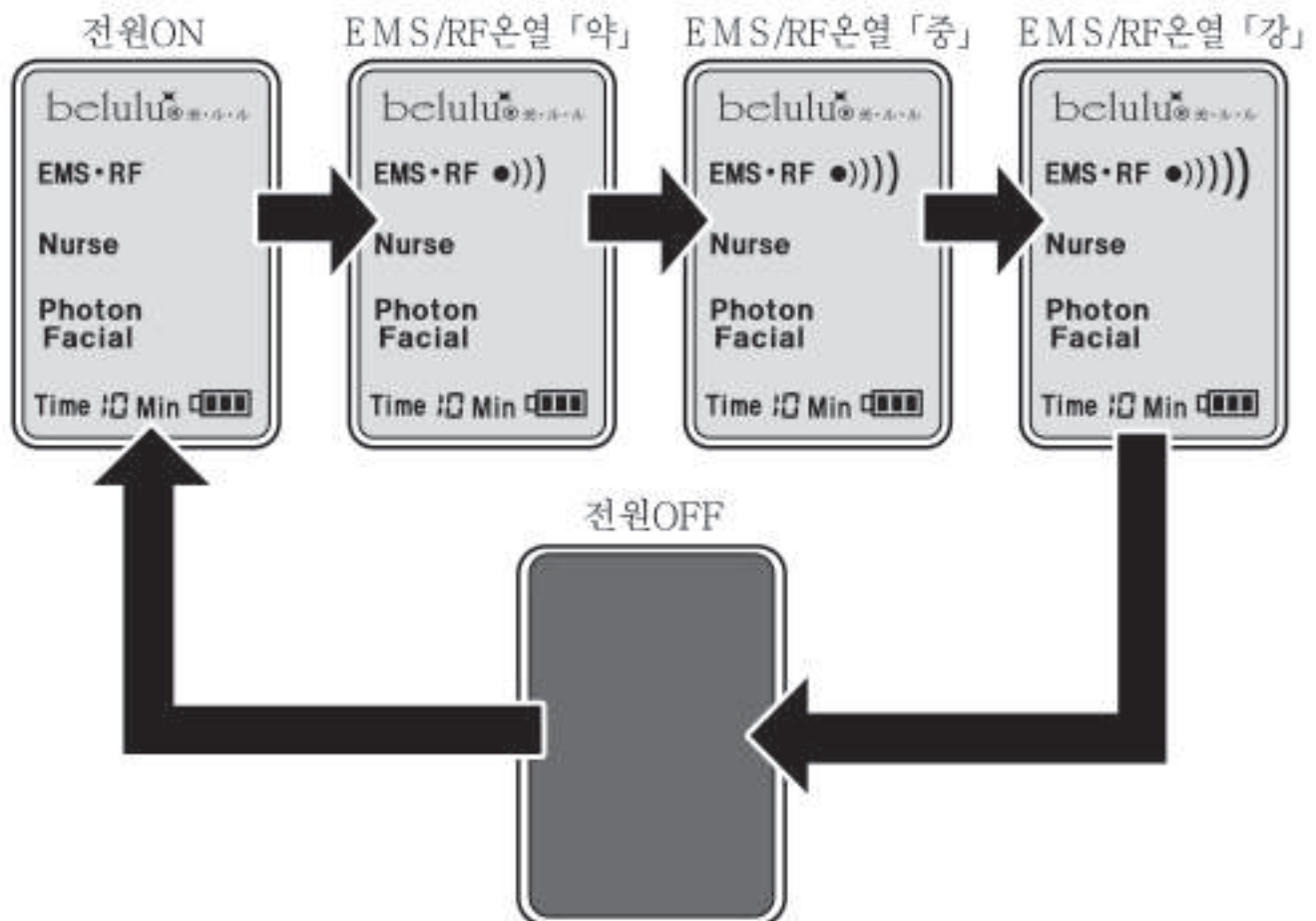


광 에스테, 진동 에스테(Nurse)모드와 동시 사용도 가능합니다.
EMS/RF온열 모드 중에 PHOTON버튼을 누르세요.
각 모드에 관해서는 [PHOTON버튼] 항목을 참조하세요.

PHOTON버튼



LED라이트 컬러와 마사지 모드를 설정하는 버튼입니다.

- ON/OFF버튼을 누르면 전원이ON이되고 액정패널이 파랑색으로 점등하면서 아이콘이 표시됩니다.
- 이 상태에서 [PHOTON버튼]을 누를 때 마다 진동에스테(Nurse)→빨강 LED→초록LED→파랑LED→3색 의 순서로 모드가 바뀝니다.
※LED라이트를 장기간 직시 하지 않도록 주의 해주세요.
- 3색 점등의 상태에서 PHOTON버튼을 누르면, LED라이트 전체 아이콘 표시가 사라지고 액정 패널만 점등하고 있는 상태가 됩니다.
- LED라이트의 변경이나 모드를 변경하고 싶으면 다시 PHOTON 버튼을 눌러 설정해주세요.

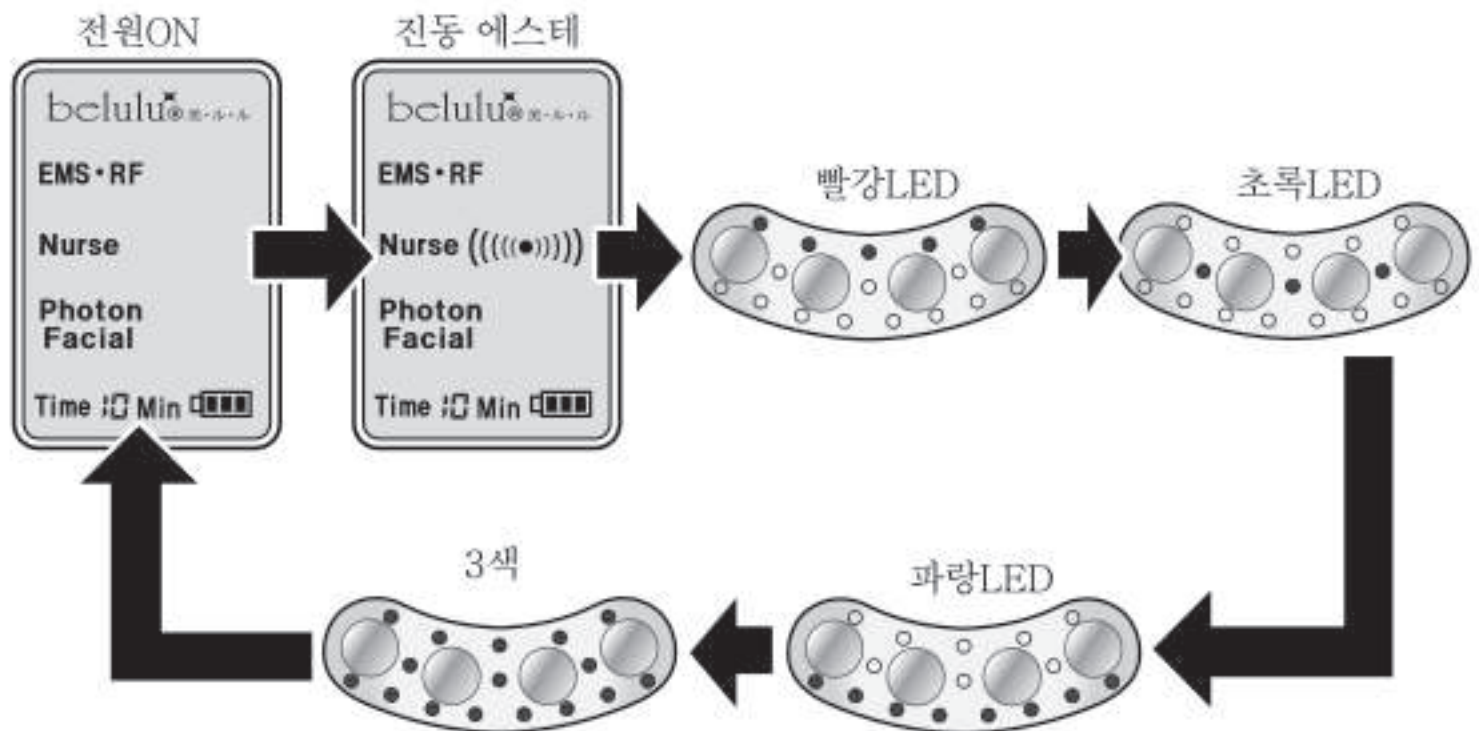

LED라이트 점등 중에는 액정 패널 「Photon」 에 「☀」 마크가 표시 됩니다.

EMS/RF온열 모드와 동시 사용 가능합니다.

진동 에스테 및 광 에스테 모드중에도 ON/OFF 버튼을 눌러주세요.
각 모드에 관해서는 [ON/OFF버튼] 항목을 참고해주세요.

5 사용 전에

사용하기 전 기계 동작 확인과 피부 테스트를 하세요.

기계확인

【EMS/RF온열모드】

1.【ON/OFF버튼】

5페이지를 참고해서, EMS/RF 온열 모드를 설정해주세요

EMS・RF ●))))))

2. 액정패널의 RF와 EMS의 강도 레벨이 표시된 것을 확인해주세요.

3. 3D헤드를 피부에 대어 보았을 때 살짝 자극이 느껴지면 정상적으로 가동 되고있는것입니다.

※자극의 차이는 개인차가 있습니다.

【진동 에스테 모드】

1.【PHOTON 버튼】

6 페이지를 참고해서, 진동 에스테 모드를 설정해주세요.

Nurse ((((((●))))))

2. 액정패널의 「Nurse」 아이콘이 점등했는지 확인해주세요.

3. 소리와 진동이 발생하는지 확인해주세요.

【광에스테】

1.【PHOTON 버튼】

6페이지를 참고하고, LED 라이트의 컬러가 [빨강]→[초록]→[파랑]→[3색순서점등]
순서로 정상적으로 바뀌는지 확인해주세요.

2. LED라이트가 점등이 되는지 확인해주세요.

※LED라이트 확인시에는 장시간 라이트를 직시하지 마세요. 시야를 멀리 두세요

3. 액정 패널에 「☀」 마크가 표시 되었는지 확인해주세요.

【일렉트로 포레이션 · 메조 테라피】

1. 소리나 진동이 발생하지 않습니다.

2. 개인차에 따라서 자극을 느낄수 있습니다.

피부테스트

● 팔 안쪽을 잘 씻고 물기를 잘 닦아냅니다.

● 비루루 전용 젤 또는 쓰시는 화장품(젤 등)을 바르고 본 제품의 모든 기능을 테스트해보세요.

● 팔 안쪽에 테스트 해보시고 이상이 없으시면 얼굴에 사용하세요.

만일 피부에 이상이 있는경우, 제품을 사용하지 마시고, 판매처 또는 의사에게 상담하세요.

6 기능과효과

U자형의 헤드가 눈가와 입가, 페이스 라인에 밀착되어 리프트 업!
EMS, 일렉트로 포레이션모드는 안티 에이징 케어 효과를 발휘합니다.

【EMS】 주 3회 까지

근육에 자극을 주고 강제적으로 근육 운동을 시켜 표정 근육이 단련 됩니다.
피부 리프팅 효과, 얼굴이 작아보이는 효과를 볼 수 있습니다.
또 신진대사를 활발하게 하는 콜라겐의 생성을 돕습니다.
※RF온열과 동시에 가동합니다. EMS만 단일 사용은 할 수 없습니다.

【RF온열】(라디오파) 주 3회 까지

높은 주파수인 1MHz라디오파에 의한 온열 효과로 피부 안에서 천천히 따뜻하게,
혈액 순환을 촉진하는 피부 세포의 활성화와 노폐물의 배출을 촉진 시킵니다.
※EMS과 동시에 작동합니다. RF온열기능만 단일 사용은 할 수 없습니다.

【진동 에스테】 주 3회 까지

진동으로 화장품(에센스나 젤등)을 피부 깊숙이 빠르게 침투시킵니다.
혈액 순환을 좋게 하고 피부 세포를 활성화시킵니다.

【일렉트로 포레이션】 주 3회 까지

특수한 전기로 피부 세포에 성분이 지나가는 길을 만들어 평상시 피부상태에는
침투하기 힘든 고분자 미용 성분을 피부의 깊은 부분까지 보냅니다.
히알루론산, 콜라겐 등 고분자의 미용 성분이 포함된 에센스를 사용하시면
보다 좋은 효과가 발휘됩니다.

※EMS/RF온열로 설정하면 자동적으로 메조 테라피와 동시 가동 합니다.
단일로 사용할 수 없습니다.

【메조 테라피】 주 3회 까지

일렉트로 포레이션 미약 전류와 지방 용해 전용 화장품을 같이 사용하면 피부 침투 효과를
높입니다. 일반적인 에센스를 사용하시는 경우는 지방이 용해되지 않습니다.

※EMS/RF온열로 설정하면 자동적으로 일렉트로 포레이션과 동시 가동 합니다.
단일로 사용할 수 없습니다.

【광 에스테】 주 3회 ~ 매일

LED라이트 피부 케어입니다.

LED라이트는 파장에 따라서 피부 속에 닿는 깊이도 다르기 때문에 색깔 별로 피부에 다양한 효과를 가져옵니다. 피부 고민에 맞추어 모드를 선택할 수 있습니다.

빨강 LED

630nm파장

콜라겐을 수치를 올리고 피부의 기미, 주름, 처짐 등을 개선합니다.

자외선으로 인한 피해를 복원하는 기능을 개선, 안티 에이징 효과가 기대됩니다.

초록 LED

525nm파장

신진대사를 촉진하고 피부를 다시 태어나게 합니다.

주름살이나 여드름 자국, 흉터 자국 등에 의한 색소 침착을 개선합니다.

파랑 LED

415nm파장

여드름의 원인인 활성 산소를 배제하는 작용으로

여드름을 진정시키면서 피부를 정돈 해줍니다.

3색 점등

빨강, 녹색, 파랑 색이 차례로 점등하면서 효과를 발휘하고,
트러블 없는 피부로 가꾸어 줍니다.

선택모드

복수 모드로 조합하고 동시에 실시할 수 있습니다.

시간 단축 및 빠르게 효과를 보고 싶은 분께 추천합니다.

EMS RF 온열 + 진동에스테

EMS/RF온열의 강도 수준을 L(약)M(중), H(강)의 3단계에서 선택할 수 있습니다.


EMS RF 온열 + 광에스테

EMS/RF온열의 강도 수준을 L(약)M(중), H(강)의 3단계에서 선택할 수 있습니다.
광 에스테의 LED컬러를 4가지패턴에서 선택할 수 있습니다.

카운트다운 기능

전원을 켜면, 액정 패널에 시간이 표시되어 10분 경과하면 자동으로 전원이 꺼집니다.

모드를 선택하면 액정 패널의
하단에 "10Min(10분)"으로
표시되어 1분마다 카운트다운
됩니다.

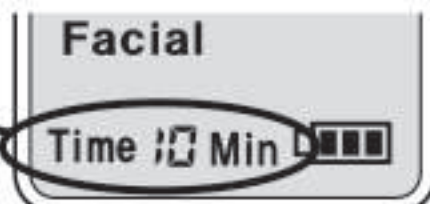

7 사용을 시작합니다!

반드시 지켜주세요.

- 방수기능이 없으므로, 욕실 이나 물기 많은 곳에서는 사용하지 말아 주세요.
- 난방 기구 등 고온의 장소에서는 사용하지 마세요.
- 광 에스테 사용 중에는 눈을 감고 사용하시고, LED 라이트를 직접 보거나 장시간 직시하지 마세요.
- 관리를 실시할 때는 꼭 젤, 화장수 등을 사용하세요. 건조한 피부에 사용하면, 3D헤드의 마사지 기능이 원활하지 못해, 피부 트러블의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체 측면의 미약 전류 유도 사이드 바에 손이 닿게 잡으세요.
- 3D헤드를 피부에 사용할 때, 강하게 문지르지 마시고 부드럽게 미끄러지듯 사용하세요.
- 사용 시에는 손목 시계와 보석 등 귀금속 류는 착용하지 말아주세요.
- 사용 중 피부에 이상을 느끼거나 피부에 맞지 않는다고 느낀 경우 사용을 중단하고 의사에게 상담하세요. 판매처에 문의 주세요.

【준비물】

● 에센스 · 미용 젤 또는 스킨

... 끈적한 느낌이 있고 미용 성분이 고농도로 함유된 것이나 비루루 전용 에센스를 추천합니다. 피부의 고민에 맞는 성분이 다량 함유되어 있는 것을 사용하세요.

● 로션 또는 크림

...비루루 사용 종료 후 마무리에 사용합니다.

사용 방법의 예시 입니다.
자신의 고민에 따라서 기능을 조합해서 사용하십시오.

- 화장을 지우고 세수하고 물기를 잘 닦아내십시오.
- 헤드 부분에 화장품을 과다하게 사용하면, LED라이트의 패널의 틈새에 젤이 들어갈 수 있습니다. 조금씩 추가하면서 사용하세요.
- 얼굴에 직접 바르시길 권장하고 있습니다.

팔자주름이나 피부 처짐이 있는 분

EMS/RF온열로 탄탄한 피부

EMS
RF온열




- ① 얼굴 전체에 에센스, 젤이나 화장수를 직접 발라 주세요.
※로션, 크림은 사용하지 마세요.

시중에 파는 마스크팩 위에 사용하셔도 됩니다.



- ② ON/OFF버튼으로 EMS/RF온열 모드로 설정합니다.
강도 레벨을 설정하세요.
처음 사용 분이나 피부가 민감한 분은 "약"부터 시작하세요.

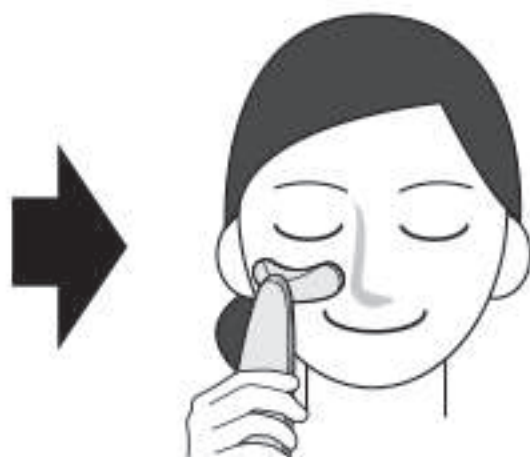

- ③ 3D헤드를 피부에 대고 부드럽게 이동합니다.

P.14에 자세하게 기재되어 있습니다.

세안 후 피부가 건조해지는 분

일렉트로 포레이션 / 메조 테라피
+ 마사지 (Nurse)로 완벽 보습

일렉트로
포레이션

메조
테라피

진동
에스테

EMS
RF온열


※자동적으로 가동.



- ① 얼굴 전체에 에센스, 젤이나 화장수를
직접 바릅니다.
※로션, 크림은 사용하지 마세요.



시중에 파는 마스크 팩
위에 사용하셔도 됩니다.

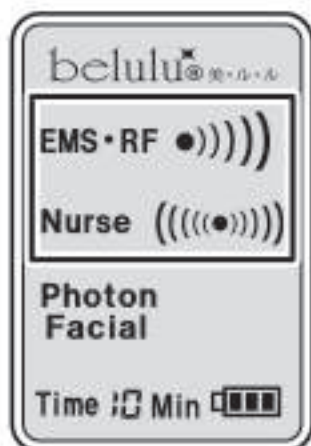

- ② ON/OFF버튼으로 EMS/RF온열 모드로
PHOTON버튼으로 진동 에스테를 설정
하세요. EMS/RF온열의 강도 레벨을
설정해주세요.

- ③ 3D헤드를 피부에 대고
부드럽게 이동해주세요.

P.14에 자세하게 기재되어 있습니다.

원 포인트 어드바이스



에센스, 젤이나 걸쭉한 스킨이 없는 경우는
시중에서 판매되는 마스크팩을 붙이고
본제품을 사용하면 충분한 보습이 됩니다.

EMS
RF온열

진동
에스테


초록
LED




- ① 얼굴 전체에 에센스, 젤이나 화장수를 직접 바릅니다.
※로션, 크림은 사용하지 마세요.



시중에 파는 마스크 팩 위에 사용하셔도 됩니다.

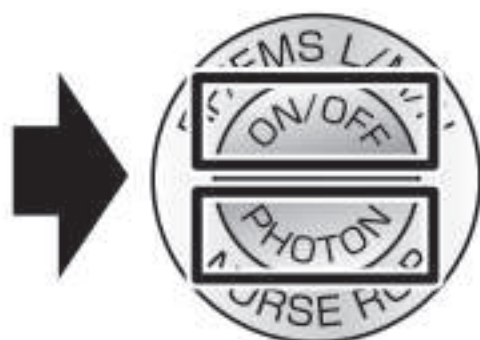

- ② ON/OFF버튼으로 EMS/RF온열 모드에 PHOTON버튼으로 진동 에스테에 설정하세요.
EMS/RF온열의 강도 수준도 선택하세요.

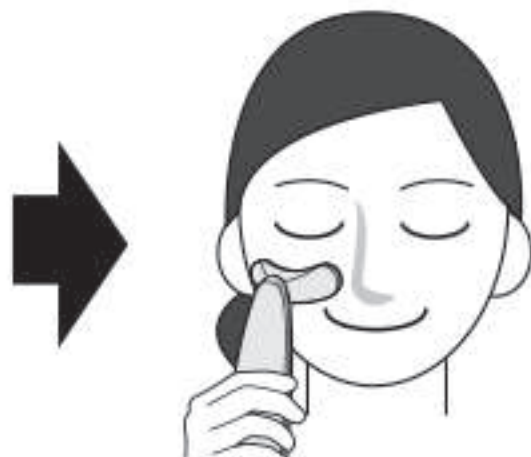

- ③ 3D헤드를 피부에 대고 부드럽게 이동해주세요.

P.14에 자세하게 기재되어 있습니다.



- ④ EMS/RF온열+진동 에스테가 종료되면, PHOTON버튼을 누르고 초록 LED로 설정합니다.
헤드 부분을 피부에서 1cm정도 떨어져, 신경쓰이는 부분을 그림과 같이 사용해주세요.

※ LED라이트 사용시, 마스크 팩 사용은 하지 말아주세요.

【사용 방법】

얼굴을 "입 주위 오른쪽", "입 주위 왼쪽", "오른쪽 뺨", "왼쪽 뺨", "코", "이마"로 구분하고 부분마다 3D헤드를 사용하시면 얼굴 전체를 빈틈없이 관리할 수 있습니다. 코 주위 등 특히 노폐물이 쌓이기 쉬운 부분은 3D헤드 사용 시간을 오래하여 중점적으로 관리합니다. 클렌징 워터는 한 관리 부분이 끝날 때 마다 추가하는 것을 추천합니다.

【사용 시간 예시】



상기의 시간은 예시입니다.
자신의 피부 상태에 맞춰서
자유롭게 바꿔 주세요.

[아래에서 위로] [안에서 밖으로] 기준으로 움직입니다.

【입 주변】



턱을 기점으로 뺨
쪽으로 이동합니다.
인중도 똑같이 뺨쪽
으로 이동합니다.

【뺨】



코 옆을 기점으로
뺨을 향해서
부드럽게 이동
합니다.

【코】



콧날은 상하로 코
주변은 원을 그리듯
이동합니다.

【이마】




상하 좌우로 왕복
하며 이동합니다.


이외의 바디 마사지에도 사용 가능합니다.



- ① 쇄골 부분에 에센스나 미용 젤을 듬뿍 바릅니다.

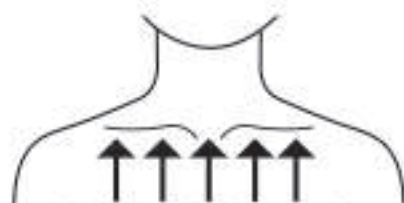


- ② 가슴 위에서 쇄골을 향해 이동합니다.

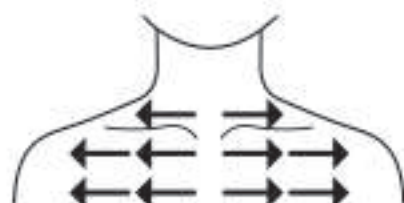

- ③ 쇄골 주위와 가슴 위를 기점으로 안쪽에서 바깥쪽으로 향하게 이동합니다.


탄력있는 가슴 라인으로

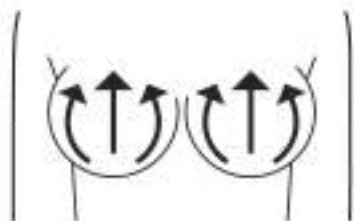

- ① 가슴에 에센스나 젤 혹은 가슴 업 젤 등을 듬뿍 바르고 가슴을 밑에서 위로 들어올리는 듯이 이동해줍니다.




- ② 등이나 옆구리 살을 모아서 밖에서 가슴 쪽으로 이동시킵니다.

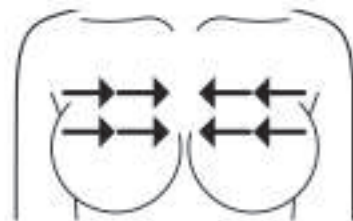


- ③ 가슴 윗부분을 기점으로 바깥에서 가운데를 향해서 이동합니다.

힙업을 만들고 싶다!

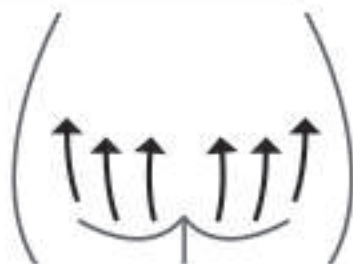

- ① 엉덩이에 에센스나 젤 등을 듬뿍 바르고 엉덩이를 아래에서 위로 들어올리 듯이 이동합니다.

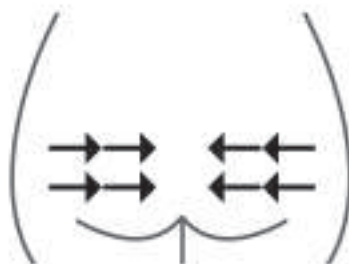

- ② 밖에서 안쪽으로 이동합니다.

8 사용이 끝나면

- ON/OFF버튼을 누르고 본체의 전원을 끕니다.
- 얼굴에 남은 젤과 스킨, 에센스를 피부에 흡수 시킵니다.
- 사용이 끝난 후 로션, 크림으로 지방분을 보충합니다.
- 3D헤드에 남은 젤과 스킨, 미용제는 물티슈 등으로 깨끗이 닦아낸 후 마른 수건으로 수분을 제거 하고 청결하게 보관 하세요.
- ※시너 · 벤젠 등의 용제류는 사용하지 마세요.
- ※방수가 아니므로, 물로 씻지마세요.
- 청결을 유지하기 위해 상자에 보관하고 먼지가 붙지 않도록 보관하세요.
- 직사 광선이나 고온 다습을 피하시고, 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

9 FAQ 자주 묻는 질문들

전원이 안 켜져요.	● 방전되지 않았나요? 충전지는 특성상, 전원을 켜지 않은 상태에서도 조금씩 자연 방전, 충전이 완료되는 경우가 있습니다. 충전 케이블에서 1시간 정도 충전을 하며 다시 ON/OFF버튼을 눌러보세요. 【해결되지 않는 경우】 본체의 초기 불량 및 고장으로 생각되므로, 판매처에 문의해 주세요.
충전이 안돼요. 케이블 각도에 따라서 충전이 불안정합니다.	● 케이블을 제대로 연결 하셨나요? 케이블의 플러그가 잘못 연결 되어 있으면 충전이 되지 않습니다. 사용설명서[본체의 충전]을 참조 후, 코드가 잘 연결됐는지, 확실히 삽입되어 있는지 확인하십시오.
EMS/R F 온열이 가동하지 않아요.	● 기계를 작동해보세요. EMS/RF온열이 진동이 눈에 보이거나 소리가 발생하지않습니다 사용설명서의 "사용 전에 "의 [EMS/RF온열 모드]의 항목을 참조하고, 모드별로 작동 확인을 해보세요.

일렉트로 포레이션 / 메조 테라피가 작동하지않아요.	●작동 확인을 해보세요. 일렉트로 포레이션/메조 테라피는 진동이 눈에 보이거나 소리가 발생하지 않습니다. 사용설명서 "사용 전에"페이지의 [일렉트로 포레이션 · 메조 테라피] 항목을 참조하고, 작동 하는지 확인해보세요.
버튼을 누르고 잠시 후 액정 패널의 불빛이 꺼집니다.	●고장이 아닙니다. 본 제품은 절전을 위해서, 버튼 조작 후 일정 시간 지나면 액정 패널의 라이트를 자동적으로 소등합니다. 라이트가 소등된 경우는 버튼을 누르면 다시 점등합니다.
버튼을 눌러도 모드가 변경되지 않습니다.	●고장이 아닙니다. 전원 ON상태에서 일정 시간 경과하면, 액정 패널의 라이트가 소등합니다. 이 상태에서 버튼을 눌러도 라이트가 점등할 뿐으로, 모드는 바뀌지 않습니다. 액정 패널 소등 후에 모드를 바꾸고 싶을 경우에는 한번 더 버튼을 누르고 라이트를 점등시킨 뒤 다시 버튼을 눌러야합니다.
액정 패널의 표시가 보기 어렵고 LED의 빛이 약합니다.	●충전배터리가 얼마 남지 않았습니니다. 배터리 잔량이 적어지면, 액정 패널이나 LED의 빛이 약해집니다.케이블을 연결하고 충전을 하세요. 【충전해도 증상이 바뀌지 않으면】 본체의 초기 불량 및 고장으로 생각되므로, 판매처로 연락 주세요.
사용 중 "뽀—" 소리와 함께 전원이 꺼졌습니다.	●고장이 아닙니다. 사용 시간의 기준으로, 각 모드 가동 후 10분 경과하면 자동적으로 전원이 꺼집니다.

사용중에,
누전처럼
손이
찌릿합니다.

●누전이 아닙니다.

본 제품은 미세한 전류가 피부 장벽을 뚫고 피부의 심부까지 미용 성분을 침투시키는 제품입니다. 제품 손잡이에서도 분자 전류가 흐르기 때문에 민감한 분들은 자극을 느낄 수 있습니다. 분자 전류는 인체에는 무해하지만 민감한 분은 강도 레벨을 낮춰 쓰십시오.

FAQ

Q .에센스만 사용해야 하나요?

A .스킨이나 젤도 괜찮지만, 스킨의 경우 수용성으로 피부에 머물기 쉽고, 농도가 짙고, 걸쭉한 것을 추천하고 있습니다. 또한 미용 성분을 고분자상태로 피부깊숙이 침투시키므로 젤이나 미용성분이 고농도로 이루어진 화장품이 효과가 더 좋습니다.

Q .임신중에 써도 괜찮습니까?

A .임신 중에도 사용 가능하지만, 임신 중에는 호르몬 밸런스가 불안하고 피부도 민감한 상태이므로 사용의 타이밍에 따라서는 드물게 피부 트러블이 일어날 경우가 있습니다. 꼭 의사와 상담 후, 피부의 상태를 보면서 사용하시기를 추천하고 있습니다.(미용기의 기능이나 에센스 성분이 산모나 태아에게 영향을 끼치는 일은 없습니다. 안심하세요.)

Q .3D헤드 부분의 재질은 무엇입니까?

A .스테인레스를 사용합니다. 상처와 부식 및 녹에 강하고,
알레르기 반응이 일어나기 어렵다고합니다.

※모든 사람에게 알레르기가 일어나지 않는건 아닙니다.

민감한 피부일 경우 팔의 안쪽 등에서 테스트를 하신 후
본 제품을 사용해주세요.

Q .매일매일 사용하는 것이 좋은가요?

A .본 제품에 탑재된 기능은 높은 미용 효과를 발휘
하지만, 너무 많이 쓰면 피부에 부담을 줄 수
있습니다. 피부에 부담을 주지 않고 사용 하기 위해
서, 본 설명서에 기재되어 있는 사용 빈도를 참고해
주세요. 단번에 효과를 얻는 것이 아니라 꾸준히
사용하시는게 중요합니다.

Q .사용해도 효과를 느끼지 못합니다.

A .효과는 개인차가 있습니다.
또 이 제품은 어디까지나 가정사용을 전제로 만들어졌고
에스테틱 처럼 강력한 즉효성은 없습니다.
꾸준하게 사용 하시면, 효과를 실감할 수 있습니다.

보증기간 내 수리 설명

보증 기간 내에는 수리비용을 무상으로 제공합니다.

한국 TEL : 02-576-0701 E-mail : cs@wable.co.kr

일본 TEL : 0120-09-5121 & 050-4560-1423

E-mail : kireido@163.com

중국 TEL : 0771-2875241 E-mail : kireido@163.com

※ 사용 횟수에 관계 없이 구입으로부터 3개월 이상 경과한 경우는 수리품 왕복 배송료를 고객께서 부담합니다.

※ 보증 기간 종료 후, 수리 할 수 있는 경우는 요청에 의한 유상으로 수리할수있습니다.

※ 다른 문의 사항 있으시면 연락 주세요.

한국서비스접수처

서울특별시 서초구 서운로 26-1 보일빌딩 402 웨이블통상
우편번호 : 06731

일본서비스접수처

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係 〒221-0801

중국서비스접수처

广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心
绮丽堂售后部

【보증서】

※ 본체 이외의 부속품은 소모품 이므로,
보증 대상 제외품입니다.

이 책은 본보증서의 기재 내용으로 수리를 실시하는 것을 약속하는 것입니다.
구입일로부터 아래 기간 중에 고장이 발생한 경우는 본서 제시한 후 수리를 맡기세요

< 서비스규약 >

1. 취급 설명서에 따른 정상적인 사용 상황에서 고장 난 경우는 서비스 가능합니다.
2. 보증 기간 내에 고장 나서 수리를 받는 경우는 상품과 보증서를 제시에 의뢰 주세요.
3. 다음과 같은 경우에는 보증 기간 내에서도 유상에 됩니다.
 - a. 사용 상의 오류 및 부당한 수리 및 개조에 의한 고장 또는 손상.
 - b. 구입 후의 이동, 낙하나 수송 상의 부상.
 - c. 화재, 지진, 낙뢰 기타 천재 지변, 공해나 이상 전압에 의한 고장 또는 손상.
 - d. 본 보증서가 없는 경우.

■ 품번 :

■ 品名 : belulu rebirth

■ 수리보증기간: 판매일 부터 1년 간(사용횟수 상관 없이)

■ 고객성명 : _____

■ 주소 : _____

■ 수주번호: _____

판매처 : BELULU

구매일자 : 년 월 일 서명