


belulu® Rebirth

美ルル リバース

使用说明书

感谢您购买本产品，使用本产品前请仔细阅读说明书。
同时，本说明书附保修内容，请妥善保管。

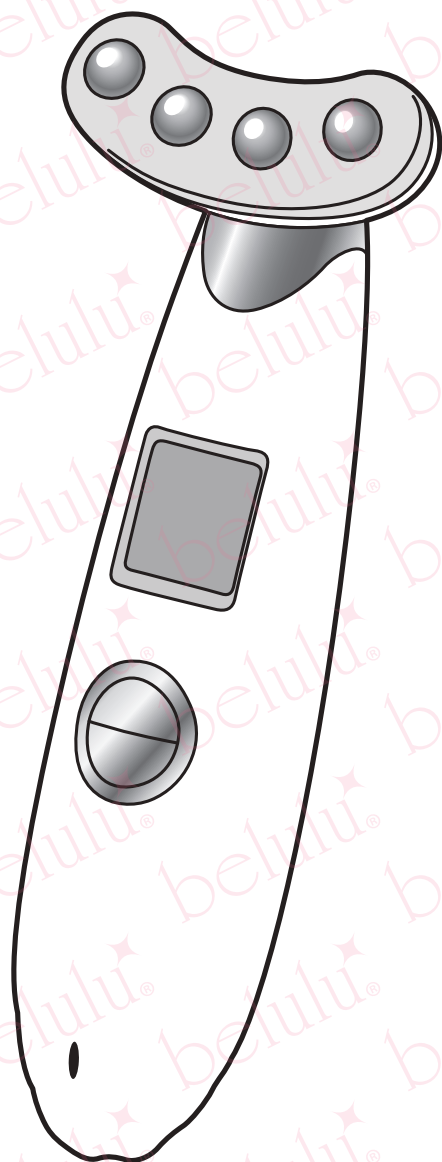

1 使用前请仔细阅读。



警告

- 使用电压、AC适配器等，请务必按照本说明书指示条件使用。
- 请勿直视LED灯，避免照射眼睛。否则有可能对眼睛有伤害。
- 若本品出现破损、故障、变形、电源线断线等情况，请立即停止使用。
- 若出现冒烟、异味或异常变热的情况，请立即关掉电源停止使用。
- 请勿拉扯专用充电线，请勿用湿着的手接触电源插孔。
- 请勿在火炉等高温场所使用或放置本品，适配器或充电电源线。
- 请避免在手潮湿的情况下使用本品，请勿在附着水汽或灰尘时使用本品。
- 本品不具备防水功能。请勿洗澡时使用本品，请勿将本品放置于潮湿的地方。因为有可能出现冒烟、触电或故障等情况。
- 若使用后皮肤出现异常的情况，请立即停止使用及时就医。
- 请确认以下禁用人群，符合该情况的人群请勿使用本品。
- 请勿分解、改造本品。因为有可能造成本品及附属品的故障或破损等情况。若因此而造成本品及附属品的故障问题，本公司概不负责。



注意

- 皮肤薄弱的部位，请避免过度使用本产品。
- 使用中若有疼痛现象，请立即将按摩头从皮肤上拿开。
- 请避免摔落、敲打等强烈撞击。
- 充电约4~8小时完成。充电完成后请立即拔掉电源，请勿继续充电。
- 除充电外，请断开充电线与本机的连接。充电中请勿使用本产品。
- 清洁本品时请用拧干的湿布擦拭。请勿使用挥发油、稀释剂等溶剂类物质擦拭。
- 若不按照以上注意事项、警告，使用不当或任意拆解或改造本品，从而造成的故障或破损本公司概不负责。

〈禁用人群〉


- 急性疾患者 ●热性疾患者 ●血压异常人士 ●传染病患者 ●心脏疾病患者
- 使用医用电子器械的人士（如心脏起搏器等体内植入式医用电子器械、人工心肺等生命维持电子机、心电图等穿戴式医用电子器械） ●有皮肤癌病史的人士 ●糖尿病及其他疾病引起的皮肤异常者 ●孕妇 ●哺乳期 ●肌肤炎症（特应性皮炎、过度晒伤造成的肌肤炎症、痤疮化脓引起炎症、过敏体质引起的肌肤敏感人群） ●由化妆品引起的皮肤炎人群 ●体质差的人群 ●长期服用类固醇荷尔蒙药剂的人群

〈禁用部位〉


- 恶性肿瘤 ●伤口处 ●骨头和关节上 ●整形等使用硅胶的部位
- 声带处 ●头发、眼睛或耳朵周围、粘膜等敏感部位

2 产品内容和规格

※下图仅供参考，请以收到实物为准。

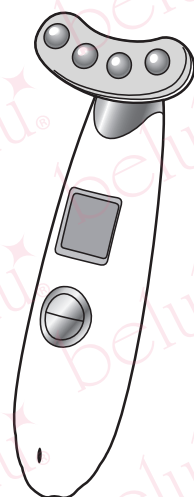


belulu Rebirth本体

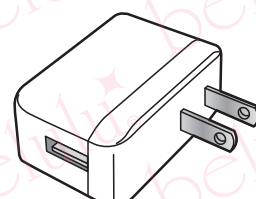


AC适配器



护目镜

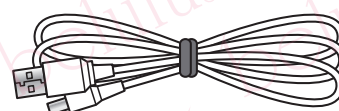

充电线

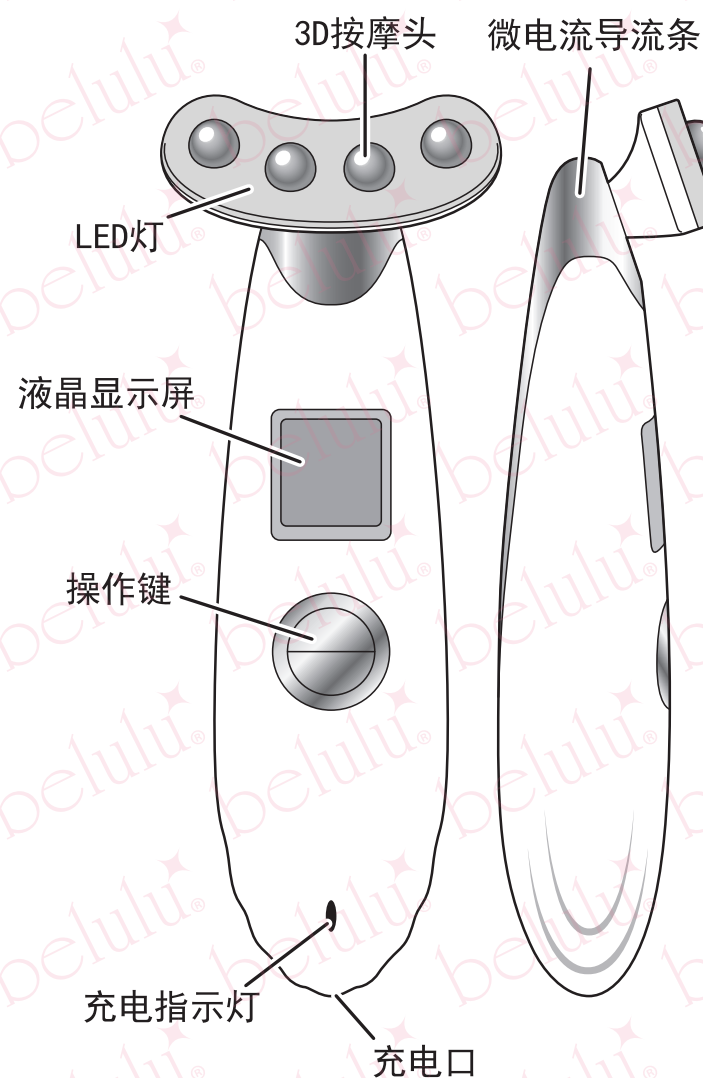

【产品规格】

充电时间：4~8小时 输入：5V/0.5A
使用电池：锂电池
高：170mm
宽：65mm(按摩头部分)
厚：32mm(机身部分)
重量：131g

【USB适配器规格】

输入：100~240V 50/60Hz 0.2A
输出：5V/1A

3 本机充电

●液晶显示屏右下角电池余量共三格。剩余电量一格或无电量情况请及时充电。



充电完成



可使用




可使用
(建议充电)



需要充电


- 购买后第一次使用时或长时间未使用，机器会出现反应较为迟钝的情况，请先充满电。
- 请务必关掉电源。
- 将充电线接口插入机身的充电口。
- 充电指示灯亮红灯则表示正在充电。
- ※充电过程中机身会有轻微发热，属于正常现象。
- 充电时间和机器工作时间的长短请以实际使用情况为准。
- 充电指示灯亮绿灯则表示充电完成，请注意及时拔下充电线。
- 请勿边充电边使用。除充电情况外，请不要让机器长期处于连接USB电源的通电状态。
- 充电时室温应在15~30℃之间，低温情况下充电会导致电池寿命的缩短，请在适宜的室温下进行充电。另外，在低于0℃的环境中充电速度可能会变慢。
- 为了保护内置电池，即使长期不用，也要保持每月充电一次，防止过度放电。
- 如果正常充电使用，但使用时间短，说明电池老化。

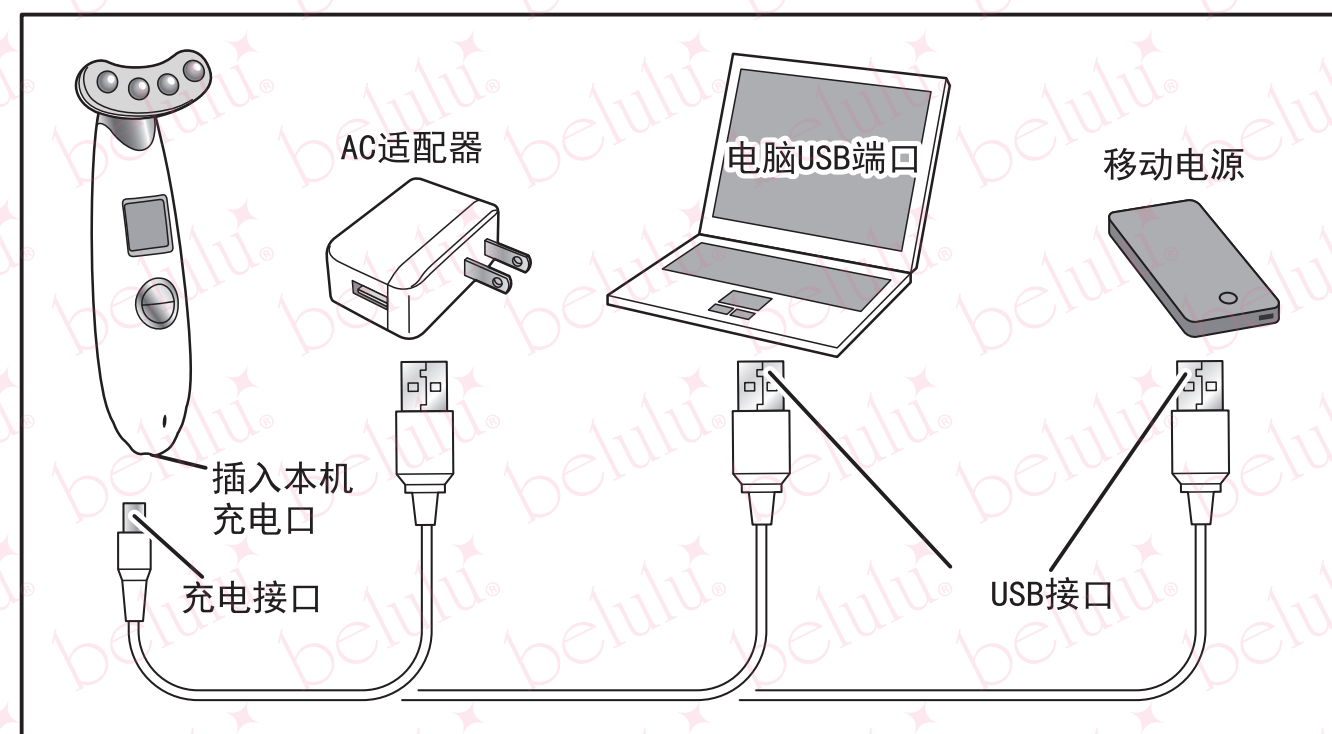


4 按键操作

电源键

按ON/OFF电源键，设置EMS/RF温热模式。

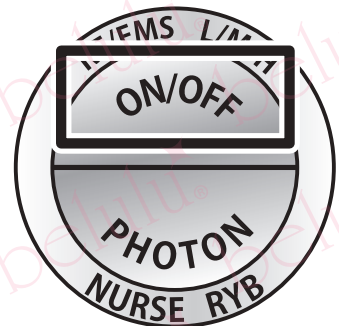


- 长按ON/OFF键2秒钟以上开机，液晶显示屏灯亮处于待机状态。
- 这个状态下按每按ON/OFF键，EMS/RF温热强度由「弱」→EMS/RF温热强度「中」→EMS/RF温热强度「强」的顺序交替。

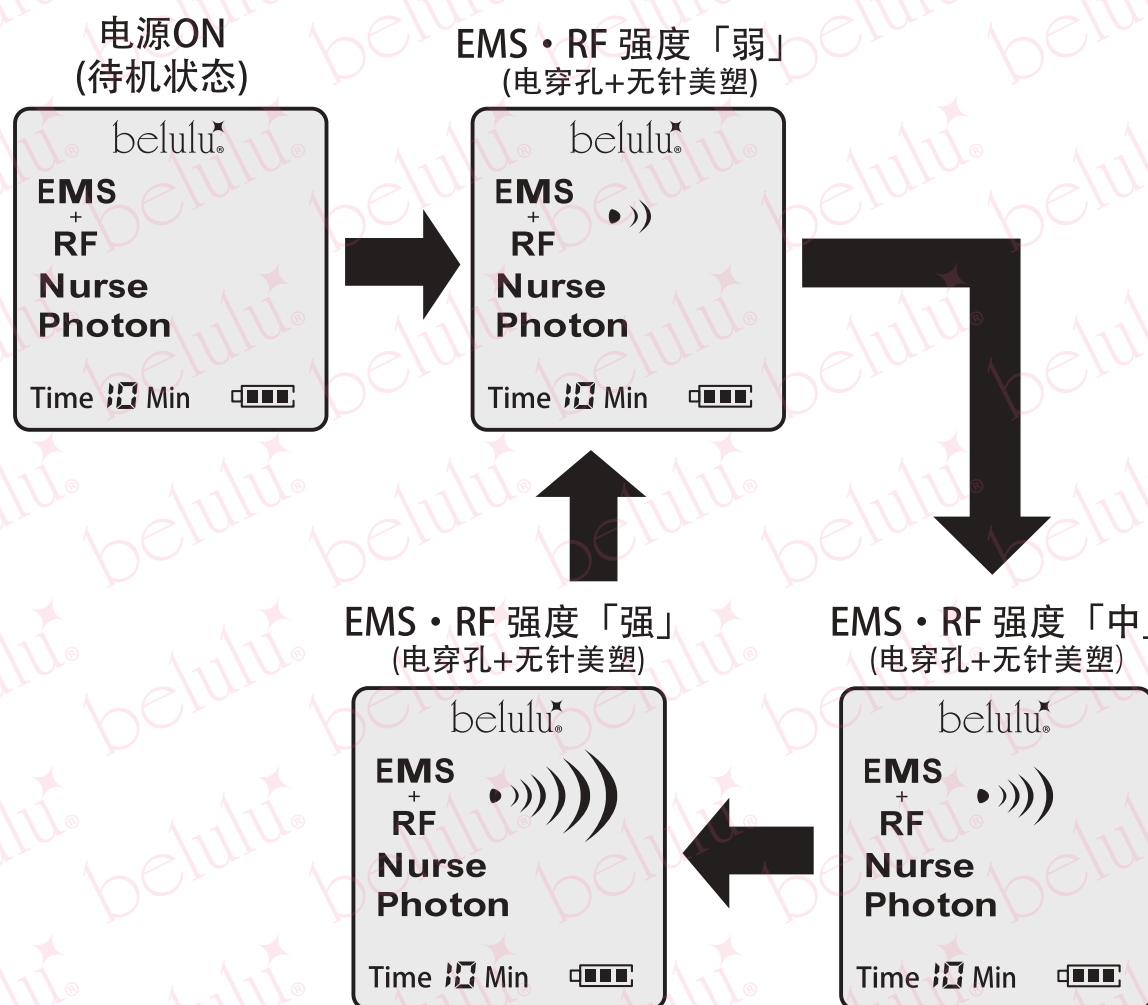


EMS/RF模式与光子嫩肤、震动按摩(Nurse)可同时进行。
EMS/RF温热模式请按PHOTON键。
各种模式请参照【PHOTON键】的说明进行操作。

PHOTON键

设定LED彩光和震动按摩。

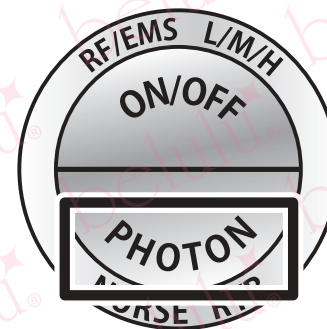

- 按ON/OFF键开机，液晶显示屏亮灯处于待机状态。
- 这个状态下每按一下PHOTON键，模式依次切换为震动按摩(Nurse)→红光LED→黄光LED→蓝光LED→混合光LED。
- ※ 请勿长时间裸眼直视彩光灯。
- 混合光的状态下按PHOTON键，LED灯和所有图标消失，只有液晶显示屏处于亮灯状态。
- LED灯和模式变更，需再次按PHOTON键。

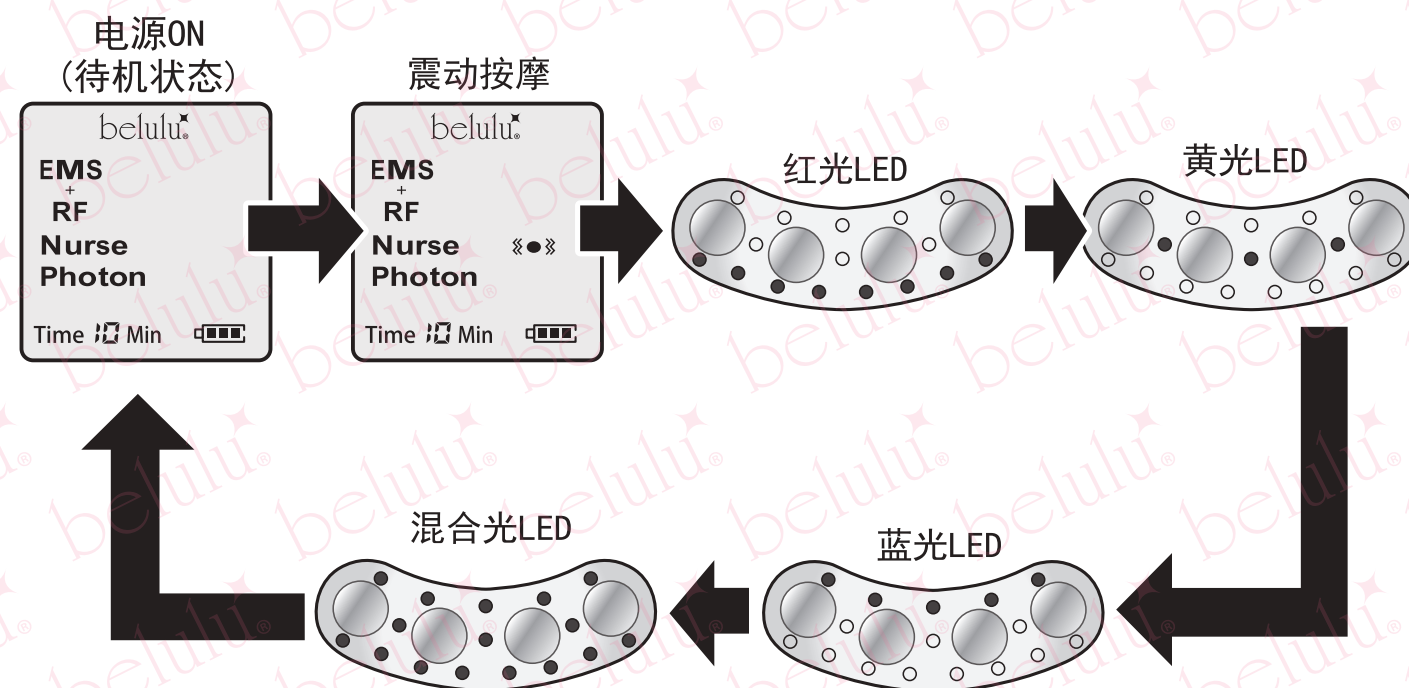

LED亮灯时，液晶显示屏的「Photon」会有「☀」图标显示。

可与EMS/RF温热模式同时使用。
震动按摩和光子嫩肤请按ON/OFF键。
更具体的操作请参照【ON/OFF键】的详细介绍。

5 使用前须知

使用前请检测各项功能和进行皮肤测试。

操作确认

【EEMS/RF温热模式】

1. 参照【ON/OFF键】说明书，设定EMS/RF温热模式。
 2. 确认液晶显示屏的RF和EMS强度显示。
 3. 在3D按摩头接触肌肤时，此模式会带来一定的刺激感，这是正常的反应。
- ※刺激感大小因人而异。



【震动模式】

1. 参照【PHOTON键】说明书，设定震动按摩模式。
2. 确认液晶显示屏的「Nurse」图标是否闪烁。
3. 启用震动模式时，会伴有声音与震动。



【光子嫩肤】

1. 参照【PHOTON键】说明书，请确认LED光是否由「红色」→「黄色」→「蓝色」→「3色混合光」正常切换。
 2. 请确认LED光是否闪烁。
- ※请勿长时间直视LED灯。
3. 请确认是否有「☀」图标。

【电穿孔/无针美塑美容模式】

1. 不会产生声音和震动。设定EMS/RF温热模式，自动开启此模式。
2. 刺激感大小因人而异。

皮肤测试

- 用清水清洗手腕内侧，之后擦拭干净。
- 在手腕内侧涂抹美容液，并使用本仪器进行离子导入等所有功能的测试。
- 确定使用无异常后，在脸部进行美容按摩。万一皮肤出现异常过敏反应，请及时与医生或者本公司联系。

6 功能和效果

U字形按摩头充分贴合肌肤，有效改善眼部、嘴部肌肤松弛状况，拉伸紧致肌肤更有弹性。

配合EMS/电穿孔/无针美塑美容模式效果使用更佳，让肌肤重焕新肌。

【EMS】 每周最多三次

通过刺激肌肉产生脸部肌肉运动，锻炼表情肌，紧致法令纹，可达到瘦脸提升的效果，同时可以促进脸部肌肤新陈代谢，增加胶原蛋白，恢复肌肤弹性。

※EMS与RF温热模式同时进行。EMS无单一使用模式。

【RF温热】（无线电波） 每周最多三次

通过高频微波数使得肌肤内部温度上升。在1MHz的微波下，能够有效地给肌肤升温，从而加快血液循环，促进肌肤细胞活性，排出肌肤废弃物。

※RF温热与EMS模式共同进行。RF温热无单一使用模式。

【震动按摩】 每周最多三次

通过适当震动，使美容液或啫喱的美容成分更好地渗透到肌肤底层。加快血液循环，促进细胞活性。

【电穿孔深层导入模式】 每周最多三次

电穿孔美容风靡日本美容界，无需打针注射即可将美容养分导入肌底。通过特殊电流可以将通常难以渗入至皮下部位的玻尿酸、胶原蛋白等高分子导入至真皮层。渗透率远远超过普通美容仪。

※使用EMS/RF模式时，电穿孔导入模式会同步自动进行。

电穿孔无单一使用模式。

【无针美塑模式】 每周最多三次

与电穿孔深层导入模式相结合，能把溶脂美容液渗透至肌肤深层处。而使用普通的美容液无法达到溶脂瘦脸的效果。

※在开启EMS/RF模式时，无针美塑功能也会同时自动进行。

无针美塑无单一使用模式。

【光子嫩肤】 一周三次～每日

不同的彩光颜色对应不同肌肤问题。

由于彩光颜色不同波长也不同，可深入肌肤不同维度，从而对肌肤产生美容效果。

可根据自身的肌肤状况，选择合适的LED彩光模式。

红色 LED

630nm波长(±10nm)

可以增加胶原蛋白，改善年龄肌。修复被紫外线晒伤的皮肤，实现抗衰老护理。

黄色 LED

590nm波长(±10nm)

促进肌肤新陈代谢，改善皱纹、痘痕及色斑暗沉，达到美白效果。

蓝色 LED

415nm波长(±10nm)

可以控制引发粉刺暗疮的活性氧，抑制痘痘生长。

3色 彩光

红光、黄光、蓝光同时闪烁。

全面护理肌肤，让肌肤焕发光泽透亮，省时省力。

组合模式选择

本产品的多模式功能可组合同步使用。

推荐给希望短时间护肤的人群使用。

EMS RF温热

+

震动按摩

EMS/RF温热的强度有L(弱)、M(中)、H(强)3档可选择。

EMS RF温热

+

光子嫩肤

EMS/RF温热的强度有L(弱)、M(中)、H(强)3档可选择。

光子嫩肤彩光有四种模式可选择。

倒计时功能

开启电源后，液晶显示屏有时间显示，10分钟后会自动关闭电源，让您在合适的时间里可以放心使用。

选择好模式后，液晶显示屏右下方会出现10分钟标识，每过一分钟会显示倒计时。



7 美容仪的使用

请务必遵守以下注意事项

- 本机器不防水，请勿放置在浴室或者水汽多的潮湿环境。
- 请勿将产品放置于暖炉等高温场所附近。
- 在使用光子嫩肤模式时，请勿裸眼直视LED彩光灯。
- 使用本产品时，请尽量涂抹美容凝胶或化妆水，因为肌肤不够湿润情况下，3D按摩头可能会比较难以滑动。（光子嫩肤模式下可以不涂抹）。
- 本产品侧面会有微电流导条，请在使用时握好贴合。
- 3D按摩头轻轻贴合脸部肌肤后，再慢慢滑动。
- 使用时请取下您的贵重金属首饰与手表。
- 使用本产品时，一旦觉得肌肤有异样感，请立即停止使用，并与医生或本公司取得联系。

【使用前准备】

- 美容液、美容凝胶或化妆水

…质地浓稠，无添加，美容成分高的产品即可。推荐使用belulu专用美容液。因成分渗透到肌肤底层，请结合肌肤问题选择适当的产品。

- 乳液或面霜

…护理后使用。

以下使用步骤仅供参考，请结合自身肌肤状况使用。

- 卸妆后洗干净脸，把脸上多余水分擦干。
- 如果使用过量的美容液，多余的美容液有可能会渗入到LED灯板缝隙中，为避免此情况发生，请每次少许适量使用美容液。
- 推荐使用方法如下。


对应法令纹或脸部松弛

EMS/RF温热刺激脸部肌肉运动


EMS
RF温热



- ① 在脸部涂抹美容液或者化妆水。
※此时不要使用乳液或者面霜。

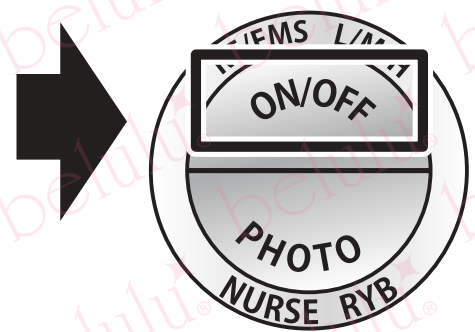

- ② 按ON/OFF键，设置EMS/RF温热模式。
也可以选择强度。
初次使用或敏感肌人群建议从弱到强模式递进。

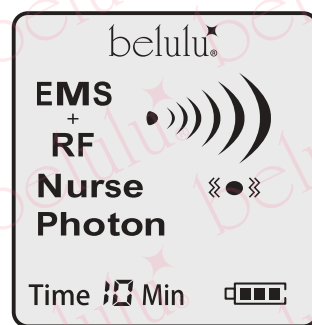

- ③ 3D按摩头接触皮肤并轻轻滑动。具体操作方法请参照第14页详细内容。

对应洗脸后皮肤紧绷、干燥

电穿孔

无针
美塑

震动
按摩

EMS
RF温热

※自动同步运行




- ① 在脸部涂抹美容液或者化妆水。
※此时不要使用乳液或者面霜。



电穿孔深层导入/无针美塑模式
+震动按摩（nurse）来彻底保湿！



推荐敷面膜时使用离子导入功能。

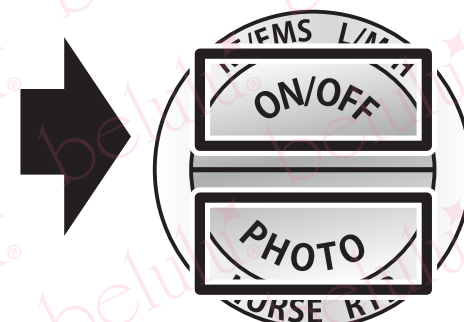

- ② 按ON/OFF键设置EMS/RF温热模式，
再按PHOTON键设置震动模式。
EMS/RF模式的强度档位可选择。

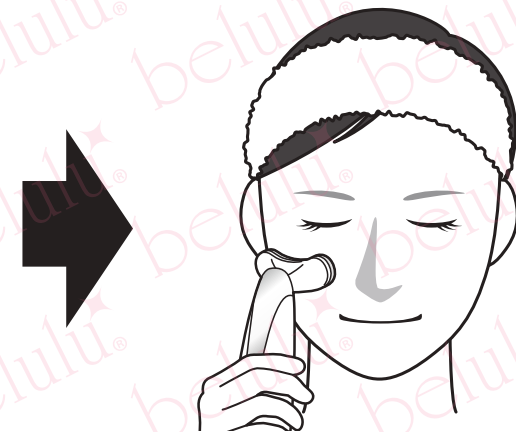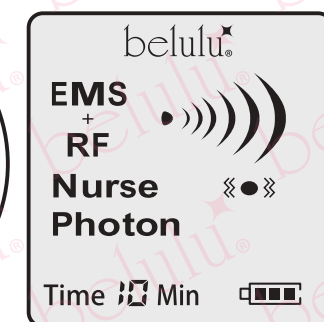

- ③ 3D按摩头接触皮肤并轻轻滑动。具体操作方法请参照第14页详细内容。

压缩面膜



如果没有美容液或浓稠的化妆水，可以使用化妆水+压缩面膜或含营养导入成分的贴片面膜。敷在脸上配合本仪器进行使用，效果更佳。

肌肤暗沉的对策

EMS/RF温热与按摩模式促进血液循环，LED黄光可改善肌肤暗沉。


EMS
RF温热

震动
模式


黄色
LED




① 在脸部涂抹美容液或者化妆水。
※此时不要使用乳液或者面霜。

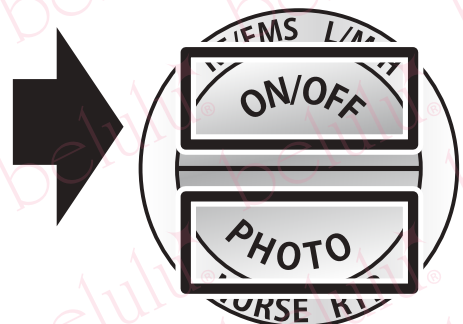

② ON/OFF按键设定EMS/RF温热模式，
PHOTON按键设定震动按摩模式。
EMS/RF模式的强度档位可选择。

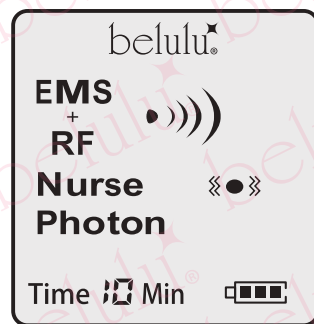


③ 使用3D按摩头轻轻在肌肤上滑动。具体操作方法请参照第14页详细内容。

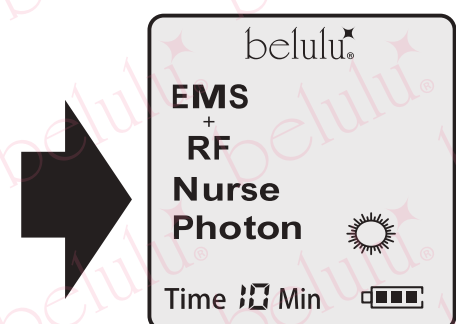

④ 在EMS/RF模式与震动按摩结束后，按PHOTON按键开启绿色LED灯。将美容仪按摩头离开离肌肤一厘米处，照射在肌肤暗沉部位。

【使用方法】

把脸划分为「嘴巴右侧」、「嘴巴左侧」、「右脸颊」、「左脸颊」、「鼻子」、「额头」这几个区域，用3D按摩头逐个区域按摩，嘴巴周围附近皮肤以及脸部容易干燥区域，请留意稍微延长按摩时间以便美容液能深入肌肤。若感到不顺滑时，需及时添加美容液、美容凝胶、化妆水等。

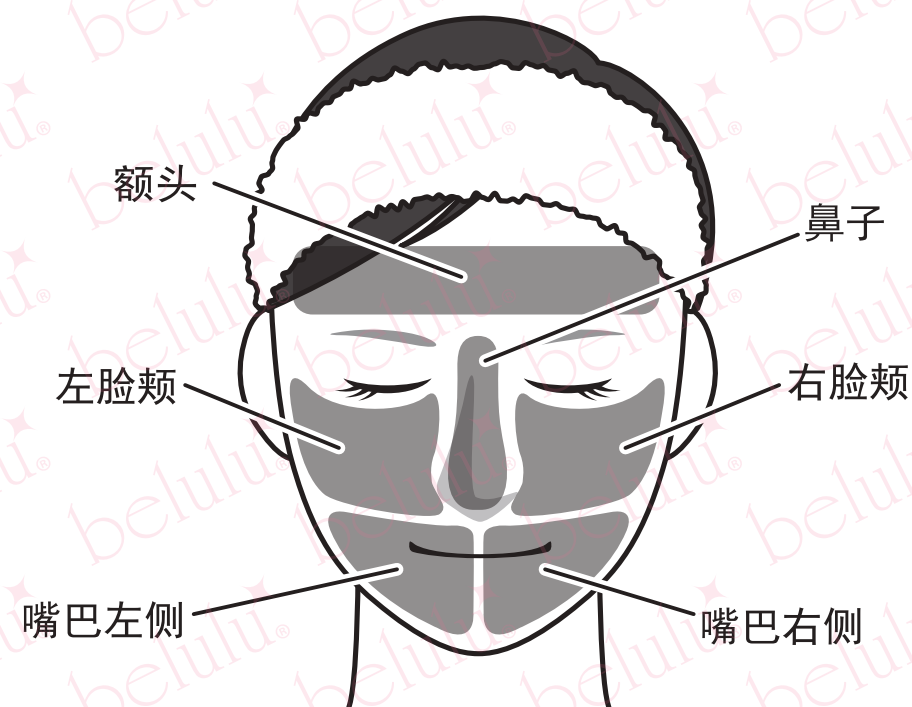

【建议护理时间】



以上操作仅供参考。具体情况
请按自己实际进行。

按照「由下而上」「由内而外」的方向进行护理。

【嘴部周围】



以下巴为起点，
由下而上向脸颊
处滑动。

【脸颊】



以鼻翼为起点
向外侧边画圈
边滑动。

【鼻子】



鼻梁处边画圈边
上下滑动。鼻子周围
边画圈边滑动。

【额头】



上下左右以画圈
的方式慢慢地来
回滑动。

护理完成后，将残留的凝胶精华涂抹慢慢吸收，再使用乳液或面霜进行保湿护理。

锁骨部位的护理方式



提拉紧致胸部



塑形臀部



8 使用后护理

- 按ON/OFF键关机。
- 脸部残余的化妆水和美容液请用手部继续稍加按摩，使其充分吸收。
- 使用结束后，需要做好脸部护理，补充乳液或者保湿霜等护肤品。
- 使用结束后，按摩头上残留的化妆水、美容液等请使用纸巾、湿布擦拭干净。
※请勿使用含有腐蚀性清洁剂。
※本产品不防水，请不要直接用水清洗。
- 为了保持日常清洁与干净，请置放在远离垃圾、灰尘的地方。
- 避免高温直射与湿润环境，请放在小朋友触及不到的地方。

9 -常见问题-

无法开机	●长按ON/OFF键了吗？ 按一下键无法开机。 请长按键2秒以上。 ●是否未充满电？ 由于锂电池特性，不接电源的情况下会自然放电，会有电量不足的情况。 充电一小时后再次按ON/OFF键即可开机。 【未解决的情况】 考虑到有可能是产品电源线断了或者机器故障等问题，请及时联系本公司。
不能充电	●充电线正确连接了吗？ 确认充电线插口无误，插口不紧的情况不通电，则无法充电。请参照【本机充电】说明，确认插口是否插入正确，或是否插紧。 【未解决的情况】 考虑到有可能是产品电源线断了或者电池、本机初期不良、机器故障等问题，请及时联系本公司。
EMS/RF 温热不工作	●请进行实际操作确认。 EMS/RF 温热震动用肉眼看不见，也没有声音。 若存在怀疑请参照「用前须知」的【EMS/RF 温热模式】进行操作确认。 【操作确认后，不工作的情况】 考虑到有可能是本机初期不良或机器故障等问题，请及时联系本公司。

电穿孔/无针美塑 功能不工作	●请操作确认。 电穿孔/无针美塑工作时，肉眼无法看出任何反应，也听不到声音。请参照【使用前注意】中的【电穿孔/无针美塑】的说明进行操作。 【确认已经启动但是没有任何反应】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。
不操作的情况下 液晶屏背光不亮	●并非故障。 因本机有节电功能，在无按键操作的情况下，液晶显示屏背光将自动熄灭，按键后即可再次亮屏。模式及输出设定将变更。
液晶显示屏变 模糊或LED灯变暗	●电量不足。 电量不足时液晶显示屏及LED灯的光将变弱。请连接充电线进行充电。 【充电后此情况仍无改变】 可能产品存在初期不良状况，请联系本店客服解决。
使用中发出 “哔”的声音后关机	●并非故障。 各功能模式运作十分钟后，本机将自动关机。

使用时感觉手部
有漏电的触感

●并非漏电。

本机手柄的金属部分有微电流流出，帮助美容成分穿过皮肤表层障碍浸透皮肤深部，根据个人情况会有刺激感。微电流对人体无害，但如有介意请将强度下调后使用。

【即使将强度下降，也不适应微电流的情况】

如需退货请与本公司联系。

但需要在收货后七日内申请。

常见问题

Q. 一定要使用美容液吗？

A. 化妆水和美容凝胶都没有问题，但是比较推荐水溶性好，且含有保湿成分的化妆水。

同时美容成分中的高分子能有效渗入肌肤深处，使用高浓度无添加的美容液会发挥更好的效果。推荐搭配本产品使用的专用美容液。

Q. 怀孕时可以使用本品吗？

A. 虽然怀孕中（产前或产后）也可以使用，但是由于这期间荷尔蒙不平衡，肌肤也处于脆弱的状态，而且也有可能偶尔会出现皮肤过敏情况。

建议务必询问医生后，根据皮肤状态再作使用。

（美容仪的功能和美容液的成分不会对孕妇及胎儿造成影响，请安心使用。）

Q. 3D按摩头部分使用的是什麼材质？

A. 不銹鋼材质。
不易划伤、腐蚀，不易生锈，不易引起过敏。
※但不代表所有人都不会有过敏情况。如果担心，可在手腕内侧进行皮肤测试。

Q. 使用后感到不适的情况怎么办？

A. 如有需求，请与本公司联系。
※但寄回运费由顾客承担。

Q. 是否可以每天使用？

A. 尽管本产品所配备的功能具有较好的美容效果，但过于频繁使用可能会给肌肤带来负担。请您按照本书记载的使用频率进行。
每日频繁使用并非立即见效，坚持使用最重要。

Q. 使用后没感觉到效果…

A. 商品使用效果因人而异。
另外本品是以家用便携为主的，与美容沙龙会所使用的大型美容器材有一点区别，见效相对较慢。
坚持使用，效果是可以慢慢看到的。

关于保修期内的维修

保修期内为免费维修

购买订单号 姓名 购入商品 已购时间 故障状况

请提供以上信息，并通过电话或者邮件联系本公司

E-mail: support@kireido.com 日本售后联系电话: 0120-09-5121

※不限于使用次数，购买超过三个月，如需修理，来回运费由客人承担。

※已过保修期的产品如需修理，将根据实际修理状况进行收费。

※如有不明之处，请联系本公司。

日本售后地址

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係 〒221-0801

中国售后地址

广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心 绮丽堂售后部
0771-2875241

【保修书】

※本体以外配件属于消耗品，
不属于保修对象。

本保修书承诺按照所规定内容进行保修。

购买后在保修期内发生故障，请参照本说明书进行维修。

〈维修规定〉

- 在保修期内按照使用说明书操作出现故障的情况可以进行免费维修。
- 在保修期内，顾客需要维修时请填写本保修书并将产品和保修书按照规定提出维修。
- 以下情况，即使在保修期内，也不属于免费维修。
 - 因使用不当，自行修理、改造而造成的故障及损伤。
 - 购买后因移动，跌落及运输碰撞造成的故障。
 - 火灾、地震、雷击等自然灾害、异常电压等造成的故障及损伤。
 - 保修书上未出现的情况。
 - 保修书上未填写客户姓名、购买日期等或是文字修改的情况。

■商品编号: ■品名: belulu rebirth

■保修期: 收到商品后一年内(不限于使用次数)

■顾客姓名: _____

■住址: _____

■订单号: _____

销售方: 株式会社ビューティフルエンジェル

日期: 年 月 日 印

●若通过网络平台购买产品，因客人基本信息以及购买信息均有留存，[购买日][店铺印章]即使未填写，也不影响保修。

但咨询或者受理维修时需要客人提供订单编号，因此请您务必保留好您购买时的订单编号。

●产品本体修理会按照本保修书条款执行。因不限制客户法律上的权利，关于已过保修期的商品修理事项，若有不明之处，请咨询本公司。