

belulu® Tooth Clean

美ルルトゥースクリーン

取扱説明書


この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので

大切に保管してください。

belulu®

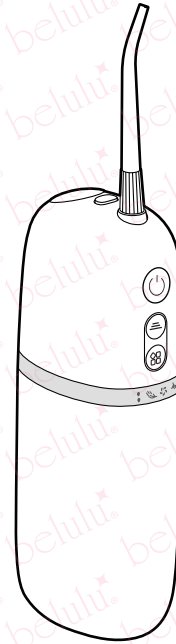

1 注意・警告

ご使用前に必ずお読みください。

△ 警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や臭異、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- スーパ等高温になる場所で本品やケーブルを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品はIPX7相当の防水仕様ですが、水に入れたままや濡れたままの放置はしないでください。
※一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない※
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、ご使用を中止して医師に相談してください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外

△ 注意

- 自分で操作ができない方には使用させないでください。
- 口腔内の感覚に異常がある方はご使用をお避けください。
- 歯周病等、歯や歯茎、舌に異常がある場合は歯科医に相談の上、ご使用ください。
- 口腔内洗浄以外の目的には使用しないでください。
- 40℃以上の温水は使用しないでください。やけどや故障の原因になります。
- 衛生上、ノズルを家族や他人と共用しないでください。
- ご使用後はタンクやノズルを洗浄し乾燥させ、清潔にしてください。汚れや水がついたまま放置しますと、カビや雑菌繁殖の原因になります。
- 付属のノズルは本品専用です。他機器には使用しないでください。また、他機器のノズルを本品に使用しないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。
- 1箇所への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、口腔内に異常が出た場合は、ご使用を中止してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 洗浄時にベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤類を使用しないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

修理規定

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

- 1.取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
- 2.保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
- 3.次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b.お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c.火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d.本書の提示がない場合。
 - e.本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。

belulu トウスクリーン Tooth Clean 保証書				
保証期間	販売日から1年間 (消耗品類は除く)	ご購入日	年	月 日
お客様	■ご氏名: _____			
	■ご住所: _____			
	■電話番号: _____			
	■受注番号: _____			
販売店	_____			
	株式会社ビューティフルエンジェル			

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

お客様サポートセンター

受注番号または注文番号

ご氏名

購入商品

購入からの期間

故障状況

上記必須事項を添えて、下記までお問い合わせください。

お電話で問い合わせる

固定電話・携帯・スマートフォンから

 **0120-48-6301**

受付時間：平日 11:00～16:00

メールで問い合わせる



左側のQRコードをスキャンして、お問い合わせシステムに必須事項とお問い合わせ内容を入力してください。

メールは常時受け付けておりますが、
返答は平日11:00～16:00となります。



商品返送先住所

株式会社ビューティフルエンジェル 修理係
〒221-0801 神奈川県横浜市中区神奈川区神大寺2丁目29-25


※製品の返品や修理をご希望される場合は、ご返送する前に必ずお客様サポートセンターにご連絡ください。

2 セット内容・名称

※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。
※本体や給水チューブ等に、性能テストを行なった際の水が残っている場合があります。

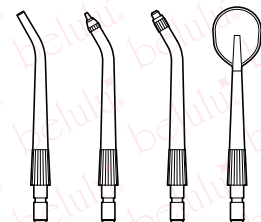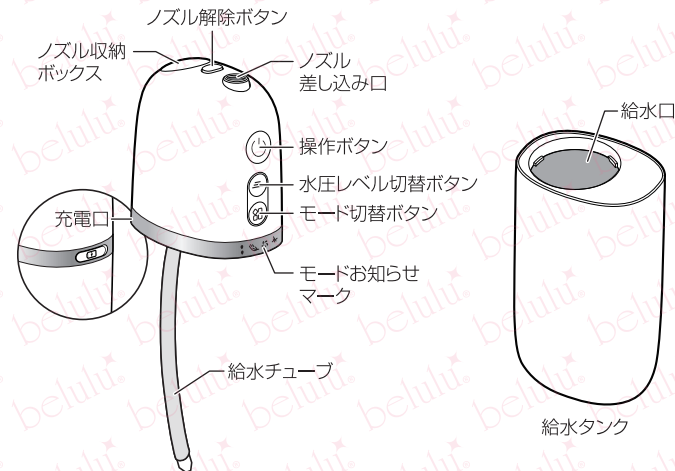

ノズル4種

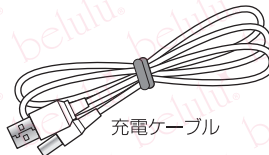


充電ケーブル

【本体仕様】

- 本体サイズ
高さ166×幅65×奥行49mm
- 防水等級：IPX7相当
(一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)
- 水タンク容量：約200ml
- 充電電池容量：1000mAh
- 充電時間：約2時間
- 持続時間：約1時間
- 充電ケーブル：USB Type-C
- 入力電力：5W

3 本体の充電

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。
- ご使用中に、操作ボタンが赤で点滅した場合、それは電池残量が少ないことを意味します。本体を充電してください。
- 必ず電源を切ってから充電してください。
- 充電ケーブルの充電コネクタを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや別売のUSB式アダプター等のUSBポートに接続します。
- 充電中は操作ボタンが赤で点灯します。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 操作ボタンのライトが赤から白に変わりましたら満充電になり、ケーブルを抜いてください。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

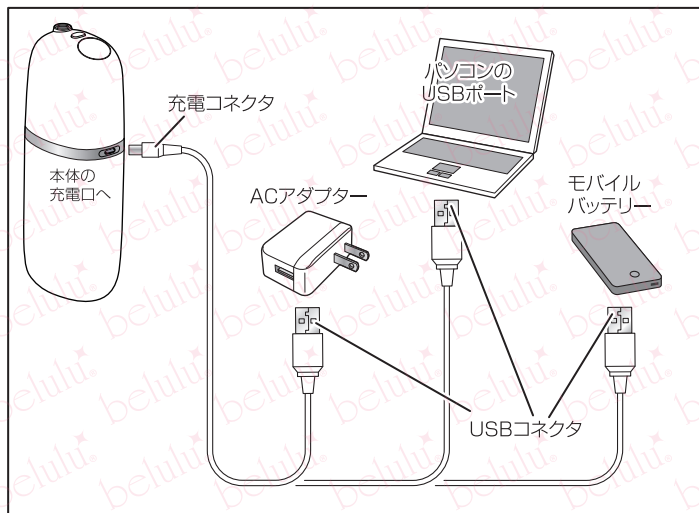

修理について

お問い合わせ先の販売店へ直接ご相談ください。

商品到着1週間～3ヵ月

初期不良の場合、修理の送料は当社負担

商品到着3ヵ月～1年

往復の送料は購入者様ご負担

保証期間内中の修理費用は無償とさせていただきます。

※弊社の商品のみ対象とさせていただきます。

※ケーブル類や美容液等、付属の消耗品は保証対象外です。

※オークション、アウトレット、各種フリマアプリ等で販売の中古品、または非正規代理店でご購入された商品は保証対象外となります。

※修理をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。当社承認のない商品の送付は受付致しかねます。

※保証期間終了後は、診断をして対応可能な場合はご要望により有償にて対応させていただきます。

※当初の保証期間の満了日をもって保証期間は終了致します。弊社での修理・交換等をお受けいただくことにより、保証期間が延長するものではありません。

※修理品のご送付の際は、宅配便・ゆうパック・特定記録郵便などをご利用いただき、必ずお手元に送り状の控えを保管してください。控えがない場合の配送トラブルは対応致

7 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

<p>電源が入らない</p>	<p>●充電が切れていませんか? 充電電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ自然放電し、充電切れになる場合があります。 ON/OFFボタンを押して充電お知らせランプがゆっくり点滅している時は充電切れです。 充電ケーブルで充電を行い、再度ON/OFFボタンを押してみてください。</p> <p>【解決しない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。</p>
<p>充電ができない・ケーブルの角度によっては充電が不安定になる</p>	<p>●ケーブルは正しくつながっていますか? ケーブルの差し込み場所が間違っていたり、差し込みが不十分な状態ですと通電しないため、充電が行われません。 【本体の充電】をご参照の上、差し込み場所に間違いがないか、しっかり差し込まれているかご確認ください。</p> <p>【解決しない場合は】 ケーブルの断線、もしくは充電電池・本体の初期不良および故障が考えられますので、当社へご連絡ください。</p>
<p>水が出ない 水の出が悪い</p>	<p>●ノズルや給水チューブ先端を確認してください。 ノズルが変形していたり、給水チューブ先端に汚れ等が詰まっていると、水の吹き出しに影響が出ます。 ノズル交換や給水チューブ先端の洗浄を行なってください。</p> <p>●本体を傾けすぎていませんか? ご使用時は、本体をまっすぐ垂直に立ててください。 斜めに傾けすぎると水が出にくくなります。</p> <p>【動作確認しても作動していない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。</p>

4 ボタンの説明



操作ボタン
 機器の稼働と停止を切り替えます



水圧レベル切替ボタン
 水流強弱の切り替えを行ないます



モードボタン
 稼働モードの切り替えを行ないます

5 操作方法

電源のON/OFF

※電源を入れてからやモード設定・水圧強弱設定をしてから電源ONのどちらでもご使用が可能です。



- モードと水圧を設定し後、操作ボタンを押して稼働させ、ケアを行ってください。
※手動モードの場合のみ、操作ボタンを長押しすると稼働します。
稼働開始から90秒後に自動で電源が切れます。
- 使用中に、モードと水圧を調整できます。
- 稼働中に操作ボタンを再度押しすと、停止します。

水圧レベルの切り替え



- モードを設定したら、水圧レベル切替ボタンを1回押すごとに、水圧レベルが弱→中→強→弱...という順番で切り替わります
- 水圧レベルボタンが点灯します。レベル提示カラーは下記となります。

弱:青色

中:ホワイト

強:オレンジ色

- 初めて使用する際は、弱からお試しになるのをお勧めします。

お風呂でも使えるIPX7等級の防水設計。


- ※一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない。
- ※濡れたままや水没させたまま長時間放置しないでください。

ご使用後

1 洗浄水を使い切った時や本体の動作を停止したい時は再度、操作ボタンを押して、稼働を停止させます。

水飛び散り防止のため、停止してからノズルを口から出してください。


2 ノズルを取り外して、給水タンクに残った水を捨ててタンク内をよくゆすいでください。

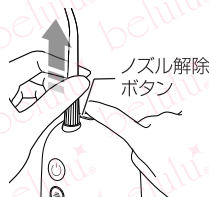

①ノズル解除ボタンを押したまま、ノズルを上方に引き抜いてください。



②本体上部を反時計回りに回して開けます。

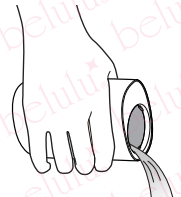

③給水タンクに残った水を捨ててタンク内をよくゆすいでください。

- 給水タンクに汚れが付着した場合は、40℃以下のぬるま湯を少量入れて少し揺すったあと、水を捨ててください。
- 使用したノズルと給水チューブ先端は定期的には柔らかいブラシ等でこすり洗いでください。

3 洗浄後は乾いた布で水分を拭き取り乾燥させてください。

ご注意

- 本体の洗浄にシンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
- 本品は防水仕様ですが、長時間水没や濡れたまま放置はしないでください。
- ゴミやホコリ、直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

口内に出血や炎症等異常がある場合はご使用をお控えいただくか、歯科医師にご相談の上、ポイントケアモードから始める等十分注意しながらご使用ください。

【歯間洗浄】




歯間洗浄用ノズルを使用し、
歯と歯の間に水流を当てながらゆっくり周回します。
歯の表側・裏側両方行なうとより効果的です。

【歯周ポケット洗浄】



ポイント洗浄用ノズルを使用し、
歯と歯茎の間に水流を当てながらゆっくり周回します。
歯の表側・裏側両方行なうとより効果的です。


【矯正器具洗浄】

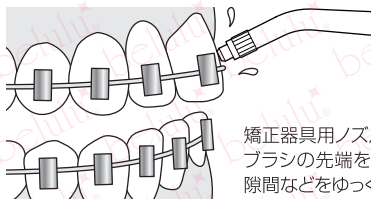

矯正器具に影響を与えるおそれがないか歯科医師に確認の上、ご使用ください。

矯正器具用ノズルを使用し、
ブラシの先端を矯正器具周辺にやさしく当てながら
隙間などをゆっくり洗浄します。

【舌洗浄】

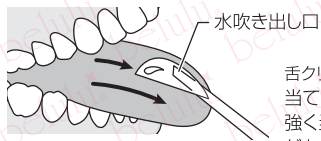

舌クリーナー用ノズルの水吹き出し口側を舌に向けて
当て、奥から手前へ引くようにゆっくり滑らせます。
強く当てて擦ると舌を傷めたり嘔吐反射が起きる場合
がありますので十分ご注意ください。

モードの切り替え

4つのモードからお好みに合わせて選んでお使いいただけます。


- ◆**手動モード**
自分のタイミングで洗浄ができるモードです。
- ◆**ソフトモード**
初めて使う方や、歯や歯茎など口内が敏感な方向けのやさしいモードです。
- ◆**ノーマルモード**
しっかり洗浄したい方向けのスタンダードモードです。
- ◆**マッサージモード**
強弱を繰り返す振動で、マッサージ効果が期待できるモードです。



- モード切替ボタンを1回押すごとに、下図のようにモードが切り替わります。
- 各モードに対応するマークが点灯します。

手動モード



操作ボタンを長押しすると稼働を開始し、
ボタンをはなすと一時停止します。

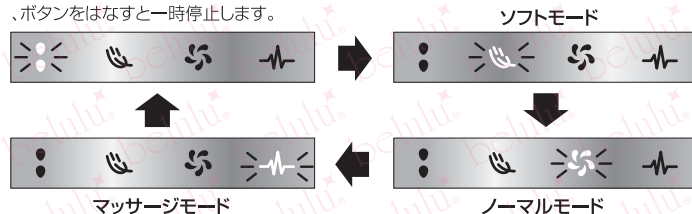

6 使用方法


1 ノズルを取り付ける

ケアに合ったノズルを、ノズル差し込み口に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

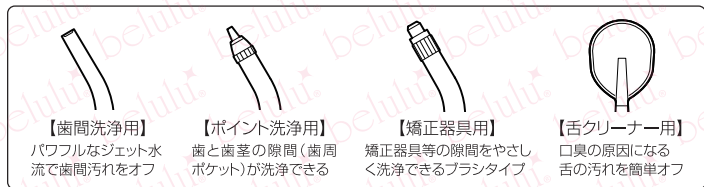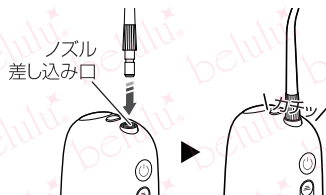

2 給水口から水を入れる

①本体上部を反時計回りに回して開けます。

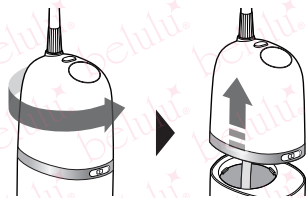


②給水口から水を入れます。



タンクの外側に目安マークがあります。200MLの高さまでを目安に入れてください。

マーク位置を超えてしまいますと水漏れのおそれがあります。

③本体上部をタンクにかぶせ、時計回りに回してしっかり閉じてください。

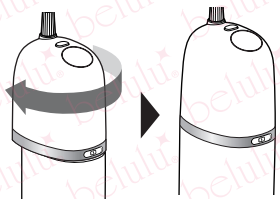

●水または40℃程度までのぬるま湯をご使用ください。熱湯はやけどや本体の破損・劣化の原因になりますので使用しないでください。(推奨温度：5℃～40℃)

●使用する水に口腔洗浄液等、他の液体を混ぜないでください。成分の詰まりや付着により故障・劣化の原因になります。

3 使用するモードと水圧強弱を選択・設定する

操作方法をご参考に、モードと水圧を設定してください。

4 ノズルの先端を口に入れ、 口を閉じてから操作ボタンを押してください。

本品を稼働させると水が勢いよく噴出します。飛び散り防止のため、必ずノズルを口に入れてから稼働させてください。

お風呂でのご使用もおすすめです

- ご使用時は本体を垂直に立ててください。斜めに傾けすぎると、ノズルから水が出なくなります。
- ノズルが歯や歯茎に当たらないようご注意ください。
- 稼働中もモードボタンを押すことでモードを切り替えることができます。
- 本体は防水機構を備えていますので、洗浄水等による水濡れにも安心して使用していただけます。
- ノズルの向きは360°自在に回転できます。使いやすい向きに調整して使用してください。

