

ホットアイマスク 取り扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 本品を装着中は目を閉じてください。
- 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でコネクター部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や付属品を使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 車や自転車等の運転をしながら使用しないでください。
- 万一、皮膚や目に異常が見られた場合は、本製品のご使用を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本製品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- 本製品の保管時は、水平で安定した場所に置いてください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 本品は、目元のケアを行うものです。本来の使用用途以外の使い方はしないでください。
- 温熱ケアを行う際は、低温やけどに十分ご注意ください。
低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。また、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もあります。
- 糖尿病等、温感および血行に障害をお持ちの方、意思表示ができない方、高齢者、乳幼児は特にご注意ください。(必ず保護者の監視の下でお使いください。)
- 温熱ケアが熱すぎると感じたらすぐにご使用を中止してください。
- 温熱ケアを行ったまま就寝しないでください。
- 本体は水洗いが可能です。(手洗いのみ)
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等を行った際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 皮膚ガン病歴がある方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方)
- 目元に疾患がある方(目の手術後・白内障、緑内障、角膜びらん等) ●脳梗塞になった事がある方
- 高血圧および低血圧の方 ●飲酒後や特に体調がすぐれない方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●粘膜などのデリケートゾーン
- 傷や炎症がある部分

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:045-341-3251

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801
神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。


■品番: ■品名:ホットアイマスク
■修理保証期間:販売日から6ヵ月間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印


- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

製品仕様

※製品仕様やセット内容は、予告なく変更される場合がございます。

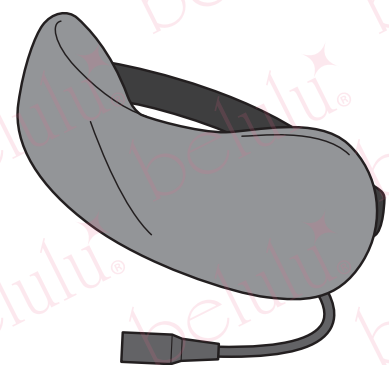


ホットアイマスク本体

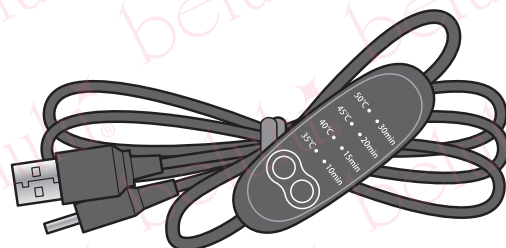


コントローラー付きケーブル

使用方法

- 本品は、電源元にケーブルを接続した状態でご使用いただく仕様です。
- リモコン付きケーブルの本体用プラグを、アイマスク本体のケーブル差込口に差し込みます。
- リモコン付きケーブルのUSBコネクターを、モバイルバッテリーやパソコン・USBポート付きACアダプター等に差し込みます。
- モバイルバッテリーやパソコン等の場合は、各機器の電源をONにしてください。

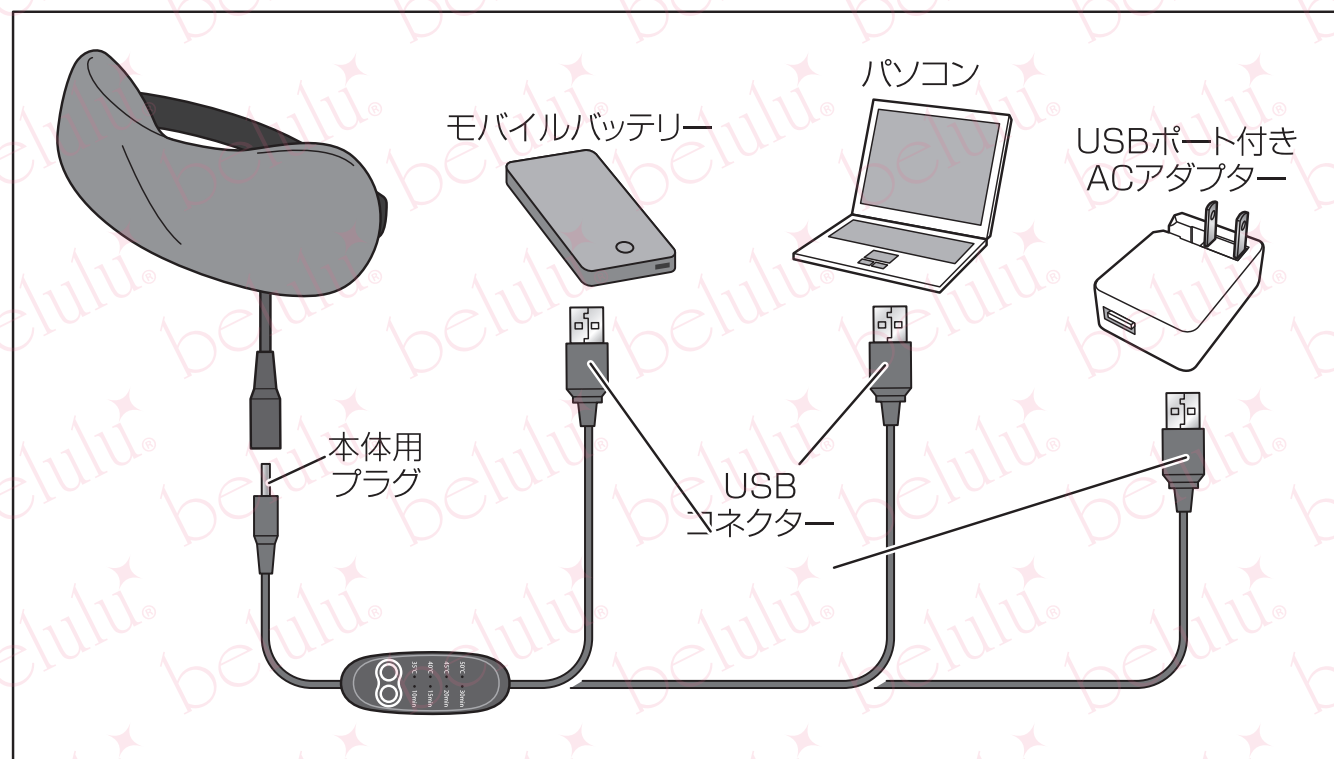

操作方法

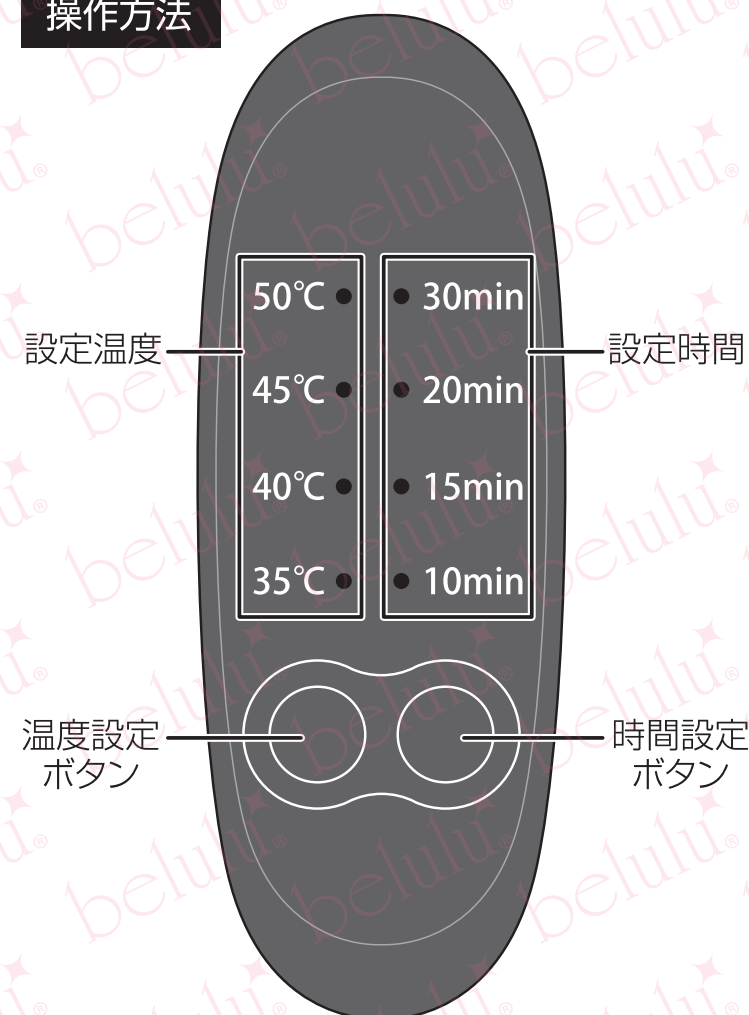

【温度設定】

- 温度設定ボタンを押すと、電源がONになります。
- 温度設定ボタンを押すごとに、「35℃」→「40℃」→「45℃」→「50℃」の順に切り替わります。
(設定中の温度のランプが点灯します。
40～45℃:緑色 / 50℃:赤色)
- 50℃の状態温度設定ボタンを押すと、電源がOFFになります。
- 設定温度を下げる場合は、一旦電源をOFFにしてから再度設定してください。


【時間設定】

- 時間設定ボタンを押すごとに、「10分」→「15分」→「20分」→「30分」の順に切り替わります。
(設定中の時間のランプが点灯します。
10～20分:緑色 / 30分:赤色)
- 時間を減らす場合は、上記を参照し温度設定ボタンで電源をOFFしてから再度設定してください。
(時間設定ボタンでの電源ON/OFFはできません。)

- お好みの温度と時間に設定し、アイマスクを装着してください。
- 設定温度になるまでに数分かかる場合がございます。
- 稼働中に設定時間を変更すると、設定した時間が追加されます。

洗い方

- 本品は手洗いのみ可能です。
- 本品内に発熱機器が収納されておりますが、こちらは水洗いできません。必ず取り出してから手洗いを行なってください。
- 衣類用洗剤を溶かしたぬるま湯でやさしく洗ってください。

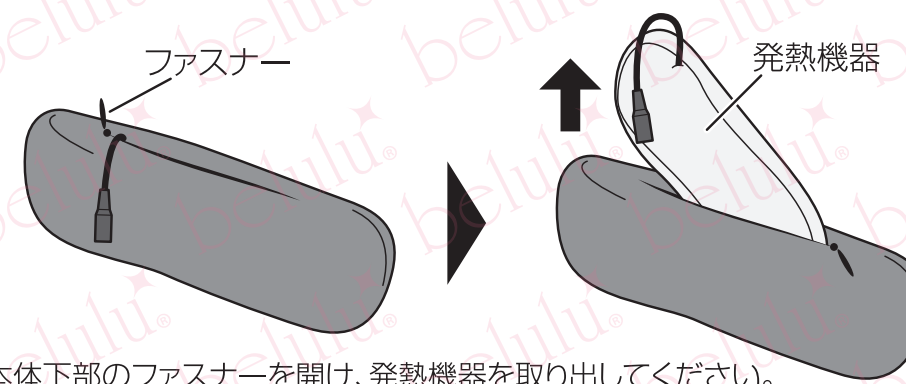

本体下部のファスナーを開け、発熱機器を取り出してください。